




hyrax®

hyrax®  **click**

hyrax®  **neo**

Dehnschrauben für alle Fälle.

Die **hyrax®** und **hyrax® neo** Schrauben
(Hygienic Rapid Expansion Screw) sind
Spezial-Dehnschrauben für die schnelle
Gaumennahterweiterung mit Hilfe
einer festsitzenden Apparatur.

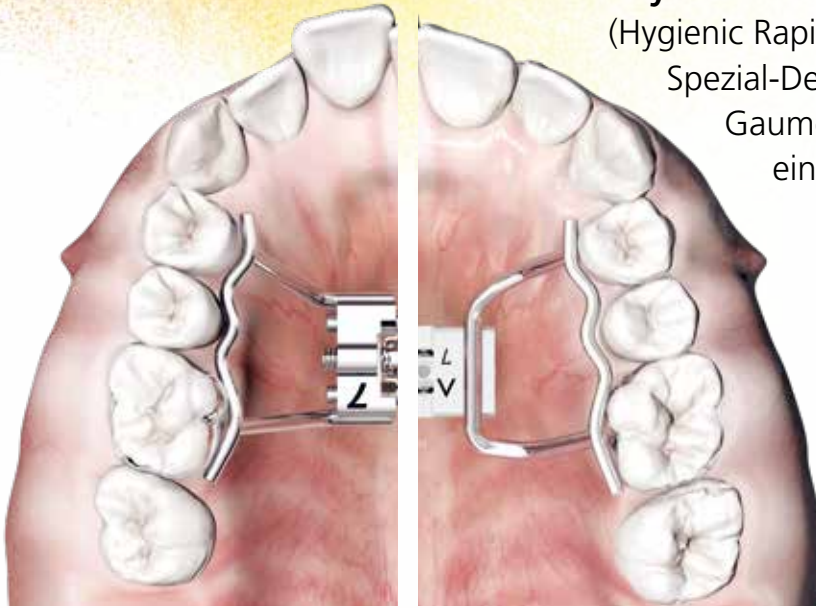



hyrax®
hyrax® **click**



hyrax® **neo**



Die hyrax® Schrauben sollen „freischwebend“ mindestens 1-2 mm über dem Gaumendach liegen. Um Hebelwirkungen zu vermeiden, ist auf eine parallele Lage zur Okklusionsebene zu achten.

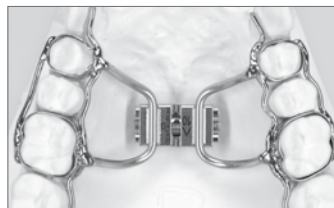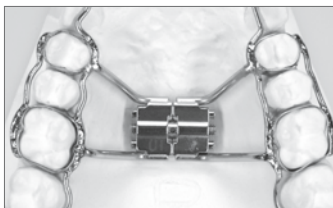

Sie werden mittels ihrer Retentionsarme an vorgeformte Bänder geschweißt oder gelötet. Zum einfachen Biegen der Retentionsarme empfehlen wir den Universal-Biegeschlüssel (REF 611-122-00) ohne Verwendung zusätzlicher Zangen.

Universal-Biegeschlüssel

REF 611-122-00
Zum leichten und schonenden
Biegen der Retentionsarme




Sicherheits Schlüssel

REF 611-120-01
Passend für alle Dentaurum hyrax® Schrauben.
Zur sicheren Aktivierung der Dehnschrauben bei
festsitzenden Apparaturen beim Patienten.

Sie haben die Wahl!

Finden Sie die richtige GNE-Schraube, die zu Ihrer Arbeitsweise passt!

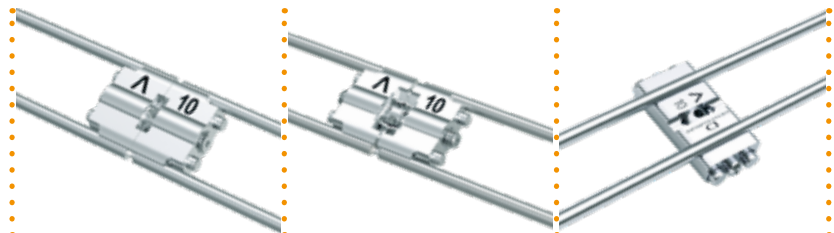

hyrax®

hyrax® **click**

hyrax® **neo**

Solider Körper

Hohe Stabilität auch bei voller Aktivierung

•

•

•

Stabile Führung

Optimal gestaltete Führungsstifte

•

•

•

Leichtes Biegen

Bruchstabile Retentionsarme, platzsparendes Abbiegen der Arme durch abgesetzten Schraubenkörper möglich

•

•

•

Dehnwegbegrenzung

•

•

•

TAD optimiertes Design

Ausrichtung der Retentionsarme parallel zur Gaumennaht

•

Patentierete Rückdrehsicherung „Click“

Perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase. Spürbares Einrasten nach jeder 1/4 Umdrehung

•

Hohes Maß an Sicherheit

Sowohl für den Behandler als auch für den Patienten

•

•

•

Lasermarkierung

Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg

•

•

•

Erhältliche Varianten

Ohne Arme

•

•

•

Mit geraden Armen

•

•

•

Mit abgewinkelten Armen

•

•

•

Lieferprogramm

hyrax®

Produkt	ohne Arme	gerade Arme	abgewinkelte Arme	Menge
hyrax® Mini – 7 (Dehnweg 7 mm)	602-800-12	602-800-10	602-801-10	1
	602-800-32	602-800-30	602-801-30	10
	–	602-800-50	602-801-50	50
hyrax® Medium – 10 (Dehnweg 10 mm)	602-808-12	602-808-10	602-840-10	1
	602-808-32	602-808-30	602-840-30	10
	–	602-808-50	602-840-50	50
hyrax® Maxi – 12 (Dehnweg 12 mm)	602-811-12	602-811-10	602-812-10	1
	602-811-32	602-811-30	602-812-30	10
	–	602-811-50	602-812-50	50

hyrax® click

Produkt	ohne Arme	gerade Arme	abgewinkelte Arme	Menge
hyrax® click Mini – 7 (Dehnweg 7 mm)	602-830-12	602-830-10	602-831-10	1
	602-830-32	602-830-30	602-831-30	10
	–	602-830-50	602-831-50	50
hyrax® click Medium – 10 (Dehnweg 10 mm)	602-832-12	602-832-10	602-833-10	1
	602-832-32	602-832-30	602-833-30	10
	–	602-832-50	602-833-50	50
hyrax® click Maxi – 12 (Dehnweg 12 mm)	602-834-12	602-834-10	602-835-10	1
	602-834-32	602-834-30	602-835-30	10
	–	602-834-50	602-835-50	50

hyrax® neo

Produkt	ohne Arme	gerade Arme	Menge
hyrax® neo Mini – 7 (Dehnweg 7 mm)	602-845-12	602-845-10	1
	602-845-32	602-845-30	10
	–	602-845-50	50
hyrax® neo Medium – 10 (Dehnweg 10 mm)	602-846-12	602-846-10	1
	602-846-32	602-846-30	10
	–	602-846-50	50
hyrax® neo Maxi – 12 (Dehnweg 12 mm)	602-847-12	602-847-10	1
	602-847-32	602-847-30	10
	–	602-847-50	50

Titan hyrax®

Produkt	ohne Arme	gerade Arme	Menge
Titan hyrax® Maxi – 12 (Dehnweg 12 mm)	602-810-12	602-810-10	1
	602-810-32	602-810-30	10

Packung (1 Stück / 50 Stück) mit 1 Sicherheitsschlüssel / Packung (10 Stück) mit 10 Sicherheitsschlüsseln

Produkt	REF	Menge
Sicherheitsschlüssel	611-120-01	10
Universal-Biegeschlüssel	611-122-00	1

Stand der Information: 2022-02

Änderungen vorbehalten