



Zangen und Instrumente für alle Fälle.



Premium-Line Zangen

Premium-Qualität – Premium-Funktion.

8

EQ-Line Zangen

Gute Zangen zu günstigen Preisen.

22

Instrumente

Ein vielseitiges Programm für KFO-Praxis und Labor.

28

Abdeckung aller Einsatzbereiche mit einem Programm.

Ob für die festsitzende oder herausnehmbare Kieferorthopädie, das Dentaurum Zangen-Programm deckt alle Einsatzgebiete ab. Das bedeutet für den Anwender, stets auf die gleiche Qualität und Verlässlichkeit zurückgreifen zu können. Außerdem muss man sich nicht mit unterschiedlichen Gebrauchsanweisungen oder Reinigungs- und Pflegevorschriften befassen. Das macht den Einsatz schneller und effektiver.



Bildanweisung für die Aufbereitung und Reinigung von Zangen und Instrumenten.





1

Zange gemäß vorgegebenem Einsatzbereich verwenden. Grobe Verunreinigungen entfernen.



2a

Mit einer geeigneten Tauchdesinfektion.



2a

Mit einer weichen Nylonbürste unter Wasser reinigen.



2b

Zange maschinell reinigen.



5

Schadhafte oder korrodierte Instrumente aussortieren. Stumpfe Zangen nachschleifen lassen.



4

Zange, insbesondere im Zangenschloss, mit ölfreier Druckluft trocknen.



3

Mit destilliertem Wasser die Zange und besonders das Zangenschloss spülen.



6

Zangenschloss und Hartmetalleinsätze mit Pflegeöl (REF 055-201-00) behandeln.



7

Dampfsterilisation im geöffneten Zustand.

Reinigung, Desinfektion, Trocknung.

Dentaurum-Zangen und -Instrumente eignen sich für alle üblichen Desinfektions- und Reinigungsarten (Tauchbad, Ultraschall, Thermodesinfektor).

Bitte beachten Sie dabei aber auf jeden Fall folgende Punkte:

Bei Verwendung chemischer Desinfektionsmittel ist darauf zu achten, dass diese genau nach Herstelleranweisung angesetzt werden und die richtige Konzentration eingehalten wird. Um Verdunstung und Verschmutzung zu vermeiden, ist die tägliche Ansetzung des Desinfektionsmittels optimal. Auf vollständige Auflösung des Konzentrats vor Einlegen der Instrumente ist zu achten, ebenso auf die maximale Einlegezeit (**niemals über das Wochenende, niemals über Nacht**) und auf die Temperatur (nicht über 25 °C).

Bei manueller Reinigung niemals mit harten Gegenständen (Topfkratzer, Metallbürste) arbeiten, da sonst die Oberfläche der Instrumente zerstört und damit die Rostgefahr erhöht wird. Bei Verwendung von Ultraschall-Reinigungsgeräten ist besonders auf die maximale Beschallungszeit zu achten.

Verwenden Sie bitte eine geeignete, nicht-aggressive Lösung. Säurehaltige Chemikalien (insbesondere Zemententferner) können Ihre wertvollen Zangen/Instrumente zerstören. Zangen/Instrumente mit extraharten Einsätzen müssen in einer besonders schonenden Chemikalie desinfiziert werden, die Korrosionsschutzmittel enthält. Produkte wie z. B. Sekusept von Henkel oder GIGASEPT FF von Schülke & Mayr sind empfehlenswert.

Achtung: Unmittelbar nach der chemischen Desinfektion und Reinigung müssen die Zangen/Instrumente sorgfältig von allen Chemikalienresten befreit werden. Dies geschieht durch sorgfältiges Abspülen mit destilliertem Wasser (Gelenkinstrumente immer im offenen Zustand!); bei Gelenkinstrumenten ist auch eine Reinigung mit Spritzpistole sinnvoll.

Wir empfehlen für die maschinelle Reinigung schaumarme enzymatische PH-Wert-neutrale Reiniger. Der letzte Spülgang in der Waschmaschine muss mit vollentsalztem Wasser erfolgen. Für die manuelle Reinigung empfehlen wir neutrale oder schwach-alkalische Reiniger im PH-Bereich 7-10.

Wichtig: Nur hochwertiges destilliertes Wasser nach EN 285 verwenden. Anderes Wasser kann einen zu hohen Silikatgehalt haben, was bei der Sterilisation zur Bildung gelbbrauner Flecken auf den Instrumenten führt. Verzicht auf Nachspülen kann während der nachfolgenden Sterilisation zu Verfärbungen und Rosterscheinungen führen. Danach werden die Zangen/Instrumente getrocknet. Das Innere der Durchsteckschlüsse bedarf der sorgfältigen Trocknung (Durchblasen mit Pressluft ist empfehlenswert).

Reinigung und Pflege von Dentaurum-Zangen/-Instrumenten Wichtige Garantiebedingungen

Thermodesinfektion.

Bei Verwendung eines Thermodesinfektors geben Sie bitte immer eine ausreichende Menge der dafür vorgesehenen Chemikalie bei, um das bei hohen Temperaturen aggressiv wirkende Wasser zu neutralisieren. Instrumente nach der Reinigung sofort entnehmen, keinesfalls im feuchten Milieu belassen (Rostgefahr).

Ölen.

Zangenschlüsse, Sperren, Gleitflächen für Federn und andere kritische Stellen der Zangen sollen nach dem Trocknen und vor der Sterilisation mit einem Pflege-/Schutzöl, das dampfdurchlässig/sterilisierfähig und temperaturbeständig ist, behandelt werden. Ein Ölschutz für die extra harten Einsätze verringert die Rostgefahr. Wir empfehlen das Dentaurum-Pflege-/Schutzöl (REF 055-201-00).

Achtung: Bei Heißluftsterilisation nur das Innere der Gelenke ölen, keine Außenteile (Gefahr der Fleckenbildung).

Sterilisation.

Wichtig: Nur sorgfältig gereinigte und getrocknete Zangen/Instrumente ohne jeglichen Rostbefall in den Sterilisator bzw. Autoclaven geben, Gelenkinstrumente immer in geöffnetem Zustand einlegen. Werden rostige Zangen/Instrumente zusammen mit einwandfreien Zangen/Instrumenten sterilisiert, kann es zu Flugrostbildung und zur Zerstörung der vorher intakten Zangen/Instrumente kommen. Insbesondere bei Vorhandensein von verchromten Zangen/Instrumenten in der Praxis ist hier größte Vorsicht geboten, deshalb sind alle Dentaurum-Zangen/-Instrumente, die für den Behandlungsbereich angeboten werden, aus rostfreiem Stahl gefertigt (ausschließlich 012-523-00 und 044-177-00).

Zangen/Instrumente dürfen nicht für längere Zeit im feuchten Milieu verbleiben. Die Tür des Sterilisators ist unmittelbar nach dem Sterilisationsprozess zu öffnen, notfalls sind die Zangen/Instrumente mit sterilen Tüchern zu trocknen. Bei Verwendung von Folienbeuteln ist auf deren korrekte Lagerung im Sterilisator zu achten. Auf keinen Fall darf der Beutel Restfeuchtigkeit enthalten.

Heißluftsterilisation.

Es ist zu beachten, dass bei Sterilisationstemperaturen ab 180 °C mit einem **Härteabfall der Arbeitsenden** und mit **Verfärbung der Zangen oder der Instrumente gerechnet** werden muss, Schneiden werden schneller stumpf. Erhöhte Rostgefahr.

Achtung: Bei Heißluftsterilisation nur das Innere der Gelenke ölen, keine Außenteile (Gefahr der Fleckenbildung).

Einsatz von neuen Zangen / Instrumenten.

Diese sind vor dem ersten Gebrauch sorgfältig zu reinigen und dann durch den ganzen Aufbereitungszyklus zu schicken. Die Gebrauchsfähigkeit Ihrer Dentaurum-Zange und Ihres Instruments bleibt sehr lange erhalten, wenn Sie diese Regeln beachten. Bei Modifikation oder unsachgemäßem Gebrauch/Pflege erlischt der Garantieanspruch.



10-Jahres-Garantie!

Made in Germany.

Die Herstellung durch langjährig erfahrene Fachkräfte mit ausgefeilten Fertigungstechniken und modernsten Maschinen führt zu der sprichwörtlich guten „Made-in-Germany“-Qualität. Dadurch haben die Dentaforum Premium-Line Zangen auch eine extra lange Lebensdauer.

Zuverlässiger Service.

Je nach Typ der Premium-Line Zange können Sie Ihre Zange zum Schärfen oder zum Austausch der Einsätze an uns einschicken. Wir garantieren eine zuverlässige und fachlich einwandfreie Ausführung dieser Unterhaltsleistung zu fairen Konditionen. Sprechen Sie uns darauf an.



Einfache Pflege.*

Dentaurum Premium-Line Zangen eignen sich für alle üblichen Desinfektions- und Reinigungsarten gemäß der Anwendungsvorschriften der jeweiligen Hersteller. Das regelmäßige, unkomplizierte Ölen der Zangen sichert eine lange Lebenszeit und Gebrauchsfähigkeit der Zangen. Zur optimalen Pflege der Zangen empfehlen wir das Dentaurum Pflege-/Schutzöl (REF 055-201-00).

10-Jahres-Garantie.**

Dentaurum Premium-Line Zangen bieten eine 10-Jahres-Garantie. Das bedeutet für Anwender und Patient eine maximale Sicherheit bei minimalem Risiko.

* Die sachgemäße Pflege ist eine wichtige Garantiebedingung. Unsere ausführliche Anweisung Aufbereitung von Zangen und Instrumenten (REF 989-590-10) finden Sie unter www.dentaurum.com.
Reparaturservice werkseitig möglich (z.B. Verschleiß).

** 10 Jahre Garantie auf Material und Herstellungsfehler, auf Herausfallen der Einsätze, auf Bruch und Korrosion des Zangenkörpers bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und sachgemäßer Pflege. Bei Manipulation erlischt der Garantieanspruch.

PREMIUM-LINE




PREMIUM
LINE
10-Jahres-Garantie!



Nance Schlaufenbiegezange sterilisierbar

Mit vierstufigen Backen zum Biegen verschieden langer Schlaufen aus Rund- und Vierkant-Draht.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart
Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 000-001-00 1 Stück

CE



Lingualbiegezange sterilisierbar

Zum Biegen von Stufen und Ausgleichsbiegungen in die Bögen für die Lingualtechnik.
Stufenbreite: 1,5; 2,0; 2,5 und 3,0 mm
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, hart
Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-001-00 1 Stück

CE



Jarabak Light Wire Zange sterilisierbar

Mit Führungsrillen.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, federhart
Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-125-00 1 Stück

CE



Light Wire Zange sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen von Drähten in der Light Wire Technik.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, federhart
Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-130-00 1 Stück

CE



Angle Drahtbiegezange Standard sterilisierbar

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen flachen und einer runden Backe.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart
Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-139-00 1 Stück

CE



Bügelbiegezange Magnum sterilisierbar

Ideal zum Biegen der Außenbögen von Face Bows.
Max. Drahtstärke: \varnothing 1,8 mm
Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-180-01 1 Stück

CE



Premium-Line Zangen



Festsitzende Technik.



Bügelbiegezange sterilisierbar

Für die individuelle Herstellung und Aktivierung von Lingual- bzw. Palatinalbögen. Die mit dieser Zange gebogenen Drahtenden passen in alle Dentaurum-Lingual-/Palatinalschlösser $\varnothing 2 \times 0,9$ mm.
Max. Drahtstärke: $\varnothing 0,9$ mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-185-00 1 Stück

CE



Aderer Dreifingerzange Extra-Mini sterilisierbar

Zum Biegen von Drähten/Bögen in der festsitzenden Technik. Besonders gut geeignet für das Biegen von Nickel-Titan-Drähten/-Bögen wie rematitan® LITE und Tensic®.

Max. Drahtstärke: $\varnothing 0,5$ mm, hart, F 0,48 x 0,64 mm / 19 x 25

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-205-00 1 Stück

CE



Hohlkehlzange Extra-Mini sterilisierbar

Ideal für das Biegen von unterschiedlichsten Schlaufen und zum Anpassen von vorgeformten Bögen in der festsitzenden Technik.

Max. Drahtstärke: $\varnothing 0,5$ mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-350-00 1 Stück

CE



Hohlkehlzange Mini sterilisierbar

Zum Biegen von Schlaufen an Rund- und Vierkant-Drähten.

Max. Drahtstärke: $\varnothing 0,5$ mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-351-00 1 Stück

CE



Hammerhead Zange sterilisierbar

Zum Umbiegen von Nickel-Titan-Bögen/-Drähten im Molarenbereich. Die beiden Enden schmiegen sich wie Nut und Feder um den Nickel-Titan-Draht, so dass die Drahtenden durch einmaliges Zudrücken der Zange die gewünschte Biegung erhalten.

Max. Drahtstärke: $\varnothing 0,45$ mm / 18, $\sphericalangle 0,41 \times 0,56$ mm / 16 x 22

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-355-00 1 Stück

CE



Angle / Tweed Bogenbiegezange sterilisierbar

Zum Torquen von Vierkantdrähten. Verhindert Quetschen des Drahtes durch paralleles Halten. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: $\sphericalangle 0,56 \times 0,70$ mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-442-00 1 Stück

CE

**De La Rosa Konturenzange
sterilisierbar**

Mit Führungsrillen zum Formen von Rund- und Vierkant-Bögen 16, 18, 22.

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 004-109-00 1 Stück

CE



**Begg Light Wire Zange
sterilisierbar**

Für besonders feine Biegungen von Drähten in der Light Wire Technik. Zusätzliche Schneidvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, federhart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 004-130-00 1 Stück

CE



**Angle Drahtbiegezange
sterilisierbar**

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen flachen und einer runden Backe. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 004-139-00 1 Stück

CE



**Tweed Schlaufenbiegezange
sterilisierbar**

Für besonders feine Biegungen.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 012-350-00 1 Stück

CE



**Tweed Schlaufenbiegezange
sterilisierbar**

Für besonders feine Biegungen.

Mit individuell auswechselbarer Hartmetallspitze.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 012-351-00 1 Stück

CE



**Spitze
sterilisierbar**

Für Tweed Schlaufenbiegezange REF 012-351-00.

REF 038-357-00 3 Stück

CE



Premium-Line Zangen



Festsitzende Technik.



Bracket-Abnehmezange

sterilisierbar

Zum Abscheren von Brackets zwischen Bracketbasis und Adhäsiv.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-349-00

1 Stück

CE



Kunststoffeinsätze

sterilisierbar

Für Bracket-Abnehmezangen REF 003-349-00 und 045-005-00.

REF 038-356-00

4 Stück

CE



Bracket-Abnehmzange, gerade

sterilisierbar

Zum Abscheren von Brackets zwischen Bracketbasis und Adhäsiv.

Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 13,0 cm

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-346-00

1 Stück

CE



Bracket-Abnehmezange, abgewinkelt

sterilisierbar

Zum einfachen Entfernen von Lingualbrackets und Brackets im

Seitenzahnbereich. Einsätze aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-347-00

1 Stück

CE



Spezial-Bracket-Debonding-Zange,

45° abgewinkelt

sterilisierbar

Zum Entfernen von Brackets und Adhäsivresten.

45° Abwinkelung der Schneideflächen, spezielle Schlifführung.

Einsätze aus Hartmetall.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-350-00

1 Stück

CE

Oliver-Jones Band-Abnehmezange sterilisierbar

Mit austauschbarer Kunststoffkappe. Einsatz aus Hartmetall.

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 026-347-00 1 Stück

CE



Kunststoffkappen sterilisierbar

Für Oliver-Jones Band-Abnehmezangen REF 026-347-00 und 045-004-00.

REF 039-357-00 10 Stück

CE



How Zange, gebogen sterilisierbar

Die gebogene Zange kommt insbesondere für den Seitenzahnbereich zur Anwendung. **Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.**

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-111-00 1 Stück

CE



How Zange, gerade sterilisierbar

Universell einsetzbare Zange für die Multibrackettechnik. Durch die schmalen Branchen speziell zum Setzen von Bändern mit aufgeschweißten Brackets geeignet. Auch für den UK-Frontzahnbereich.

Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-112-00 1 Stück

CE



Weingart Universalzange sterilisierbar

Zum Positionieren des Bogens und Umbiegen der Bogenenden geeignet. Exakt schließende geriffelte Spitze. Einsätze aus Hartmetall.

Auch für das Debonding von Brackets geeignet.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-120-00 1 Stück

CE



Weingart Universalzange Mini sterilisierbar

Sehr grazile Ausführung. Zum Halten und Positionieren des Bogens. Exakt schließende, geriffelte Spitzen. Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-121-00 1 Stück

CE



Klemmzange für Herbst TS/SUS² sterilisierbar

Zum Aufklemmen von geschlitzten Distanzringen für Herbst TS und SUS².

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-710-00 1 Stück

CE



Premium-Line Zangen



Festsitzende Technik.



Ortho-Cast M-Series Konvertierzange

sterilisierbar

Mit austauschbarer Klinge.

Nur zur Verwendung mit Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen geeignet!

Lieferumfang:

Zange komplett mit Klinge sowie 2 Ersatzklingen und 1 Innensechskantschlüssel.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-805-00

1 Stück

CE



Klingen

sterilisierbar

Klingen für Ortho-Cast M-Series Konvertierzange (REF 003-805-00)

REF 038-805-10

1 Stück

CE



Klemmzange

sterilisierbar

Spitze mit V-förmiger Kerbung zum Halten und Zusammenpressen von Gleit-/Klemm- und Stoppröhrchen.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-711-00

1 Stück

CE



Separierzange

sterilisierbar

Zum Spreizen der Dentalastics®-Separierringe vor dem Positionieren.

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 015-160-00

1 Stück

CE



Distal-Schneider Maxi

sterilisierbar

Zum Kürzen der Bogenenden in der Multibrackettechnik.

Kräftige Ausführung. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: \square 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-700-00

1 Stück

CE



Distal-Schneider Mini

sterilisierbar

Zum Kürzen der Bogenenden in der Multibrackettechnik.

Zierliche Ausführung. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: \square 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-701-00

1 Stück

CE



Distal-Schneider Mini

sterilisierbar

Mit längerem Griff für leichteres Handling beim Kürzen der Bogenenden.

Zierliche Ausführung. Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 14,0 cm

Max. Drahtstärke: \square 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-702-00

1 Stück

CE

Flush Cutter Mini mit Silikon O-Ring sterilisierbar

Zum Kürzen von Runddrähten in der Multibrackettechnik.
Elastische Drahtfangvorrichtung durch Silikon O-Ring, REF 037-356-00.
Einsätze aus Hartstahl.

Länge: 11,7 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,50 mm / 20

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-705-00 1 Stück

CE



Flush Cutter Maxi mit Silikon O-Ring sterilisierbar

Mit längerem Griff für leichteres Handling beim Kürzen von Runddrähten in der Multibrackettechnik. Elastische Drahtfangvorrichtung durch Silikon O-Ring, REF 037-356-00. Einsätze aus Hartstahl.

Länge: 14,2 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,50 mm / 20

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-706-00 1 Stück

CE



Silikon O-Ringe sterilisierbar

Für Flush Cutter Mini und Maxi, REF 003-705-00 und 003-706-00.

REF 037-356-00 10 Stück

CE



Ligaturschneider Mini sterilisierbar

Exakt bis zur Spitze schließende Schneiden garantieren einen glatten Schnitt von weichen Ligaturendrähten. Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,4 mm, weich

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 014-151-00 1 Stück

CE



Ligaturschneider 45° sterilisierbar

45° abgewinkelte Schneidefläche. Erleichtert das Trennen der Ligaturen im Seitenzahnbereich. Einsätze aus Hartmetall. Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,4 mm, weich

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 014-152-00 1 Stück

CE



Seitenschneider Medium sterilisierbar

Schwarz DLC beschichtet. Glatte Schnittflächen durch exakte Schneidekanten. Einsätze aus Hartmetall. Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 016-153-00 1 Stück

CE



Premium-Line Zangen



Herausnehmbare Technik.



Ruhland Hohlkehlzange Magnum

Zum Biegen von Coffin- und Verbindungsfedern, Labialbögen und U-Schlaufen.

Max. Drahtstärke: \varnothing 1,1 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 001-650-00

1 Stück



Hohlkehlzange Medium

Zum Biegen von kleinen Federn, Ösen und Schlaufen.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-053-00

1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.

Länge: 14,5 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-094-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Medium

Länge: 12,5 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,9 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-200-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Mini

Länge: 12,5 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-201-00

1 Stück



Aderer Dreifingerzange Maxi

Kräftige Ausführung.

Länge: 15,0 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 1,5 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 003-202-00

1 Stück

Hohlkehlzange Maxi

Zum Biegen von Federn, Schlaufen und Platzhaltern.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-233-00 1 Stück



Universal Drahtbiegezange

Mit geriffelten Spitzen und Führungsrillen. Hartmetallbeschichtete Arbeitsflächen, die werkseitig erneuert werden können.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-290-00 1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt. **Mit Führungsrillen.**

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-514-00 1 Stück

NEU



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt. Hartmetallbeschichtete Arbeitsflächen, die werkseitig erneuert werden können.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-515-00 1 Stück



Adams Zange Medium

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, innen glatt.

Länge: 14,0 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 003-516-00 1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, innen glatt.
Einsätze aus Hartmetall.

Länge: 16,0 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 004-095-00 1 Stück



Spitzflachzange

Innen glatt, mit Führungsrille. Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, federhart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 004-455-00 1 Stück



Premium-Line Zangen



Herausnehmbare Technik.



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.
Einsätze aus Hartmetall. Mit Führungsrille.

Länge: 12,0 cm

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, federhart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 004-515-00

1 Stück



Young Schlaufenzange

Eine Universalzange zum Biegen von Schlaufen
in beliebiger Abmessung. Ideal für Labialbögen.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 012-074-00

1 Stück



Pfeilformzange

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie



REF 012-520-00


1 Stück



Pfeilknickzange

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

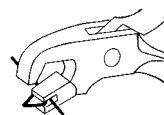

REF 012-521-00

1 Stück



Kramponzange Maxi

Universal Biege- und Schneidezange.

Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,9 mm, hart

Schneiden bis: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 013-522-00

1 Stück



Flachzange, breit

Geriffelte Spitzen. Mit Führungsrille.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

Premium-Line · 10 Jahre Garantie

REF 033-452-00

1 Stück

Spitzflachzange

Geriffelt, mit Führungsrille. Zierliche Maulspitze.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 035-455-00

1 Stück



Seitenschneider Maxi sterilisierbar

Einsätze aus Hartmetall.

Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!

Max. Drahtstärke: \varnothing 1,0 mm, hart

Premium-Line - 10 Jahre Garantie

REF 004-266-00

1 Stück

CE







Bracket-Abnehmezange sterilisierbar

Zum Entfernen von Brackets.

REF 045-005-00 1 Stück

CE



Kunststoffeinsätze sterilisierbar

Für Bracket-Abnehmezangen REF 003-349-00 und 045-005-00.

REF 038-356-00 4 Stück

CE



Distalschneider sterilisierbar

Zum Kürzen der Bogenenden in der Multibrackettechnik.
Drahtfangvorrichtung. Einsätze aus Hartmetall.
Max. Drahtstärke: \square 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00 1 Stück

CE



Seitenschneider Medium sterilisierbar

Zum Schneiden von Drähten und Bögen. Einsätze aus Hartmetall.
Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte
der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!
Max. Drahtstärke: \emptyset 0,7 mm, hart

REF 045-022-00 1 Stück

CE



Oliver-Jones Band-Abnehmezange sterilisierbar

Mit austauschbarer Kunststoffkappe.

REF 045-004-00 1 Stück

CE



Kunststoffkappen sterilisierbar

Für Oliver-Jones Band-Abnehmezangen REF 026-347-00
und 045-004-00.

REF 039-357-00 10 Stück

CE



How Zange, gerade sterilisierbar

Universell einsetzbare Zange für die Multibrackettechnik.
Durch die einseitig ausladenden Spitzen eignet sich diese Zange
auch zum Herstellen von individuellen Frontzahnbindern.

REF 045-006-00 1 Stück

CE



EQ-Line Zangen



Festsitzende Technik.



Angle / Tweed Bogenbiegezange sterilisierbar

Zum Torquen von Vierkantdrähten.
Verhindert Quetschen des Drahtes durch paralleles Halten.
Max. Drahtstärke: \square 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Weingart Universalzange sterilisierbar

Zum Positionieren des Bogens und Umbiegen der
Bogenenden.
Max. Drahtstärke: \emptyset 0,5 mm, hart

REF 045-003-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Nance Schlaufenbiegezange sterilisierbar

Mit vierstufigen Backen zum Biegen verschieden
langer Schlaufen aus Rund- und Vierkant-Draht.
Max. Drahtstärke: \emptyset 0,7 mm, federhart

REF 045-010-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Jarabak Light Wire Zange sterilisierbar

Max. Drahtstärke: \emptyset 0,5 mm, federhart

REF 045-009-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Tweed Schlaufenbiegezange sterilisierbar

Für besonders feine Biegungen.
Max. Drahtstärke: \emptyset 0,5 mm, hart

REF 045-001-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Angle Drahtbiegezange sterilisierbar

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen flachen
und einer runden Backe.
Max. Drahtstärke: \emptyset 0,7 mm, hart

REF 045-002-00	1 Stück
----------------	---------

CE

EQ-Line Zangen



Herausnehmbare Technik.

Hohlkehlzange Medium

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 045-012-00 1 Stück



Hohlkehlzange Maxi

Z. B. zum Formen von Platzhaltern.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

REF 045-013-00 1 Stück



Ruhland Hohlkehlzange Magnum

Zum Biegen von Coffin- und Verbindungsfedern,
Labialbögen und U-Schlaufen.
Max. Drahtstärke: \varnothing 1,1 mm, hart

REF 045-014-00 1 Stück



Adams Zange Medium

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.
Mit Führungsrille.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 045-015-00 1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

REF 045-016-00 1 Stück



Adams Zange Maxi

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, innen glatt.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

REF 045-017-00 1 Stück



Kramponzange Maxi

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,9 mm, hart
Schneiden bis: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 045-019-00 1 Stück



EQ-Line Zangen



Herausnehmbare Technik.



Spitzflachzange

Glatt, mit Führungsrille. Zierliche Maulspitze.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 045-018-00	1 Stück
----------------	---------



Young Schlaufenbiegezange

Eine Universalzange für Schlaufen in beliebiger Abmessung.
Ideal für Labialbögen.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 045-011-00	1 Stück
----------------	---------



Aderer Dreifingerzange Extra-Mini

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

REF 045-020-00	1 Stück
----------------	---------



Aderer Dreifingerzange Mini

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 045-007-00	1 Stück
----------------	---------



Aderer Dreifingerzange Medium

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,9 mm, hart

REF 045-008-00	1 Stück
----------------	---------

Zangen



Herausnehmbare / Festsitzende Technik.

Hebelseitenschneider Magnum

Geringer Kraftaufwand beim Schneiden durch Hebelübersetzung.
Wir empfehlen, im vorderen Drittel der Schneiden keine Drähte der maximal vorgesehenen Drahtstärke zu schneiden!
Max. Drahtstärke: \varnothing 1,3 mm, hart

REF 044-177-00

1 Stück



Instrumente



**Klemmpinzette
sterilisierbar**

Zum Setzen der Brackets. Pinzettenende erlaubt das Angulieren von Brackets. Zierliche Einstückkonstruktion.

REF 025-277-00	1 Stück
----------------	---------

CE



**Klemmpinzette
sterilisierbar**

Mit langer Setz- und Angulierungshilfe. Zum Setzen der Brackets. Pinzettenende erlaubt das Angulieren von Brackets.

REF 025-276-00	1 Stück
----------------	---------

CE



**Klemmpinzette
sterilisierbar
Für Seitenzähne.**

Besonders gut geeignet zum Setzen von Brackets und Bukkalröhrchen im Seitenzahnbereich.

REF 025-279-00	1 Stück
----------------	---------

CE



**Klemmpinzette
sterilisierbar**

Graziles Pinzettendesign für das einfache Positionieren von Brackets und Bukkalröhrchen.

REF 025-280-00	1 Stück
----------------	---------

CE



**discovery® pearl Debonding-Instrument
sterilisierbar**

Zum einfachen und sicheren Entfernen von discovery® pearl Keramikbrackets.

REF 019-001-00	1 Stück
----------------	---------

CE



**sl-Instrument, für discovery® sl
sterilisierbar**

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets **discovery® sl** (System Roth), **dynamique® m** und **dynamique® c** sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-276-00	1 Stück
----------------	---------

CE



**sl-Instrument, für discovery® sl 2.0
sterilisierbar**

Zum Öffnen und Schließen der selbstligierenden Brackets **discovery® sl 2.0** (System McLaughlin-Bennett-Trevisi*) sowie zum leichteren Einligieren des Bogens.

REF 023-277-00	1 Stück
----------------	---------

CE

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

**Scaler doppelendig
sterilisierbar**

Zum Entfernen von Adhäsiv- und Zementresten.
Mit Setzhilfe für Bänder, geriffelt.

REF 027-349-00	1 Stück
----------------	---------

CE



**Separierstreifen
sterilisierbar**

Für Separierstreifenhalter REF 018-000-00.

Breite	Beschichtung	REF	Menge
4 mm	doppelseitig	018-001-00	12 Stück
4 mm	einseitig	018-002-00	12 Stück

CE



Schere

Für dünne Stahlbänder.

Ausführung	REF	Menge
gerade	007-024-00	1 Stück
gebogen	008-025-00	1 Stück



Instrumente



Molarenbandaufsetzer Kunststoff
sterilisierbar bis Max. 180 °C
Mit geriffelter Dreikant-Hartmetallspitze.

REF 026-355-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Bandandrücker
nach Mershon
sterilisierbar
Mit geriffelter Vierkantspitze und anatomischem Griff
für gute Kraftübertragung beim Bandsetzen.

REF 024-300-01	1 Stück
----------------	---------

CE



Mundspiegel mit Hilfslinien (montiert), lingual
sterilisierbar

REF 023-279-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Mundspiegel mit Hilfslinien (ohne Griff), lingual
sterilisierbar

REF 023-279-10	1 Stück
----------------	---------

CE

Nadelhalter Medium

nach Mathieu

sterilisierbar

Ideal zum Ligieren. In besonders handlicher, bewährter Ausführung. Geriffelte Spitzen.

REF 000-030-00 1 Stück

CE



Nadelhalter Medium, mit Fingerring

nach Bachmann

sterilisierbar

Erleichtert das Ligieren mit dem Mittelfinger unter konstantem Zug. Geeignet auch für Kieferbruchschiene. Geriffelte Spitzen.

REF 000-035-00 1 Stück

CE



Nadelhalter Mini

nach Mathieu

sterilisierbar

Mit besonders zierlichen, geriffelten Spitzen. Für Dentalastics® Kunststoffligaturen.

Nicht für Drahtligaturen.

REF 000-031-00 1 Stück

CE



Mosquitoklemme ohne Häkchen

sterilisierbar

Kronen-Haltezange oder zum Setzen von Dentalastics® Kunststoffligaturen.

REF 000-730-00 1 Stück

CE



Mosquitoklemme mit Häkchen

sterilisierbar

Zum Setzen von Dentalastics® Kunststoffligaturen.

REF 000-731-00 1 Stück

CE



Mosquitoklemme, gebogen

sterilisierbar

Zum Setzen und Ligieren von Dentalastics® Kunststoffligaturen, speziell in der Lingualtechnik.

REF 000-732-00 1 Stück

CE



Positionierungstool, lingual

sterilisierbar

REF 023-278-00 1 Stück

CE



Instrumente und Zubehör



Bracket-Markierkreuz **sterilisierbar**

Zum Abmessen der Höhe zwischen Slot und Schneidekante beim Setzen von Bändern und Brackets.
Mit Metallspitzen.

REF 030-390-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Ligaturenspanner und Adapter **sterilisierbar**

Für lange vorgeformte Ligaturen zum Verdrillen der Enden und Adaptieren.

REF 022-274-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Ligaturenadapter, doppelendig **sterilisierbar**

Zum Umbiegen und Adaptieren von Drahtligaturen.

REF 021-273-00	1 Stück
----------------	---------

CE



Distalbieger, doppelendig

nach Langer
sterilisierbar
Zum sicheren Umbiegen von Bogenenden.
Griff ø 8 mm

REF 019-000-00	1 Stück
----------------	---------

CE

**Ligator
sterilisierbar**

Zum schnellen Ligieren ganzer Zahnbögen und 8er-Ligaturen. Y-Spitze erleichtert das Verdrillen der Ligatur.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,3 mm, weich

REF 023-292-00	1 Stück
----------------	---------

CE

NEU



**Zubehör für Ligator (REF 023-292-00)
sterilisierbar**

Ersatzteil	REF	Menge
Spitze	023-293-00	1 Stück
Spule	023-294-00	1 Stück
Schraube	023-295-00	1 Stück

CE

NEU



**Pflege-/Schutzöl für Zangen
und Instrumente**

Zur Pflege von Zangen und Instrumenten.
Anwendung insbesondere vor der Sterilisation.

REF 055-201-00	50 ml
----------------	-------



Zangen- und Drahtständer, kombiniert

Material: Kunststoff
Mit 6 Röhren für Stangendrähte.
Nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel.
Farbe: transparent, klar
Höhe: ca. 13 cm
Breite: ca. 18 cm

REF 055-101-01	1 Stück
----------------	---------



Zangenständer

Nicht geeignet für ethanol-, phenol- bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel.

geeignet für	Material	Farbe	Länge	REF	Menge
ca. 7 Zangen	Kunststoff	transparent, klar	13,0 cm	055-000-00	1 Stück
ca. 14 Zangen	Kunststoff	transparent, klar	25,0 cm	055-100-00	1 Stück



Service



Es gibt viele Gründe, Produkte von Dentaforum in der Praxis oder im Labor zu verwenden. Die Qualität ist sicher entscheidend, aber die Leistungen und der Service zu den Produkten machen den Unterschied.

Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Sie sind schon immer, nicht erst heute, ein wichtiger Bestandteil unseres Unternehmensleitbildes.

Es ist uns ein großes Anliegen, schnell auf veränderte Ansprüche unserer Kunden zu reagieren und exzellente Serviceleistungen zu bieten, um langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen zu pflegen.

Unsere Kunden schätzen die Qualität unserer Produkte, unsere Zuverlässigkeit und unser außergewöhnliches Angebot an Serviceleistungen, die wir kontinuierlich weiterentwickeln und ausbauen.



CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE +49 72 31/803 - *Durchwahl*
Kieferorthopädie -550
Customer Support Digital -280
Auftragsannahme -210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



Telefon +49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM