



ANWEISUNG AUFBEREITUNG VON DENTAURUM BÄNDERN

Diese Anweisung ist gültig für alle Dentaurum Bänder,
die zur Anwendung am Patienten zugelassen sind.

Diese Anweisung entspricht den Anforderungen der
DIN EN ISO 17664 und den RKI-Richtlinien.

Allgemeine **Anforderung**

Alle Bänder müssen für die erstmalige Verwendung, desinfiziert und ggf. sterilisiert werden. In der Regel werden Bänder unsteril ausgeliefert. Eine wirksame Reinigung und Desinfektion ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine effektive Sterilisation.

Achten Sie bei einer evtl. Anprobe darauf, dass die entsprechenden Bänder nicht wieder zurück in die Sortimentslade legen, um eine Kontamination der bestückten Sortimentslade zu vermeiden.

Diese Anweisung beschreibt die erstmalige Aufbereitung von Bändern, nicht die Wiederaufbereitung von Bändern, die am Patienten anprobiert bzw. fest eingesetzt wurden.

Die Aufbereitung von fest zementierten Bändern (Recycling) ist nicht zulässig!

Manuelle Vorreinigung




Evtl. grobe Verunreinigungen müssen von den Bändern entfernt werden.

Bänder unter fließendem Wasser abspülen und in die Desinfektionsmittellösung legen.

Zur manuellen Entfernung von Verunreinigungen nur eine weiche Bürste (Nylonbürste) oder ein sauberes weiches Tuch verwenden.

Keine Metallbürsten oder Stahlwolle einsetzen.


Das Desinfektionsmittel sollte aldehydfrei sein (ansonsten Fixierung von Blut-Verschmutzungen), eine geprüfte Wirksamkeit besitzen (z. B. DGHM- oder FDA-Zulassung bzw. CE-Kennzeichnung), für die Desinfektion der Bänder geeignet und mit den Bändern kompatibel sein.

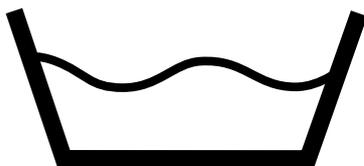

Maschinelle Reinigung / Desinfektion

Beachten Sie folgende Punkte bei Gebrauch des Desinfektors:


- dass der Desinfektor grundsätzlich eine geprüfte Wirksamkeit besitzt (z. B. DGHM- oder FDA-Zulassung bzw. CE-Kennzeichnung entsprechend DIN EN ISO 15883),
- dass nach Möglichkeit ein geprüftes Programm zur thermischen Desinfektion (mind. 5 min bei 90 °C oder A_0 -Wert > 3000) eingesetzt wird (bei chemischer Desinfektion Gefahr von Desinfektionsmittelrückständen auf den Bändern),
- dass zum Nachspülen nur steriles oder keimarmes (max. 10 Keime/ml) sowie endotoxinarmes (max. 0,25 Endotoxineinheiten/ml) Wasser (purified water/highly purified water) eingesetzt wird und
- dass die zum Trocknen eingesetzte Luft gefiltert wird.

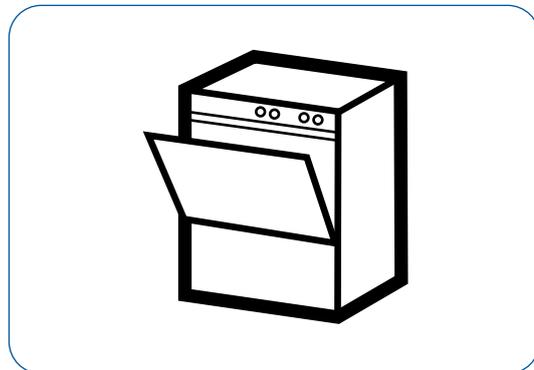

Beachten Sie bei der Auswahl des eingesetzten Reinigungsmittelsystems folgende Punkte:


- dass dieses grundsätzlich für die Reinigung von Bändern aus Metallen geeignet ist,
- dass – sofern keine thermische Desinfektion eingesetzt wird – zusätzlich ein geeignetes Desinfektionsmittel mit geprüfter Wirksamkeit (z. B. DGHM- oder FDA-Zulassung bzw. CE-Kennzeichnung) eingesetzt wird und dass dieses mit dem eingesetzten Reinigungsmittel kompatibel ist und
- dass die eingesetzten Chemikalien mit den Bändern kompatibel sind (siehe Kapitel „Materialbeständigkeit“).

Die vom Hersteller des Reinigungs- und Desinfektionsmittels angegebenen Konzentrationen sind einzuhalten.

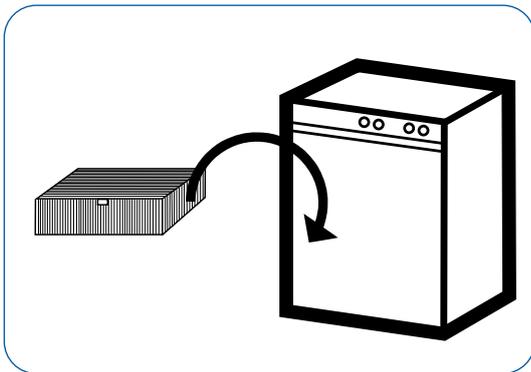

Arbeitsablauf

- ❶ Legen Sie die Bänder in ein geeignetes Reinigungs-Tray (verschließbares Sieb) in den Desinfektor ein.
- ❷ Starten Sie das Programm.
- ❸ Entnehmen Sie die Bänder nach Programmende dem Desinfektor.
- ❹ Kontrollieren und verpacken Sie die Bänder möglichst umgehend nach der Entnahme.
- ❺ **Falls das Gerät kein automatisches Trockenprogramm hat, sollte die Tür des Gerätes zum Trocknen einen Spalt geöffnet werden.**

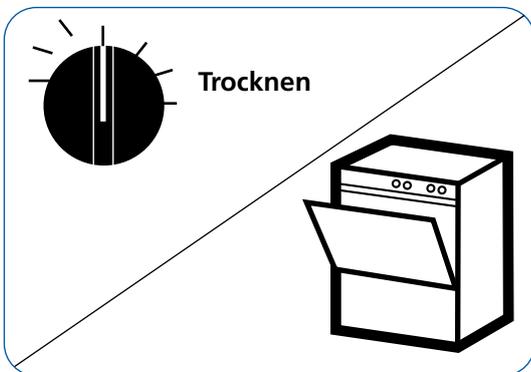

Der Nachweis der grundsätzlichen Eignung für eine wirksame maschinelle Reinigung und Desinfektion wurde durch ein unabhängiges akkreditiertes Prüflabor unter Verwendung des Desinfektors G 7836 CD (thermische Desinfektion, Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh) und des Reinigungsmittels neodisher® MediZym (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg) erbracht. Hierbei wurde das oben beschriebene Verfahren berücksichtigt.

Manuelle Reinigung und Desinfektion

Auf folgende Punkte ist bei der Auswahl der eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu achten:

- die Bänder müssen für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sein.
- das Reinigungsmittel muss für die Ultraschallreinigung geeignet sein.
- nur Desinfektionsmittel mit geprüfter Wirksamkeit einsetzen (z. B. DGHM- oder FDA-Zulassung bzw. CE-Kennzeichnung). Diese sollten mit dem eingesetzten Reinigungsmittel kompatibel sein.

Kombinierte Reinigungs-/Desinfektionsmittel sollten nach Möglichkeit nicht eingesetzt werden. Nur in Fällen von sehr geringer Kontamination (keine sichtbaren Verunreinigungen) können kombinierte Reinigungs-/Desinfektionsmittel eingesetzt werden.


Die vom Hersteller der Reinigungs- und Desinfektionsmittel angegebenen Konzentrationen und Einwirkzeiten müssen unbedingt eingehalten werden. Verwenden Sie nur frisch hergestellte Lösungen, nur steriles oder keimarmes (max. 10 Keime/ml) sowie endotoxinarmes (max. 0,25 Endotoxineinheiten/ml) Wasser (z. B. purified water/highly purified water) und zum Trocknen nur gefilterte Luft.

Arbeitsablauf Reinigung

- 1 Legen Sie die Bänder für die vorgegebene Einwirkzeit, ggf. in ein geeignetes Reinigungs-Tray, in das Reinigungsbad ein, so dass die Bänder ausreichend bedeckt sind. Ggf. Ultraschallunterstützung oder vorsichtiges Bürsten mit einer weichen Bürste. Vor und nach der Einwirkzeit alle Hohlräume in den Bändern/Aufschweißteilen unter Verwendung einer Einmalspritze (Mindestvolumen 5ml) spülen.
- 2 Die Bänder aus dem Reinigungsbad entnehmen und gründlich mit Wasser spülen.
- 3 **Kontrollieren Sie, ob die Bänder erfolgreich gereinigt wurden.**

Arbeitsablauf Desinfektion


- 1 Legen Sie die Bänder für die vorgegebene Einwirkzeit, ggf. in ein geeignetes Reinigungs-Tray, in das Desinfektionsbad ein, so dass die Bänder ausreichend bedeckt sind. Vor und nach der Einwirkzeit alle Hohlräume in den Bändern/Aufschweißteilen unter Verwendung einer Einmalspritze (Mindestvolumen 5 ml) spülen.
- 2 Die Bänder aus dem Desinfektionsbad entnehmen und mindestens dreimal gründlich mit Wasser spülen.
- 3 Die Bänder erst verpacken, wenn sie trocken sind. Trockene Bänder umgehend verpacken.

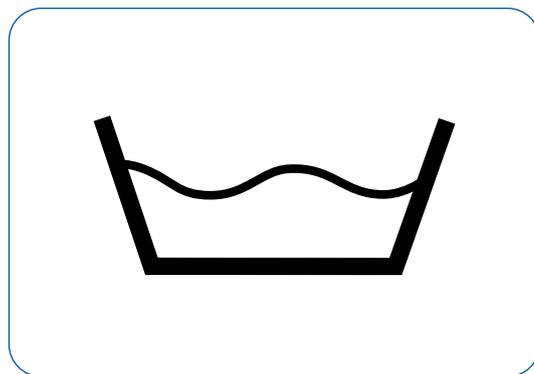

Der Nachweis der grundsätzlichen Eignung für eine wirksame manuelle Reinigung und Desinfektion wurde durch ein unabhängiges akkreditiertes Prüflabor unter Verwendung des Reinigungsmittels Bodedex® forte und des Desinfektionsmittels Korsolex® plus (Bode Chemie, Hamburg) erbracht. Hierbei wurde das oben beschriebene Verfahren berücksichtigt.

Überprüfung

Prüfen Sie alle Bänder nach der Reinigung bzw. Reinigung/ Desinfektion auf Korrosion, Beschädigungen und Verschmutzungen. Sondern Sie beschädigte Bänder aus. Noch verschmutzte Bänder müssen erneut gereinigt und desinfiziert werden.

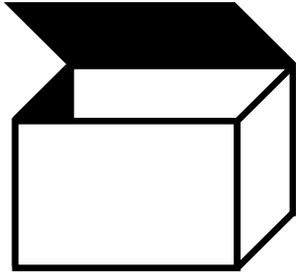

Verpacken Sie die Bänder bzw. die Sterilisationstrays in Einmalsterilisationsverpackungen (Einfach- oder Doppelverpackung) und/oder Sterilisationscontainer, die folgenden Anforderungen entsprechen:


- DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/2 (bisher: DIN EN 868/ANSI AAMI ISO 11607)
- Eignung für die Dampfsterilisation (Temperaturbeständigkeit bis mind. 134 °C, (273 °F) ausreichende Dampfdurchlässigkeit)
- ausreichender Schutz der Bänder bzw. Sterilisationsverpackungen vor mechanischen Beschädigungen
- regelmäßige Wartung entsprechend den Herstellervorgaben (Sterilisationscontainer)

Sterilisation

Für die Sterilisation sind nur die nachfolgend aufgeführten Sterilisationsverfahren einzusetzen. Andere Sterilisationsverfahren sind nicht geeignet. Das Blitzsterilisationsverfahren ist grundsätzlich nicht zulässig. Verwenden Sie außerdem keine Heißluftsterilisation, keine Strahlensterilisation, keine Formaldehyd- oder Ethylenoxidsterilisation sowie auch keine Plasmasterilisation.

Dampfsterilisation


- fraktioniertes Vakuumverfahren oder Gravitationsverfahren*¹ (mit ausreichender Produkttrocknung)
- Dampfsterilisator entsprechend DIN EN 13060 bzw. DIN EN 285
- entsprechend DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (bisher: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134) validiert (gültige Kommissionierung und produktspezifische Leistungsbeurteilung)
- maximale Sterilisationstemperatur 134 °C; (273 °F zzgl. Toleranz entsprechend DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (bisher: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134))
- Sterilisationszeit (Expositionszeit bei der Sterilisationstemperatur) mind. 5 min bei 134 °C (273 °F)

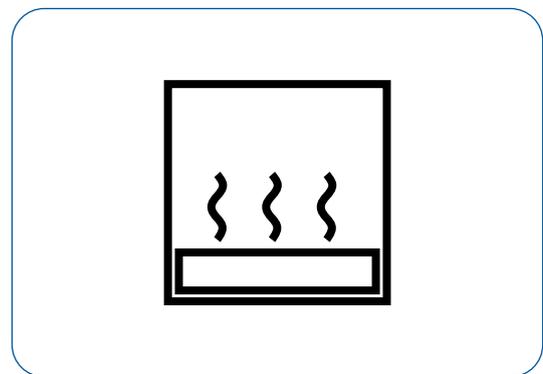

Der Nachweis der grundsätzlichen Eignung für eine wirksame Dampfsterilisation wurde durch ein unabhängiges akkreditiertes Prüflabor unter Verwendung des Dampfsterilisators EuroSelectomat (MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH, Planegg) und unter Einsatz des fraktionierten Vakuumverfahrens sowie unter Verwendung des Dampfsterilisators Systec V-150 der Firma Systec GmbH Labor-Systemtechnik (Wettenberg) und des Gravitationsverfahrens erbracht. Hierbei wurde das oben beschriebene Verfahren berücksichtigt.

*¹ Der Einsatz des weniger wirksamen Gravitationsverfahrens ist nur bei Nichtverfügbarkeit des fraktionierten Vakuumverfahrens zulässig.

Lagerung

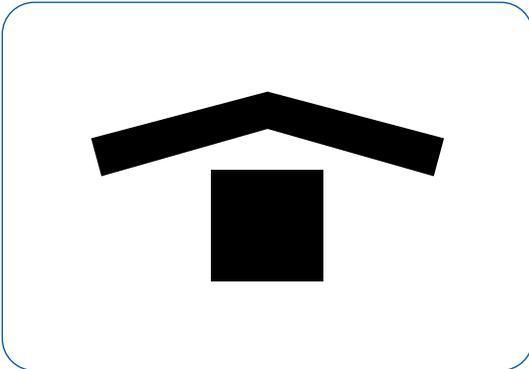

Nach der Sterilisation sind die Bänder in der Sterilisationsverpackung trocken und staubfrei zu lagern.

Beständigkeit des Materials

Bei der Auswahl der Reinigungs- und Desinfektionsmittel bitte darauf achten, dass folgende Bestandteile nicht enthalten sind:

- organische, mineralische und oxidierende Säuren (maximal zulässiger pH-Wert 9,5, neutraler/enzymatischer Reiniger empfohlen)
- starke Laugen
- organische Lösungsmittel (z. B. Alkohole, Ether, Ketone, Benzine)
- Oxidationsmittel (z. B. Wasserstoffperoxide)
- Halogene (Chlor, Jod, Brom)
- aromatische/halogenierte Kohlenwasserstoffe
- Salze von Schwermetallen

Bänder dürfen nicht mit Metallbürsten oder Stahlwolle gereinigt werden.

Alle Bänder und Sterilisationstrays dürfen keinen Temperaturen über 134 °C (273 °F) ausgesetzt werden!

Übersicht Bänder

Die Übersicht enthält alle Bänder, die zur Anwendung am Patienten zugelassen sind. Sofern nichts anderes angewiesen wird, sind die genannten Anweisungen zur Aufbereitung zu beachten. Weitere Hinweise finden Sie unter www.dentaurum.com und im Orthodontie-Katalog.

dentaform® Snap / Sortimente

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
16	Nr. 5-36 (2)	878-364-18	878-364-22	878-064-00	64 Stück
26	Nr. 5-36 (2)	879-364-18	879-364-22	879-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
16	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	878-350-18	878-350-22	878-150-00	150 Stück
26	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	879-350-18	879-350-22	879-150-00	150 Stück

¹⁾ (16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ (16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 1. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
46	Nr. 5-36 (2)	880-364-18	880-364-22	880-264-00	64 Stück
36	Nr. 5-36 (2)	881-364-18	881-364-22	881-264-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
46	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	880-350-18	880-350-22	880-250-00	150 Stück
36	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	881-350-18	881-350-22	881-250-00	150 Stück

¹⁾ (46) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

(36) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ (46) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

(36) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾			
				REF			REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	878-301-18	878-301-22	1 Stück	878-001-00	10 Stück
16	2	0,12 mm	8,89 mm	878-302-18	878-302-22	1 Stück	878-002-00	10 Stück
16	3	0,12 mm	8,99 mm	878-303-18	878-303-22	1 Stück	878-003-00	10 Stück
16	4	0,12 mm	9,09 mm	878-304-18	878-304-22	1 Stück	878-004-00	10 Stück
16	5	0,12 mm	9,20 mm	878-305-18	878-305-22	1 Stück	878-005-00	10 Stück
16	6	0,12 mm	9,30 mm	878-306-18	878-306-22	1 Stück	878-006-00	10 Stück
16	7	0,12 mm	9,40 mm	878-307-18	878-307-22	1 Stück	878-007-00	10 Stück
16	8	0,12 mm	9,50 mm	878-308-18	878-308-22	1 Stück	878-008-00	10 Stück
16	9	0,15 mm	9,61 mm	878-309-18	878-309-22	1 Stück	878-009-00	10 Stück
16	10	0,15 mm	9,71 mm	878-310-18	878-310-22	1 Stück	878-010-00	10 Stück
16	11	0,15 mm	9,81 mm	878-311-18	878-311-22	1 Stück	878-011-00	10 Stück
16	12	0,15 mm	9,92 mm	878-312-18	878-312-22	1 Stück	878-012-00	10 Stück
16	13	0,15 mm	10,02 mm	878-313-18	878-313-22	1 Stück	878-013-00	10 Stück
16	14	0,15 mm	10,12 mm	878-314-18	878-314-22	1 Stück	878-014-00	10 Stück
16	15	0,15 mm	10,23 mm	878-315-18	878-315-22	1 Stück	878-015-00	10 Stück
16	16	0,15 mm	10,33 mm	878-316-18	878-316-22	1 Stück	878-016-00	10 Stück
16	17	0,15 mm	10,43 mm	878-317-18	878-317-22	1 Stück	878-017-00	10 Stück
16	18	0,15 mm	10,54 mm	878-318-18	878-318-22	1 Stück	878-018-00	10 Stück
16	19	0,15 mm	10,64 mm	878-319-18	878-319-22	1 Stück	878-019-00	10 Stück
16	20	0,15 mm	10,74 mm	878-320-18	878-320-22	1 Stück	878-020-00	10 Stück
16	21	0,15 mm	10,85 mm	878-321-18	878-321-22	1 Stück	878-021-00	10 Stück
16	22	0,15 mm	10,95 mm	878-322-18	878-322-22	1 Stück	878-022-00	10 Stück
16	23	0,15 mm	11,05 mm	878-323-18	878-323-22	1 Stück	878-023-00	10 Stück
16	24	0,15 mm	11,16 mm	878-324-18	878-324-22	1 Stück	878-024-00	10 Stück
16	25	0,18 mm	11,26 mm	878-325-18	878-325-22	1 Stück	878-025-00	10 Stück
16	26	0,18 mm	11,36 mm	878-326-18	878-326-22	1 Stück	878-026-00	10 Stück
16	27	0,18 mm	11,47 mm	878-327-18	878-327-22	1 Stück	878-027-00	10 Stück
16	28	0,18 mm	11,57 mm	878-328-18	878-328-22	1 Stück	878-028-00	10 Stück
16	29	0,18 mm	11,67 mm	878-329-18	878-329-22	1 Stück	878-029-00	10 Stück
16	30	0,18 mm	11,78 mm	878-330-18	878-330-22	1 Stück	878-030-00	10 Stück
16	31	0,18 mm	11,88 mm	878-331-18	878-331-22	1 Stück	878-031-00	10 Stück
16	32	0,18 mm	11,98 mm	878-332-18	878-332-22	1 Stück	878-032-00	10 Stück
16	33	0,18 mm	12,08 mm	878-333-18	878-333-22	1 Stück	878-033-00	10 Stück
16	34	0,18 mm	12,19 mm	878-334-18	878-334-22	1 Stück	878-034-00	10 Stück
16	35	0,18 mm	12,29 mm	878-335-18	878-335-22	1 Stück	878-035-00	10 Stück
16	36	0,18 mm	12,39 mm	878-336-18	878-336-22	1 Stück	878-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhähchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhähchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® Snap / Einzelpackungen

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾			
26	1	0,12 mm	8,78 mm	879-301-18	879-301-22	1 Stück	879-001-00	10 Stück
26	2	0,12 mm	8,89 mm	879-302-18	879-302-22	1 Stück	879-002-00	10 Stück
26	3	0,12 mm	8,99 mm	879-303-18	879-303-22	1 Stück	879-003-00	10 Stück
26	4	0,12 mm	9,09 mm	879-304-18	879-304-22	1 Stück	879-004-00	10 Stück
26	5	0,12 mm	9,20 mm	879-305-18	879-305-22	1 Stück	879-005-00	10 Stück
26	6	0,12 mm	9,30 mm	879-306-18	879-306-22	1 Stück	879-006-00	10 Stück
26	7	0,12 mm	9,40 mm	879-307-18	879-307-22	1 Stück	879-007-00	10 Stück
26	8	0,12 mm	9,50 mm	879-308-18	879-308-22	1 Stück	879-008-00	10 Stück
26	9	0,15 mm	9,61 mm	879-309-18	879-309-22	1 Stück	879-009-00	10 Stück
26	10	0,15 mm	9,71 mm	879-310-18	879-310-22	1 Stück	879-010-00	10 Stück
26	11	0,15 mm	9,81 mm	879-311-18	879-311-22	1 Stück	879-011-00	10 Stück
26	12	0,15 mm	9,92 mm	879-312-18	879-312-22	1 Stück	879-012-00	10 Stück
26	13	0,15 mm	10,02 mm	879-313-18	879-313-22	1 Stück	879-013-00	10 Stück
26	14	0,15 mm	10,12 mm	879-314-18	879-314-22	1 Stück	879-014-00	10 Stück
26	15	0,15 mm	10,23 mm	879-315-18	879-315-22	1 Stück	879-015-00	10 Stück
26	16	0,15 mm	10,33 mm	879-316-18	879-316-22	1 Stück	879-016-00	10 Stück
26	17	0,15 mm	10,43 mm	879-317-18	879-317-22	1 Stück	879-017-00	10 Stück
26	18	0,15 mm	10,54 mm	879-318-18	879-318-22	1 Stück	879-018-00	10 Stück
26	19	0,15 mm	10,64 mm	879-319-18	879-319-22	1 Stück	879-019-00	10 Stück
26	20	0,15 mm	10,74 mm	879-320-18	879-320-22	1 Stück	879-020-00	10 Stück
26	21	0,15 mm	10,85 mm	879-321-18	879-321-22	1 Stück	879-021-00	10 Stück
26	22	0,15 mm	10,95 mm	879-322-18	879-322-22	1 Stück	879-022-00	10 Stück
26	23	0,15 mm	11,05 mm	879-323-18	879-323-22	1 Stück	879-023-00	10 Stück
26	24	0,15 mm	11,16 mm	879-324-18	879-324-22	1 Stück	879-024-00	10 Stück
26	25	0,18 mm	11,26 mm	879-325-18	879-325-22	1 Stück	879-025-00	10 Stück
26	26	0,18 mm	11,36 mm	879-326-18	879-326-22	1 Stück	879-026-00	10 Stück
26	27	0,18 mm	11,47 mm	879-327-18	879-327-22	1 Stück	879-027-00	10 Stück
26	28	0,18 mm	11,57 mm	879-328-18	879-328-22	1 Stück	879-028-00	10 Stück
26	29	0,18 mm	11,67 mm	879-329-18	879-329-22	1 Stück	879-029-00	10 Stück
26	30	0,18 mm	11,78 mm	879-330-18	879-330-22	1 Stück	879-030-00	10 Stück
26	31	0,18 mm	11,88 mm	879-331-18	879-331-22	1 Stück	879-031-00	10 Stück
26	32	0,18 mm	11,98 mm	879-332-18	879-332-22	1 Stück	879-032-00	10 Stück
26	33	0,18 mm	12,08 mm	879-333-18	879-333-22	1 Stück	879-033-00	10 Stück
26	34	0,18 mm	12,19 mm	879-334-18	879-334-22	1 Stück	879-034-00	10 Stück
26	35	0,18 mm	12,29 mm	879-335-18	879-335-22	1 Stück	879-035-00	10 Stück
26	36	0,18 mm	12,39 mm	879-336-18	879-336-22	1 Stück	879-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾			
							REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	880-301-18	880-301-22	1 Stück	880-201-00	10 Stück
46	2	0,12 mm	9,03 mm	880-302-18	880-302-22	1 Stück	880-202-00	10 Stück
46	3	0,12 mm	9,15 mm	880-303-18	880-303-22	1 Stück	880-203-00	10 Stück
46	4	0,12 mm	9,28 mm	880-304-18	880-304-22	1 Stück	880-204-00	10 Stück
46	5	0,12 mm	9,40 mm	880-305-18	880-305-22	1 Stück	880-205-00	10 Stück
46	6	0,12 mm	9,52 mm	880-306-18	880-306-22	1 Stück	880-206-00	10 Stück
46	7	0,12 mm	9,65 mm	880-307-18	880-307-22	1 Stück	880-207-00	10 Stück
46	8	0,12 mm	9,77 mm	880-308-18	880-308-22	1 Stück	880-208-00	10 Stück
46	9	0,15 mm	9,89 mm	880-309-18	880-309-22	1 Stück	880-209-00	10 Stück
46	10	0,15 mm	10,01 mm	880-310-18	880-310-22	1 Stück	880-210-00	10 Stück
46	11	0,15 mm	10,14 mm	880-311-18	880-311-22	1 Stück	880-211-00	10 Stück
46	12	0,15 mm	10,25 mm	880-312-18	880-312-22	1 Stück	880-212-00	10 Stück
46	13	0,15 mm	10,38 mm	880-313-18	880-313-22	1 Stück	880-213-00	10 Stück
46	14	0,15 mm	10,50 mm	880-314-18	880-314-22	1 Stück	880-214-00	10 Stück
46	15	0,15 mm	10,63 mm	880-315-18	880-315-22	1 Stück	880-215-00	10 Stück
46	16	0,15 mm	10,75 mm	880-316-18	880-316-22	1 Stück	880-216-00	10 Stück
46	17	0,15 mm	10,87 mm	880-317-18	880-317-22	1 Stück	880-217-00	10 Stück
46	18	0,15 mm	10,99 mm	880-318-18	880-318-22	1 Stück	880-218-00	10 Stück
46	19	0,15 mm	11,12 mm	880-319-18	880-319-22	1 Stück	880-219-00	10 Stück
46	20	0,15 mm	11,24 mm	880-320-18	880-320-22	1 Stück	880-220-00	10 Stück
46	21	0,15 mm	11,36 mm	880-321-18	880-321-22	1 Stück	880-221-00	10 Stück
46	22	0,15 mm	11,48 mm	880-322-18	880-322-22	1 Stück	880-222-00	10 Stück
46	23	0,15 mm	11,61 mm	880-323-18	880-323-22	1 Stück	880-223-00	10 Stück
46	24	0,15 mm	11,73 mm	880-324-18	880-324-22	1 Stück	880-224-00	10 Stück
46	25	0,18 mm	11,85 mm	880-325-18	880-325-22	1 Stück	880-225-00	10 Stück
46	26	0,18 mm	11,97 mm	880-326-18	880-326-22	1 Stück	880-226-00	10 Stück
46	27	0,18 mm	12,10 mm	880-327-18	880-327-22	1 Stück	880-227-00	10 Stück
46	28	0,18 mm	12,22 mm	880-328-18	880-328-22	1 Stück	880-228-00	10 Stück
46	29	0,18 mm	12,34 mm	880-329-18	880-329-22	1 Stück	880-229-00	10 Stück
46	30	0,18 mm	12,46 mm	880-330-18	880-330-22	1 Stück	880-230-00	10 Stück
46	31	0,18 mm	12,59 mm	880-331-18	880-331-22	1 Stück	880-231-00	10 Stück
46	32	0,18 mm	12,71 mm	880-332-18	880-332-22	1 Stück	880-232-00	10 Stück
46	33	0,18 mm	12,83 mm	880-333-18	880-333-22	1 Stück	880-233-00	10 Stück
46	34	0,18 mm	12,96 mm	880-334-18	880-334-22	1 Stück	880-234-00	10 Stück
46	35	0,18 mm	13,08 mm	880-335-18	880-335-22	1 Stück	880-235-00	10 Stück
46	36	0,18 mm	13,20 mm	880-336-18	880-336-22	1 Stück	880-236-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® Snap / Einzelpackungen

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾			
					REF			
36	1	0,12 mm	8,91 mm	881-301-18	881-301-22	1 Stück	881-201-00	10 Stück
36	2	0,12 mm	9,03 mm	881-302-18	881-302-22	1 Stück	881-202-00	10 Stück
36	3	0,12 mm	9,15 mm	881-303-18	881-303-22	1 Stück	881-203-00	10 Stück
36	4	0,12 mm	9,28 mm	881-304-18	881-304-22	1 Stück	881-204-00	10 Stück
36	5	0,12 mm	9,40 mm	881-305-18	881-305-22	1 Stück	881-205-00	10 Stück
36	6	0,12 mm	9,52 mm	881-306-18	881-306-22	1 Stück	881-206-00	10 Stück
36	7	0,12 mm	9,65 mm	881-307-18	881-307-22	1 Stück	881-207-00	10 Stück
36	8	0,12 mm	9,77 mm	881-308-18	881-308-22	1 Stück	881-208-00	10 Stück
36	9	0,15 mm	9,89 mm	881-309-18	881-309-22	1 Stück	881-209-00	10 Stück
36	10	0,15 mm	10,01 mm	881-310-18	881-310-22	1 Stück	881-210-00	10 Stück
36	11	0,15 mm	10,14 mm	881-311-18	881-311-22	1 Stück	881-211-00	10 Stück
36	12	0,15 mm	10,25 mm	881-312-18	881-312-22	1 Stück	881-212-00	10 Stück
36	13	0,15 mm	10,38 mm	881-313-18	881-313-22	1 Stück	881-213-00	10 Stück
36	14	0,15 mm	10,50 mm	881-314-18	881-314-22	1 Stück	881-214-00	10 Stück
36	15	0,15 mm	10,63 mm	881-315-18	881-315-22	1 Stück	881-215-00	10 Stück
36	16	0,15 mm	10,75 mm	881-316-18	881-316-22	1 Stück	881-216-00	10 Stück
36	17	0,15 mm	10,87 mm	881-317-18	881-317-22	1 Stück	881-217-00	10 Stück
36	18	0,15 mm	10,99 mm	881-318-18	881-318-22	1 Stück	881-218-00	10 Stück
36	19	0,15 mm	11,12 mm	881-319-18	881-319-22	1 Stück	881-219-00	10 Stück
36	20	0,15 mm	11,24 mm	881-320-18	881-320-22	1 Stück	881-220-00	10 Stück
36	21	0,15 mm	11,36 mm	881-321-18	881-321-22	1 Stück	881-221-00	10 Stück
36	22	0,15 mm	11,48 mm	881-322-18	881-322-22	1 Stück	881-222-00	10 Stück
36	23	0,15 mm	11,61 mm	881-323-18	881-323-22	1 Stück	881-223-00	10 Stück
36	24	0,15 mm	11,73 mm	881-324-18	881-324-22	1 Stück	881-224-00	10 Stück
36	25	0,18 mm	11,85 mm	881-325-18	881-325-22	1 Stück	881-225-00	10 Stück
36	26	0,18 mm	11,97 mm	881-326-18	881-326-22	1 Stück	881-226-00	10 Stück
36	27	0,18 mm	12,10 mm	881-327-18	881-327-22	1 Stück	881-227-00	10 Stück
36	28	0,18 mm	12,22 mm	881-328-18	881-328-22	1 Stück	881-228-00	10 Stück
36	29	0,18 mm	12,34 mm	881-329-18	881-329-22	1 Stück	881-229-00	10 Stück
36	30	0,18 mm	12,46 mm	881-330-18	881-330-22	1 Stück	881-230-00	10 Stück
36	31	0,18 mm	12,59 mm	881-331-18	881-331-22	1 Stück	881-231-00	10 Stück
36	32	0,18 mm	12,71 mm	881-332-18	881-332-22	1 Stück	881-232-00	10 Stück
36	33	0,18 mm	12,83 mm	881-333-18	881-333-22	1 Stück	881-233-00	10 Stück
36	34	0,18 mm	12,96 mm	881-334-18	881-334-22	1 Stück	881-234-00	10 Stück
36	35	0,18 mm	13,08 mm	881-335-18	881-335-22	1 Stück	881-235-00	10 Stück
36	36	0,18 mm	13,20 mm	881-336-18	881-336-22	1 Stück	881-236-00	10 Stück

¹⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
16	Nr. 5-36 (2)	882-364-18	882-364-22	882-064-00	64 Stück
26	Nr. 5-36 (2)	883-364-18	883-364-22	883-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
16	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	882-350-18	882-350-22	882-150-00	150 Stück
26	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	883-350-18	883-350-22	883-150-00	150 Stück

Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
16	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			882-300-00	300 Stück
26	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			883-300-00	300 Stück

¹⁾ (16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ (16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Oberkiefer 2. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
17	Nr. 1-32 (2)			886-064-00	64 Stück
27	Nr. 1-32 (2)			887-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
17	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			886-150-00	150 Stück
27	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			887-150-00	150 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Sortimente

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
46	Nr. 5-36 (2)	884-364-18	884-364-22	884-064-00	64 Stück
36	Nr. 5-36 (2)	885-364-18	885-364-22	885-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
46	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	884-350-18	884-350-22	884-150-00	150 Stück
36	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	885-350-18	885-350-22	885-150-00	150 Stück

Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
46	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			884-300-00	300 Stück
36	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			885-300-00	300 Stück

¹⁾ (46) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

(36) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ (46) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

(36) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 2. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
47	Nr. 1-32 (2)			888-064-00	64 Stück
37	Nr. 1-32 (2)			889-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
47	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			888-150-00	150 Stück
37	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			889-150-00	150 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾			
							REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	882-301-18	882-301-22	1 Stück	882-001-00	10 Stück
16	2	0,12 mm	8,89 mm	882-302-18	882-302-22	1 Stück	882-002-00	10 Stück
16	3	0,12 mm	8,99 mm	882-303-18	882-303-22	1 Stück	882-003-00	10 Stück
16	4	0,12 mm	9,09 mm	882-304-18	882-304-22	1 Stück	882-004-00	10 Stück
16	5	0,12 mm	9,20 mm	882-305-18	882-305-22	1 Stück	882-005-00	10 Stück
16	6	0,12 mm	9,30 mm	882-306-18	882-306-22	1 Stück	882-006-00	10 Stück
16	7	0,12 mm	9,40 mm	882-307-18	882-307-22	1 Stück	882-007-00	10 Stück
16	8	0,12 mm	9,50 mm	882-308-18	882-308-22	1 Stück	882-008-00	10 Stück
16	9	0,15 mm	9,61 mm	882-309-18	882-309-22	1 Stück	882-009-00	10 Stück
16	10	0,15 mm	9,71 mm	882-310-18	882-310-22	1 Stück	882-010-00	10 Stück
16	11	0,15 mm	9,81 mm	882-311-18	882-311-22	1 Stück	882-011-00	10 Stück
16	12	0,15 mm	9,92 mm	882-312-18	882-312-22	1 Stück	882-012-00	10 Stück
16	13	0,15 mm	10,02 mm	882-313-18	882-313-22	1 Stück	882-013-00	10 Stück
16	14	0,15 mm	10,12 mm	882-314-18	882-314-22	1 Stück	882-014-00	10 Stück
16	15	0,15 mm	10,23 mm	882-315-18	882-315-22	1 Stück	882-015-00	10 Stück
16	16	0,15 mm	10,33 mm	882-316-18	882-316-22	1 Stück	882-016-00	10 Stück
16	17	0,15 mm	10,43 mm	882-317-18	882-317-22	1 Stück	882-017-00	10 Stück
16	18	0,15 mm	10,54 mm	882-318-18	882-318-22	1 Stück	882-018-00	10 Stück
16	19	0,15 mm	10,64 mm	882-319-18	882-319-22	1 Stück	882-019-00	10 Stück
16	20	0,15 mm	10,74 mm	882-320-18	882-320-22	1 Stück	882-020-00	10 Stück
16	21	0,15 mm	10,85 mm	882-321-18	882-321-22	1 Stück	882-021-00	10 Stück
16	22	0,15 mm	10,95 mm	882-322-18	882-322-22	1 Stück	882-022-00	10 Stück
16	23	0,15 mm	11,05 mm	882-323-18	882-323-22	1 Stück	882-023-00	10 Stück
16	24	0,15 mm	11,16 mm	882-324-18	882-324-22	1 Stück	882-024-00	10 Stück
16	25	0,18 mm	11,26 mm	882-325-18	882-325-22	1 Stück	882-025-00	10 Stück
16	26	0,18 mm	11,36 mm	882-326-18	882-326-22	1 Stück	882-026-00	10 Stück
16	27	0,18 mm	11,47 mm	882-327-18	882-327-22	1 Stück	882-027-00	10 Stück
16	28	0,18 mm	11,57 mm	882-328-18	882-328-22	1 Stück	882-028-00	10 Stück
16	29	0,18 mm	11,67 mm	882-329-18	882-329-22	1 Stück	882-029-00	10 Stück
16	30	0,18 mm	11,78 mm	882-330-18	882-330-22	1 Stück	882-030-00	10 Stück
16	31	0,18 mm	11,88 mm	882-331-18	882-331-22	1 Stück	882-031-00	10 Stück
16	32	0,18 mm	11,98 mm	882-332-18	882-332-22	1 Stück	882-032-00	10 Stück
16	33	0,18 mm	12,08 mm	882-333-18	882-333-22	1 Stück	882-033-00	10 Stück
16	34	0,18 mm	12,19 mm	882-334-18	882-334-22	1 Stück	882-034-00	10 Stück
16	35	0,18 mm	12,29 mm	882-335-18	882-035-22	1 Stück	882-035-00	10 Stück
16	36	0,18 mm	12,39 mm	882-336-18	882-336-22	1 Stück	882-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾			
26	1	0,12 mm	8,78 mm	883-301-18	883-301-22	1 Stück	883-001-00	10 Stück
26	2	0,12 mm	8,89 mm	883-302-18	883-302-22	1 Stück	883-002-00	10 Stück
26	3	0,12 mm	8,99 mm	883-303-18	883-303-22	1 Stück	883-003-00	10 Stück
26	4	0,12 mm	9,09 mm	883-304-18	883-304-22	1 Stück	883-004-00	10 Stück
26	5	0,12 mm	9,20 mm	883-305-18	883-305-22	1 Stück	883-005-00	10 Stück
26	6	0,12 mm	9,30 mm	883-306-18	883-306-22	1 Stück	883-006-00	10 Stück
26	7	0,12 mm	9,40 mm	883-307-18	883-307-22	1 Stück	883-007-00	10 Stück
26	8	0,12 mm	9,50 mm	883-308-18	883-308-22	1 Stück	883-008-00	10 Stück
26	9	0,15 mm	9,61 mm	883-309-18	883-309-22	1 Stück	883-009-00	10 Stück
26	10	0,15 mm	9,71 mm	883-310-18	883-310-22	1 Stück	883-010-00	10 Stück
26	11	0,15 mm	9,81 mm	883-311-18	883-311-22	1 Stück	883-011-00	10 Stück
26	12	0,15 mm	9,92 mm	883-312-18	883-312-22	1 Stück	883-012-00	10 Stück
26	13	0,15 mm	10,02 mm	883-313-18	883-313-22	1 Stück	883-013-00	10 Stück
26	14	0,15 mm	10,12 mm	883-314-18	883-314-22	1 Stück	883-014-00	10 Stück
26	15	0,15 mm	10,23 mm	883-315-18	883-315-22	1 Stück	883-015-00	10 Stück
26	16	0,15 mm	10,33 mm	883-316-18	883-316-22	1 Stück	883-016-00	10 Stück
26	17	0,15 mm	10,43 mm	883-317-18	883-317-22	1 Stück	883-017-00	10 Stück
26	18	0,15 mm	10,54 mm	883-318-18	883-318-22	1 Stück	883-018-00	10 Stück
26	19	0,15 mm	10,64 mm	883-319-18	883-319-22	1 Stück	883-019-00	10 Stück
26	20	0,15 mm	10,74 mm	883-320-18	883-320-22	1 Stück	883-020-00	10 Stück
26	21	0,15 mm	10,85 mm	883-321-18	883-321-22	1 Stück	883-021-00	10 Stück
26	22	0,15 mm	10,95 mm	883-322-18	883-322-22	1 Stück	883-022-00	10 Stück
26	23	0,15 mm	11,05 mm	883-323-18	883-323-22	1 Stück	883-023-00	10 Stück
26	24	0,15 mm	11,16 mm	883-324-18	883-324-22	1 Stück	883-024-00	10 Stück
26	25	0,18 mm	11,26 mm	883-325-18	883-325-22	1 Stück	883-025-00	10 Stück
26	26	0,18 mm	11,36 mm	883-326-18	883-326-22	1 Stück	883-026-00	10 Stück
26	27	0,18 mm	11,47 mm	883-327-18	883-327-22	1 Stück	883-027-00	10 Stück
26	28	0,18 mm	11,57 mm	883-328-18	883-328-22	1 Stück	883-028-00	10 Stück
26	29	0,18 mm	11,67 mm	883-329-18	883-329-22	1 Stück	883-029-00	10 Stück
26	30	0,18 mm	11,78 mm	883-330-18	883-330-22	1 Stück	883-030-00	10 Stück
26	31	0,18 mm	11,88 mm	883-331-18	883-331-22	1 Stück	883-031-00	10 Stück
26	32	0,18 mm	11,98 mm	883-332-18	883-332-22	1 Stück	883-032-00	10 Stück
26	33	0,18 mm	12,08 mm	883-333-18	883-333-22	1 Stück	883-033-00	10 Stück
26	34	0,18 mm	12,19 mm	883-334-18	883-334-22	1 Stück	883-034-00	10 Stück
26	35	0,18 mm	12,29 mm	883-335-18	883-335-22	1 Stück	883-035-00	10 Stück
26	36	0,18 mm	12,39 mm	883-336-18	883-336-22	1 Stück	883-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾			
46	1	0,12 mm	8,91 mm	884-301-18	884-301-22	1 Stück	884-001-00	10 Stück
46	2	0,12 mm	9,03 mm	884-302-18	884-302-22	1 Stück	884-002-00	10 Stück
46	3	0,12 mm	9,15 mm	884-303-18	884-303-22	1 Stück	884-003-00	10 Stück
46	4	0,12 mm	9,28 mm	884-304-18	884-304-22	1 Stück	884-004-00	10 Stück
46	5	0,12 mm	9,40 mm	884-305-18	884-305-22	1 Stück	884-005-00	10 Stück
46	6	0,12 mm	9,52 mm	884-306-18	884-306-22	1 Stück	884-006-00	10 Stück
46	7	0,12 mm	9,65 mm	884-307-18	884-307-22	1 Stück	884-007-00	10 Stück
46	8	0,12 mm	9,77 mm	884-308-18	884-308-22	1 Stück	884-008-00	10 Stück
46	9	0,15 mm	9,89 mm	884-309-18	884-309-22	1 Stück	884-009-00	10 Stück
46	10	0,15 mm	10,01 mm	884-310-18	884-310-22	1 Stück	884-010-00	10 Stück
46	11	0,15 mm	10,14 mm	884-311-18	884-311-22	1 Stück	884-011-00	10 Stück
46	12	0,15 mm	10,25 mm	884-312-18	884-312-22	1 Stück	884-012-00	10 Stück
46	13	0,15 mm	10,38 mm	884-313-18	884-313-22	1 Stück	884-013-00	10 Stück
46	14	0,15 mm	10,50 mm	884-314-18	884-314-22	1 Stück	884-014-00	10 Stück
46	15	0,15 mm	10,63 mm	884-315-18	884-315-22	1 Stück	884-015-00	10 Stück
46	16	0,15 mm	10,75 mm	884-316-18	884-316-22	1 Stück	884-016-00	10 Stück
46	17	0,15 mm	10,87 mm	884-317-18	884-317-22	1 Stück	884-017-00	10 Stück
46	18	0,15 mm	10,99 mm	884-318-18	884-318-22	1 Stück	884-018-00	10 Stück
46	19	0,15 mm	11,12 mm	884-319-18	884-319-22	1 Stück	884-019-00	10 Stück
46	20	0,15 mm	11,24 mm	884-320-18	884-320-22	1 Stück	884-020-00	10 Stück
46	21	0,15 mm	11,36 mm	884-321-18	884-321-22	1 Stück	884-021-00	10 Stück
46	22	0,15 mm	11,48 mm	884-322-18	884-322-22	1 Stück	884-022-00	10 Stück
46	23	0,15 mm	11,61 mm	884-323-18	884-323-22	1 Stück	884-023-00	10 Stück
46	24	0,15 mm	11,73 mm	884-324-18	884-324-22	1 Stück	884-024-00	10 Stück
46	25	0,18 mm	11,85 mm	884-325-18	884-325-22	1 Stück	884-025-00	10 Stück
46	26	0,18 mm	11,97 mm	884-326-18	884-326-22	1 Stück	884-026-00	10 Stück
46	27	0,18 mm	12,10 mm	884-327-18	884-327-22	1 Stück	884-027-00	10 Stück
46	28	0,18 mm	12,22 mm	884-328-18	884-328-22	1 Stück	884-028-00	10 Stück
46	29	0,18 mm	12,34 mm	884-329-18	884-329-22	1 Stück	884-029-00	10 Stück
46	30	0,18 mm	12,46 mm	884-330-18	884-330-22	1 Stück	884-030-00	10 Stück
46	31	0,18 mm	12,59 mm	884-331-18	884-331-22	1 Stück	884-031-00	10 Stück
46	32	0,18 mm	12,71 mm	884-332-18	884-332-22	1 Stück	884-032-00	10 Stück
46	33	0,18 mm	12,83 mm	884-333-18	884-333-22	1 Stück	884-033-00	10 Stück
46	34	0,18 mm	12,96 mm	884-334-18	884-334-22	1 Stück	884-034-00	10 Stück
46	35	0,18 mm	13,08 mm	884-335-18	884-335-22	1 Stück	884-035-00	10 Stück
46	36	0,18 mm	13,20 mm	884-336-18	884-336-22	1 Stück	884-036-00	10 Stück



¹⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾			
36	1	0,12 mm	8,91 mm	885-301-18	885-301-22	1 Stück	885-001-00	10 Stück
36	2	0,12 mm	9,03 mm	885-302-18	885-302-22	1 Stück	885-002-00	10 Stück
36	3	0,12 mm	9,15 mm	885-303-18	885-303-22	1 Stück	885-003-00	10 Stück
36	4	0,12 mm	9,28 mm	885-304-18	885-304-22	1 Stück	885-004-00	10 Stück
36	5	0,12 mm	9,40 mm	885-305-18	885-305-22	1 Stück	885-005-00	10 Stück
36	6	0,12 mm	9,52 mm	885-306-18	885-306-22	1 Stück	885-006-00	10 Stück
36	7	0,12 mm	9,65 mm	885-307-18	885-307-22	1 Stück	885-007-00	10 Stück
36	8	0,12 mm	9,77 mm	885-308-18	885-308-22	1 Stück	885-008-00	10 Stück
36	9	0,15 mm	9,89 mm	885-309-18	885-309-22	1 Stück	885-009-00	10 Stück
36	10	0,15 mm	10,01 mm	885-310-18	885-310-22	1 Stück	885-010-00	10 Stück
36	11	0,15 mm	10,14 mm	885-311-18	885-311-22	1 Stück	885-011-00	10 Stück
36	12	0,15 mm	10,25 mm	885-312-18	885-312-22	1 Stück	885-012-00	10 Stück
36	13	0,15 mm	10,38 mm	885-313-18	885-313-22	1 Stück	885-013-00	10 Stück
36	14	0,15 mm	10,50 mm	885-314-18	885-314-22	1 Stück	885-014-00	10 Stück
36	15	0,15 mm	10,63 mm	885-315-18	885-315-22	1 Stück	885-015-00	10 Stück
36	16	0,15 mm	10,75 mm	885-316-18	885-316-22	1 Stück	885-016-00	10 Stück
36	17	0,15 mm	10,87 mm	885-317-18	885-317-22	1 Stück	885-017-00	10 Stück
36	18	0,15 mm	10,99 mm	885-318-18	885-318-22	1 Stück	885-018-00	10 Stück
36	19	0,15 mm	11,12 mm	885-319-18	885-319-22	1 Stück	885-019-00	10 Stück
36	20	0,15 mm	11,24 mm	885-320-18	885-320-22	1 Stück	885-020-00	10 Stück
36	21	0,15 mm	11,36 mm	885-321-18	885-321-22	1 Stück	885-021-00	10 Stück
36	22	0,15 mm	11,48 mm	885-322-18	885-322-22	1 Stück	885-022-00	10 Stück
36	23	0,15 mm	11,61 mm	885-323-18	885-323-22	1 Stück	885-023-00	10 Stück
36	24	0,15 mm	11,73 mm	885-324-18	885-324-22	1 Stück	885-024-00	10 Stück
36	25	0,18 mm	11,85 mm	885-325-18	885-325-22	1 Stück	885-025-00	10 Stück
36	26	0,18 mm	11,97 mm	885-326-18	885-326-22	1 Stück	885-026-00	10 Stück
36	27	0,18 mm	12,10 mm	885-327-18	885-327-22	1 Stück	885-027-00	10 Stück
36	28	0,18 mm	12,22 mm	885-328-18	885-328-22	1 Stück	885-028-00	10 Stück
36	29	0,18 mm	12,34 mm	885-329-18	885-329-22	1 Stück	885-029-00	10 Stück
36	30	0,18 mm	12,46 mm	885-330-18	885-330-22	1 Stück	885-030-00	10 Stück
36	31	0,18 mm	12,59 mm	885-331-18	885-331-22	1 Stück	885-031-00	10 Stück
36	32	0,18 mm	12,71 mm	885-332-18	885-332-22	1 Stück	885-032-00	10 Stück
36	33	0,18 mm	12,83 mm	885-333-18	885-333-22	1 Stück	885-033-00	10 Stück
36	34	0,18 mm	12,96 mm	885-334-18	885-334-22	1 Stück	885-034-00	10 Stück
36	35	0,18 mm	13,08 mm	885-335-18	885-335-22	1 Stück	885-035-00	10 Stück
36	36	0,18 mm	13,20 mm	885-336-18	885-336-22	1 Stück	885-036-00	10 Stück

¹⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10
²⁾ beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 2. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt REF	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
17	1	0,12 mm	8,10 mm				886-001-00	10 Stück
17	2	0,12 mm	8,22 mm				886-002-00	10 Stück
17	3	0,12 mm	8,33 mm				886-003-00	10 Stück
17	4	0,12 mm	8,45 mm				886-004-00	10 Stück
17	5	0,12 mm	8,56 mm				886-005-00	10 Stück
17	6	0,12 mm	8,68 mm				886-006-00	10 Stück
17	7	0,15 mm	8,80 mm				886-007-00	10 Stück
17	8	0,15 mm	8,91 mm				886-008-00	10 Stück
17	9	0,15 mm	9,03 mm				886-009-00	10 Stück
17	10	0,15 mm	9,14 mm				886-010-00	10 Stück
17	11	0,15 mm	9,26 mm				886-011-00	10 Stück
17	12	0,15 mm	9,38 mm				886-012-00	10 Stück
17	13	0,15 mm	9,49 mm				886-013-00	10 Stück
17	14	0,15 mm	9,61 mm				886-014-00	10 Stück
17	15	0,15 mm	9,72 mm				886-015-00	10 Stück
17	16	0,15 mm	9,84 mm				886-016-00	10 Stück
17	17	0,15 mm	9,96 mm				886-017-00	10 Stück
17	18	0,15 mm	10,07 mm				886-018-00	10 Stück
17	19	0,15 mm	10,19 mm				886-019-00	10 Stück
17	20	0,15 mm	10,30 mm				886-020-00	10 Stück
17	21	0,15 mm	10,42 mm				886-021-00	10 Stück
17	22	0,15 mm	10,54 mm				886-022-00	10 Stück
17	23	0,18 mm	10,65 mm				886-023-00	10 Stück
17	24	0,18 mm	10,77 mm				886-024-00	10 Stück
17	25	0,18 mm	10,88 mm				886-025-00	10 Stück
17	26	0,18 mm	11,00 mm				886-026-00	10 Stück
17	27	0,18 mm	11,12 mm				886-027-00	10 Stück
17	28	0,18 mm	11,23 mm				886-028-00	10 Stück
17	29	0,18 mm	11,35 mm				886-029-00	10 Stück
17	30	0,18 mm	11,46 mm				886-030-00	10 Stück
17	31	0,18 mm	11,58 mm				886-031-00	10 Stück
17	32	0,18 mm	11,70 mm				886-032-00	10 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 2. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
27	1	0,12 mm	8,10 mm				887-001-00	10 Stück
27	2	0,12 mm	8,22 mm				887-002-00	10 Stück
27	3	0,12 mm	8,33 mm				887-003-00	10 Stück
27	4	0,12 mm	8,45 mm				887-004-00	10 Stück
27	5	0,12 mm	8,56 mm				887-005-00	10 Stück
27	6	0,12 mm	8,68 mm				887-006-00	10 Stück
27	7	0,15 mm	8,80 mm				887-007-00	10 Stück
27	8	0,15 mm	8,91 mm				887-008-00	10 Stück
27	9	0,15 mm	9,03 mm				887-009-00	10 Stück
27	10	0,15 mm	9,14 mm				887-010-00	10 Stück
27	11	0,15 mm	9,26 mm				887-011-00	10 Stück
27	12	0,15 mm	9,38 mm				887-012-00	10 Stück
27	13	0,15 mm	9,49 mm				887-013-00	10 Stück
27	14	0,15 mm	9,61 mm				887-014-00	10 Stück
27	15	0,15 mm	9,72 mm				887-015-00	10 Stück
27	16	0,15 mm	9,84 mm				887-016-00	10 Stück
27	17	0,15 mm	9,96 mm				887-017-00	10 Stück
27	18	0,15 mm	10,07 mm				887-018-00	10 Stück
27	19	0,15 mm	10,19 mm				887-019-00	10 Stück
27	20	0,15 mm	10,30 mm				887-020-00	10 Stück
27	21	0,15 mm	10,42 mm				887-021-00	10 Stück
27	22	0,15 mm	10,54 mm				887-022-00	10 Stück
27	23	0,18 mm	10,65 mm				887-023-00	10 Stück
27	24	0,18 mm	10,77 mm				887-024-00	10 Stück
27	25	0,18 mm	10,88 mm				887-025-00	10 Stück
27	26	0,18 mm	11,00 mm				887-026-00	10 Stück
27	27	0,18 mm	11,12 mm				887-027-00	10 Stück
27	28	0,18 mm	11,23 mm				887-028-00	10 Stück
27	29	0,18 mm	11,35 mm				887-029-00	10 Stück
27	30	0,18 mm	11,46 mm				887-030-00	10 Stück
27	31	0,18 mm	11,58 mm				887-031-00	10 Stück
27	32	0,18 mm	11,70 mm				887-032-00	10 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 2. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
47	1	0,12 mm	9,88 mm				888-001-00	10 Stück
47	2	0,12 mm	9,92 mm				888-002-00	10 Stück
47	3	0,12 mm	10,04 mm				888-003-00	10 Stück
47	4	0,12 mm	10,17 mm				888-004-00	10 Stück
47	5	0,12 mm	10,29 mm				888-005-00	10 Stück
47	6	0,12 mm	10,41 mm				888-006-00	10 Stück
47	7	0,15 mm	10,53 mm				888-007-00	10 Stück
47	8	0,15 mm	10,65 mm				888-008-00	10 Stück
47	9	0,15 mm	10,78 mm				888-009-00	10 Stück
47	10	0,15 mm	10,90 mm				888-010-00	10 Stück
47	11	0,15 mm	11,02 mm				888-011-00	10 Stück
47	12	0,15 mm	11,14 mm				888-012-00	10 Stück
47	13	0,15 mm	11,26 mm				888-013-00	10 Stück
47	14	0,15 mm	11,39 mm				888-014-00	10 Stück
47	15	0,15 mm	11,51 mm				888-015-00	10 Stück
47	16	0,15 mm	11,63 mm				888-016-00	10 Stück
47	17	0,15 mm	11,75 mm				888-017-00	10 Stück
47	18	0,15 mm	11,87 mm				888-018-00	10 Stück
47	19	0,15 mm	11,99 mm				888-019-00	10 Stück
47	20	0,15 mm	12,12 mm				888-020-00	10 Stück
47	21	0,15 mm	12,24 mm				888-021-00	10 Stück
47	22	0,15 mm	12,36 mm				888-022-00	10 Stück
47	23	0,18 mm	12,48 mm				888-023-00	10 Stück
47	24	0,18 mm	12,61 mm				888-024-00	10 Stück
47	25	0,18 mm	12,73 mm				888-025-00	10 Stück
47	26	0,18 mm	12,85 mm				888-026-00	10 Stück
47	27	0,18 mm	12,97 mm				888-027-00	10 Stück
47	28	0,18 mm	13,09 mm				888-028-00	10 Stück
47	29	0,18 mm	13,22 mm				888-029-00	10 Stück
47	30	0,18 mm	13,34 mm				888-030-00	10 Stück
47	31	0,18 mm	13,46 mm				888-031-00	10 Stück
47	32	0,18 mm	13,59 mm				888-032-00	10 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 2. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt REF	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
37	1	0,12 mm	9,88 mm				889-001-00	10 Stück
37	2	0,12 mm	9,92 mm				889-002-00	10 Stück
37	3	0,12 mm	10,04 mm				889-003-00	10 Stück
37	4	0,12 mm	10,17 mm				889-004-00	10 Stück
37	5	0,12 mm	10,29 mm				889-005-00	10 Stück
37	6	0,12 mm	10,41 mm				889-006-00	10 Stück
37	7	0,15 mm	10,53 mm				889-007-00	10 Stück
37	8	0,15 mm	10,65 mm				889-008-00	10 Stück
37	9	0,15 mm	10,78 mm				889-009-00	10 Stück
37	10	0,15 mm	10,90 mm				889-010-00	10 Stück
37	11	0,15 mm	11,02 mm				889-011-00	10 Stück
37	12	0,15 mm	11,14 mm				889-012-00	10 Stück
37	13	0,15 mm	11,26 mm				889-013-00	10 Stück
37	14	0,15 mm	11,39 mm				889-014-00	10 Stück
37	15	0,15 mm	11,51 mm				889-015-00	10 Stück
37	16	0,15 mm	11,63 mm				889-016-00	10 Stück
37	17	0,15 mm	11,75 mm				889-017-00	10 Stück
37	18	0,15 mm	11,87 mm				889-018-00	10 Stück
37	19	0,15 mm	11,99 mm				889-019-00	10 Stück
37	20	0,15 mm	12,12 mm				889-020-00	10 Stück
37	21	0,15 mm	12,24 mm				889-021-00	10 Stück
37	22	0,15 mm	12,36 mm				889-022-00	10 Stück
37	23	0,18 mm	12,48 mm				889-023-00	10 Stück
37	24	0,18 mm	12,61 mm				889-024-00	10 Stück
37	25	0,18 mm	12,73 mm				889-025-00	10 Stück
37	26	0,18 mm	12,85 mm				889-026-00	10 Stück
37	27	0,18 mm	12,97 mm				889-027-00	10 Stück
37	28	0,18 mm	13,09 mm				889-028-00	10 Stück
37	29	0,18 mm	13,22 mm				889-029-00	10 Stück
37	30	0,18 mm	13,34 mm				889-030-00	10 Stück
37	31	0,18 mm	13,46 mm				889-031-00	10 Stück
37	32	0,18 mm	13,59 mm				889-032-00	10 Stück

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
15-14/24-25	Nr. 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
15-14/24-25	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 Stück

Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
15-14/24-25	Nr. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 Stück

¹⁾ beschweißt mit equilibrium® 2 Bracket 790-206-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit equilibrium® 2 Bracket 790-218-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 1. Prämolarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
44/34	Nr. 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
44/34	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 Stück

¹⁾ beschweißt mit equilibrium® 2 Bracket 790-210-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit equilibrium® 2 Bracket 790-222-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Standard Bänder / Sortimente

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 2. Prämolarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
45/35	Nr. 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22	REF	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾		
45/35	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22	REF	150 Stück

¹⁾ beschweißt mit equilibrium® 2 Bracket 790-211-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißt mit equilibrium® 2 Bracket 790-223-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
45-44/34-35	Nr. 1-32 (2)			865-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
45-44/34-35	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 Stück

Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
45-44/34-35	Nr. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 Stück

* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. und 2. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
17-16/26-27	Nr. 1-32 (2)			872-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
17-16/26-27	Nr. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)			872-150-00	150 Stück

* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer 1. und 2. Molarenbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
47-46/36-37	Nr. 1-32 (2)			873-064-00	64 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
47-46/36-37	Nr. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)			873-150-00	150 Stück

* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Standard Bänder / Sortimente

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer Eckzahnbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
13/23	Nr. 1-20 (2)			855-050-00	50 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
13/23	Nr. 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8)			855-150-00	150 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Unterkiefer Eckzahnbänder

Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
43/33	Nr. 1-16 (2)			857-042-00	42 Stück

Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
43/33	Nr. 1-2; 5,5; 6,5; 15-16 (4), 7,5; 8,5; 9,5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10)			857-150-00	150 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth18) ¹⁾	REF (Roth22) ²⁾			
15-14/24-25	1	0,12 mm	5,52 mm	860-101-18	860-101-22	1 Stück	860-101-00	10 Stück
15-14/24-25	2	0,12 mm	5,57 mm	860-102-18	860-102-22	1 Stück	860-102-00	10 Stück
15-14/24-25	3	0,12 mm	5,62 mm	860-103-18	860-103-22	1 Stück	860-103-00	10 Stück
15-14/24-25	4	0,12 mm	5,67 mm	860-104-18	860-104-22	1 Stück	860-104-00	10 Stück
15-14/24-25	5	0,12 mm	5,75 mm	860-105-18	860-105-22	1 Stück	860-105-00	10 Stück
15-14/24-25	6	0,12 mm	5,82 mm	860-106-18	860-106-22	1 Stück	860-106-00	10 Stück
15-14/24-25	7	0,12 mm	5,89 mm	860-107-18	860-107-22	1 Stück	860-107-00	10 Stück
15-14/24-25	8	0,12 mm	5,94 mm	860-108-18	860-108-22	1 Stück	860-108-00	10 Stück
15-14/24-25	9	0,12 mm	6,01 mm	860-109-18	860-109-22	1 Stück	860-109-00	10 Stück
15-14/24-25	10	0,12 mm	6,08 mm	860-110-18	860-110-22	1 Stück	860-110-00	10 Stück
15-14/24-25	11	0,12 mm	6,13 mm	860-111-18	860-111-22	1 Stück	860-111-00	10 Stück
15-14/24-25	12	0,12 mm	6,20 mm	860-112-18	860-112-22	1 Stück	860-112-00	10 Stück
15-14/24-25	13	0,12 mm	6,24 mm	860-113-18	860-113-22	1 Stück	860-113-00	10 Stück
15-14/24-25	14	0,12 mm	6,30 mm	860-114-18	860-114-22	1 Stück	860-114-00	10 Stück
15-14/24-25	15	0,12 mm	6,34 mm	860-115-18	860-115-22	1 Stück	860-115-00	10 Stück
15-14/24-25	16	0,12 mm	6,42 mm	860-116-18	860-116-22	1 Stück	860-116-00	10 Stück
15-14/24-25	17	0,12 mm	6,48 mm	860-117-18	860-117-22	1 Stück	860-117-00	10 Stück
15-14/24-25	18	0,12 mm	6,56 mm	860-118-18	860-118-22	1 Stück	860-118-00	10 Stück
15-14/24-25	19	0,12 mm	6,64 mm	860-119-18	860-119-22	1 Stück	860-119-00	10 Stück
15-14/24-25	20	0,12 mm	6,71 mm	860-120-18	860-120-22	1 Stück	860-120-00	10 Stück
15-14/24-25	21	0,12 mm	6,80 mm	860-121-18	860-121-22	1 Stück	860-121-00	10 Stück
15-14/24-25	22	0,12 mm	6,90 mm	860-122-18	860-122-22	1 Stück	860-122-00	10 Stück
15-14/24-25	23	0,12 mm	7,00 mm	860-123-18	860-123-22	1 Stück	860-123-00	10 Stück
15-14/24-25	24	0,12 mm	7,11 mm	860-124-18	860-124-22	1 Stück	860-124-00	10 Stück
15-14/24-25	25	0,12 mm	7,18 mm	860-125-18	860-125-22	1 Stück	860-125-00	10 Stück
15-14/24-25	26	0,12 mm	7,26 mm	860-126-18	860-126-22	1 Stück	860-126-00	10 Stück
15-14/24-25	27	0,12 mm	7,35 mm	860-127-18	860-127-22	1 Stück	860-127-00	10 Stück
15-14/24-25	28	0,12 mm	7,43 mm	860-128-18	860-128-22	1 Stück	860-128-00	10 Stück
15-14/24-25	29	0,12 mm	7,51 mm	860-129-18	860-129-22	1 Stück	860-129-00	10 Stück
15-14/24-25	30	0,12 mm	7,61 mm	860-130-18	860-130-22	1 Stück	860-130-00	10 Stück
15-14/24-25	31	0,12 mm	7,71 mm	860-131-18	860-131-22	1 Stück	860-131-00	10 Stück
15-14/24-25	32	0,12 mm	7,80 mm	860-132-18	860-132-22	1 Stück	860-132-00	10 Stück

¹⁾ beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-206-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-218-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. Prämolarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißte		Menge	unbeschweißte	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
44/34	1	0,12 mm	6,34 mm	861-101-18	861-101-22	1 Stück	861-101-00	10 Stück
44/34	2	0,12 mm	6,45 mm	861-102-18	861-102-22	1 Stück	861-102-00	10 Stück
44/34	3	0,12 mm	6,56 mm	861-103-18	861-103-22	1 Stück	861-103-00	10 Stück
44/34	4	0,12 mm	6,68 mm	861-104-18	861-104-22	1 Stück	861-104-00	10 Stück
44/34	5	0,12 mm	6,80 mm	861-105-18	861-105-22	1 Stück	861-105-00	10 Stück
44/34	6	0,12 mm	6,90 mm	861-106-18	861-106-22	1 Stück	861-106-00	10 Stück
44/34	7	0,12 mm	7,02 mm	861-107-18	861-107-22	1 Stück	861-107-00	10 Stück
44/34	8	0,12 mm	7,13 mm	861-108-18	861-108-22	1 Stück	861-108-00	10 Stück
44/34	9	0,12 mm	7,25 mm	861-109-18	861-109-22	1 Stück	861-109-00	10 Stück
44/34	10	0,12 mm	7,37 mm	861-110-18	861-110-22	1 Stück	861-110-00	10 Stück
44/34	11	0,12 mm	7,50 mm	861-111-18	861-111-22	1 Stück	861-111-00	10 Stück
44/34	12	0,12 mm	7,63 mm	861-112-18	861-112-22	1 Stück	861-112-00	10 Stück
44/34	13	0,12 mm	7,75 mm	861-113-18	861-113-22	1 Stück	861-113-00	10 Stück
44/34	14	0,12 mm	7,88 mm	861-114-18	861-114-22	1 Stück	861-114-00	10 Stück
44/34	15	0,12 mm	8,05 mm	861-115-18	861-115-22	1 Stück	861-115-00	10 Stück
44/34	16	0,12 mm	8,13 mm	861-116-18	861-116-22	1 Stück	861-116-00	10 Stück
44/34	17	0,12 mm	8,26 mm	861-117-18	861-117-22	1 Stück	861-117-00	10 Stück
44/34	18	0,12 mm	8,40 mm	861-118-18	861-118-22	1 Stück	861-118-00	10 Stück
44/34	19	0,12 mm	8,53 mm	861-119-18	861-119-22	1 Stück	861-119-00	10 Stück
44/34	20	0,12 mm	8,70 mm	861-120-18	861-120-22	1 Stück	861-120-00	10 Stück
44/34	21	0,12 mm	8,84 mm	861-121-18	861-121-22	1 Stück	861-121-00	10 Stück
44/34	22	0,12 mm	9,02 mm	861-122-18	861-122-22	1 Stück	861-122-00	10 Stück
44/34	23	0,12 mm	9,17 mm	861-123-18	861-123-22	1 Stück	861-123-00	10 Stück
44/34	24	0,12 mm	9,28 mm	861-124-18	861-124-22	1 Stück	861-124-00	10 Stück
44/34	25	0,12 mm	9,38 mm	861-125-18	861-125-22	1 Stück	861-125-00	10 Stück
44/34	26	0,12 mm	9,48 mm	861-126-18	861-126-22	1 Stück	861-126-00	10 Stück
44/34	27	0,12 mm	9,59 mm	861-127-18	861-127-22	1 Stück	861-127-00	10 Stück
44/34	28	0,12 mm	9,70 mm	861-128-18	861-128-22	1 Stück	861-128-00	10 Stück
44/34	29	0,12 mm	9,82 mm	861-129-18	861-129-22	1 Stück	861-129-00	10 Stück
44/34	30	0,12 mm	9,96 mm	861-130-18	861-130-22	1 Stück	861-130-00	10 Stück
44/34	31	0,12 mm	10,11 mm	861-131-18	861-131-22	1 Stück	861-131-00	10 Stück
44/34	32	0,12 mm	10,28 mm	861-132-18	861-132-22	1 Stück	861-132-00	10 Stück

¹⁾ beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-210-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-222-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaorium version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaorium imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 2. Prämolarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
45/35	1	0,12 mm	6,34 mm	862-101-18	862-101-22	1 Stück	861-101-00	10 Stück
45/35	2	0,12 mm	6,45 mm	862-102-18	862-102-22	1 Stück	861-102-00	10 Stück
45/35	3	0,12 mm	6,56 mm	862-103-18	862-103-22	1 Stück	861-103-00	10 Stück
45/35	4	0,12 mm	6,68 mm	862-104-18	862-104-22	1 Stück	861-104-00	10 Stück
45/35	5	0,12 mm	6,80 mm	862-105-18	862-105-22	1 Stück	861-105-00	10 Stück
45/35	6	0,12 mm	6,90 mm	862-106-18	862-106-22	1 Stück	861-106-00	10 Stück
45/35	7	0,12 mm	7,02 mm	862-107-18	862-107-22	1 Stück	861-107-00	10 Stück
45/35	8	0,12 mm	7,13 mm	862-108-18	862-108-22	1 Stück	861-108-00	10 Stück
45/35	9	0,12 mm	7,25 mm	862-109-18	862-109-22	1 Stück	861-109-00	10 Stück
45/35	10	0,12 mm	7,37 mm	862-110-18	862-110-22	1 Stück	861-110-00	10 Stück
45/35	11	0,12 mm	7,50 mm	862-111-18	862-111-22	1 Stück	861-111-00	10 Stück
45/35	12	0,12 mm	7,63 mm	862-112-18	862-112-22	1 Stück	861-112-00	10 Stück
45/35	13	0,12 mm	7,75 mm	862-113-18	862-113-22	1 Stück	861-113-00	10 Stück
45/35	14	0,12 mm	7,88 mm	862-114-18	862-114-22	1 Stück	861-114-00	10 Stück
45/35	15	0,12 mm	8,05 mm	862-115-18	862-115-22	1 Stück	861-115-00	10 Stück
45/35	16	0,12 mm	8,13 mm	862-116-18	862-116-22	1 Stück	861-116-00	10 Stück
45/35	17	0,12 mm	8,26 mm	862-117-18	862-117-22	1 Stück	861-117-00	10 Stück
45/35	18	0,12 mm	8,40 mm	862-118-18	862-118-22	1 Stück	861-118-00	10 Stück
45/35	19	0,12 mm	8,53 mm	862-119-18	862-119-22	1 Stück	861-119-00	10 Stück
45/35	20	0,12 mm	8,70 mm	862-120-18	862-120-22	1 Stück	861-120-00	10 Stück
45/35	21	0,12 mm	8,84 mm	862-121-18	862-121-22	1 Stück	861-121-00	10 Stück
45/35	22	0,12 mm	9,02 mm	862-122-18	862-122-22	1 Stück	861-122-00	10 Stück
45/35	23	0,12 mm	9,17 mm	862-123-18	862-123-22	1 Stück	861-123-00	10 Stück
45/35	24	0,12 mm	9,28 mm	862-124-18	862-124-22	1 Stück	861-124-00	10 Stück
45/35	25	0,12 mm	9,38 mm	862-125-18	862-125-22	1 Stück	861-125-00	10 Stück
45/35	26	0,12 mm	9,48 mm	862-126-18	862-126-22	1 Stück	861-126-00	10 Stück
45/35	27	0,12 mm	9,59 mm	862-127-18	862-127-22	1 Stück	861-127-00	10 Stück
45/35	28	0,12 mm	9,70 mm	862-128-18	862-128-22	1 Stück	861-128-00	10 Stück
45/35	29	0,12 mm	9,82 mm	862-129-18	862-129-22	1 Stück	861-129-00	10 Stück
45/35	30	0,12 mm	9,96 mm	862-130-18	862-130-22	1 Stück	861-130-00	10 Stück
45/35	31	0,12 mm	10,11 mm	862-131-18	862-131-22	1 Stück	861-131-00	10 Stück
45/35	32	0,12 mm	10,28 mm	862-132-18	862-132-22	1 Stück	861-132-00	10 Stück

¹⁾ beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-211-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

²⁾ beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-223-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

* The Dentaorium version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaorium imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer 1. und 2. Molarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
17-16/26-27	1	0,15 mm	7,94 mm				870-001-00	10 Stück
17-16/26-27	2	0,15 mm	8,06 mm				870-002-00	10 Stück
17-16/26-27	3	0,15 mm	8,18 mm				870-003-00	10 Stück
17-16/26-27	4	0,15 mm	8,30 mm				870-004-00	10 Stück
17-16/26-27	5	0,15 mm	8,42 mm				870-005-00	10 Stück
17-16/26-27	6	0,15 mm	8,54 mm				870-006-00	10 Stück
17-16/26-27	7	0,15 mm	8,66 mm				870-007-00	10 Stück
17-16/26-27	8	0,15 mm	8,78 mm				870-008-00	10 Stück
17-16/26-27	9	0,15 mm	8,90 mm				870-009-00	10 Stück
17-16/26-27	10	0,15 mm	9,02 mm				870-010-00	10 Stück
17-16/26-27	11	0,15 mm	9,14 mm				870-011-00	10 Stück
17-16/26-27	12	0,15 mm	9,26 mm				870-012-00	10 Stück
17-16/26-27	13	0,15 mm	9,38 mm				870-013-00	10 Stück
17-16/26-27	14	0,15 mm	9,50 mm				870-014-00	10 Stück
17-16/26-27	15	0,15 mm	9,62 mm				870-015-00	10 Stück
17-16/26-27	16	0,15 mm	9,74 mm				870-016-00	10 Stück
17-16/26-27	17	0,15 mm	9,86 mm				870-017-00	10 Stück
17-16/26-27	18	0,15 mm	9,98 mm				870-018-00	10 Stück
17-16/26-27	19	0,15 mm	10,10 mm				870-019-00	10 Stück
17-16/26-27	20	0,15 mm	10,22 mm				870-020-00	10 Stück
17-16/26-27	21	0,15 mm	10,34 mm				870-021-00	10 Stück
17-16/26-27	22	0,15 mm	10,46 mm				870-022-00	10 Stück
17-16/26-27	23	0,15 mm	10,58 mm				870-023-00	10 Stück
17-16/26-27	24	0,15 mm	10,70 mm				870-024-00	10 Stück
17-16/26-27	25	0,15 mm	10,82 mm				870-025-00	10 Stück
17-16/26-27	26	0,15 mm	10,94 mm				870-026-00	10 Stück
17-16/26-27	27	0,15 mm	11,06 mm				870-027-00	10 Stück
17-16/26-27	28	0,15 mm	11,18 mm				870-028-00	10 Stück
17-16/26-27	29	0,15 mm	11,30 mm				870-029-00	10 Stück
17-16/26-27	30	0,15 mm	11,42 mm				870-030-00	10 Stück
17-16/26-27	31	0,15 mm	11,54 mm				870-031-00	10 Stück
17-16/26-27	32	0,15 mm	11,66 mm				870-032-00	10 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer 1. und 2. Molarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47-46/36-37	1	0,15 mm	8,94 mm				871-001-00	10 Stück
47-46/36-37	2	0,15 mm	9,06 mm				871-002-00	10 Stück
47-46/36-37	3	0,15 mm	9,18 mm				871-003-00	10 Stück
47-46/36-37	4	0,15 mm	9,30 mm				871-004-00	10 Stück
47-46/36-37	5	0,15 mm	9,42 mm				871-005-00	10 Stück
47-46/36-37	6	0,15 mm	9,54 mm				871-006-00	10 Stück
47-46/36-37	7	0,15 mm	9,56 mm				871-007-00	10 Stück
47-46/36-37	8	0,15 mm	9,78 mm				871-008-00	10 Stück
47-46/36-37	9	0,15 mm	9,90 mm				871-009-00	10 Stück
47-46/36-37	10	0,15 mm	10,02 mm				871-010-00	10 Stück
47-46/36-37	11	0,15 mm	10,14 mm				871-011-00	10 Stück
47-46/36-37	12	0,15 mm	10,25 mm				871-012-00	10 Stück
47-46/36-37	13	0,15 mm	10,38 mm				871-013-00	10 Stück
47-46/36-37	14	0,15 mm	10,50 mm				871-014-00	10 Stück
47-46/36-37	15	0,15 mm	10,62 mm				871-015-00	10 Stück
47-46/36-37	16	0,15 mm	10,74 mm				871-016-00	10 Stück
47-46/36-37	17	0,15 mm	10,86 mm				871-017-00	10 Stück
47-46/36-37	18	0,15 mm	10,98 mm				871-018-00	10 Stück
47-46/36-37	19	0,15 mm	11,10 mm				871-019-00	10 Stück
47-46/36-37	20	0,15 mm	11,22 mm				871-020-00	10 Stück
47-46/36-37	21	0,15 mm	11,34 mm				871-021-00	10 Stück
47-46/36-37	22	0,15 mm	11,46 mm				871-022-00	10 Stück
47-46/36-37	23	0,15 mm	11,58 mm				871-023-00	10 Stück
47-46/36-37	24	0,15 mm	11,70 mm				871-024-00	10 Stück
47-46/36-37	25	0,15 mm	11,82 mm				871-025-00	10 Stück
47-46/36-37	26	0,15 mm	11,94 mm				871-026-00	10 Stück
47-46/36-37	27	0,15 mm	12,06 mm				871-027-00	10 Stück
47-46/36-37	28	0,15 mm	12,18 mm				871-028-00	10 Stück
47-46/36-37	29	0,15 mm	12,30 mm				871-029-00	10 Stück
47-46/36-37	30	0,15 mm	12,42 mm				871-030-00	10 Stück
47-46/36-37	31	0,15 mm	12,54 mm				871-031-00	10 Stück
47-46/36-37	32	0,15 mm	12,66 mm				871-032-00	10 Stück

* The Dentaorium version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaorium imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Oberkiefer Eckzahnbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
13/23	1	0,12 mm	7,10 mm				850-101-00	10 Stück
13/23	2	0,12 mm	7,20 mm				850-102-00	10 Stück
13/23	3	0,12 mm	7,30 mm				850-103-00	10 Stück
13/23	4	0,12 mm	7,50 mm				850-104-00	10 Stück
13/23	5	0,12 mm	7,60 mm				850-105-00	10 Stück
13/23	6	0,12 mm	7,80 mm				850-106-00	10 Stück
13/23	7	0,12 mm	7,90 mm				850-107-00	10 Stück
13/23	8	0,12 mm	8,00 mm				850-108-00	10 Stück
13/23	8,5	0,12 mm	8,10 mm				850-121-00	10 Stück
13/23	9	0,12 mm	8,20 mm				850-109-00	10 Stück
13/23	9,5	0,12 mm	8,30 mm				850-122-00	10 Stück
13/23	10	0,12 mm	8,40 mm				850-110-00	10 Stück
13/23	10,5	0,12 mm	8,50 mm				850-123-00	10 Stück
13/23	11	0,12 mm	8,60 mm				850-111-00	10 Stück
13/23	11,5	0,12 mm	8,70 mm				850-124-00	10 Stück
13/23	12	0,12 mm	8,80 mm				850-112-00	10 Stück
13/23	12,5	0,12 mm	8,90 mm				850-125-00	10 Stück
13/23	13	0,12 mm	9,10 mm				850-113-00	10 Stück
13/23	14	0,12 mm	9,20 mm				850-114-00	10 Stück
13/23	15	0,12 mm	9,40 mm				850-115-00	10 Stück
13/23	16	0,12 mm	9,50 mm				850-116-00	10 Stück
13/23	17	0,12 mm	9,80 mm				850-117-00	10 Stück
13/23	18	0,12 mm	9,90 mm				850-118-00	10 Stück
13/23	19	0,12 mm	10,00 mm				850-119-00	10 Stück
13/23	20	0,12 mm	10,10 mm				850-120-00	10 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

Unterkiefer Eckzahnbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißte		Menge	unbeschweißte	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
43/33	1	0,12 mm	6,20 mm				851-101-00	10 Stück
43/33	2	0,12 mm	6,30 mm				851-102-00	10 Stück
43/33	3	0,12 mm	6,50 mm				851-103-00	10 Stück
43/33	4	0,12 mm	6,60 mm				851-104-00	10 Stück
43/33	5	0,12 mm	6,80 mm				851-105-00	10 Stück
43/33	5,5	0,12 mm	6,90 mm				851-117-00	10 Stück
43/33	6	0,12 mm	7,00 mm				851-106-00	10 Stück
43/33	6,5	0,12 mm	7,10 mm				851-118-00	10 Stück
43/33	7	0,12 mm	7,20 mm				851-107-00	10 Stück
43/33	7,5	0,12 mm	7,30 mm				851-119-00	10 Stück
43/33	8	0,12 mm	7,40 mm				851-108-00	10 Stück
43/33	8,5	0,12 mm	7,50 mm				851-120-00	10 Stück
43/33	9	0,12 mm	7,60 mm				851-109-00	10 Stück
43/33	9,5	0,12 mm	7,80 mm				851-121-00	10 Stück
43/33	10	0,12 mm	7,90 mm				851-110-00	10 Stück
43/33	11	0,12 mm	8,00 mm				851-111-00	10 Stück
43/33	12	0,12 mm	8,20 mm				851-112-00	10 Stück
43/33	13	0,12 mm	8,30 mm				851-113-00	10 Stück
43/33	14	0,12 mm	8,40 mm				851-114-00	10 Stück
43/33	15	0,12 mm	8,60 mm				851-115-00	10 Stück
43/33	16	0,12 mm	8,70 mm				851-116-00	10 Stück

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

KUNDENSERVICE

+49 72 31 / 803 - Durchwahl

Festsitzende Technik - 550
Herausnehmbare Technik - 555
Customer Support Digital - 280
Auftragsannahme - 210

Faxbestellung 0800/4 14 24 34
(gebührenfrei aus Deutschland)



ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Stand der Information: 2023-10
Änderungen vorbehalten

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Telefon +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com