


compact megapuls



Die kompakte Hochfrequenzgießanlage.



Minimale Größe - maximale Leistung.

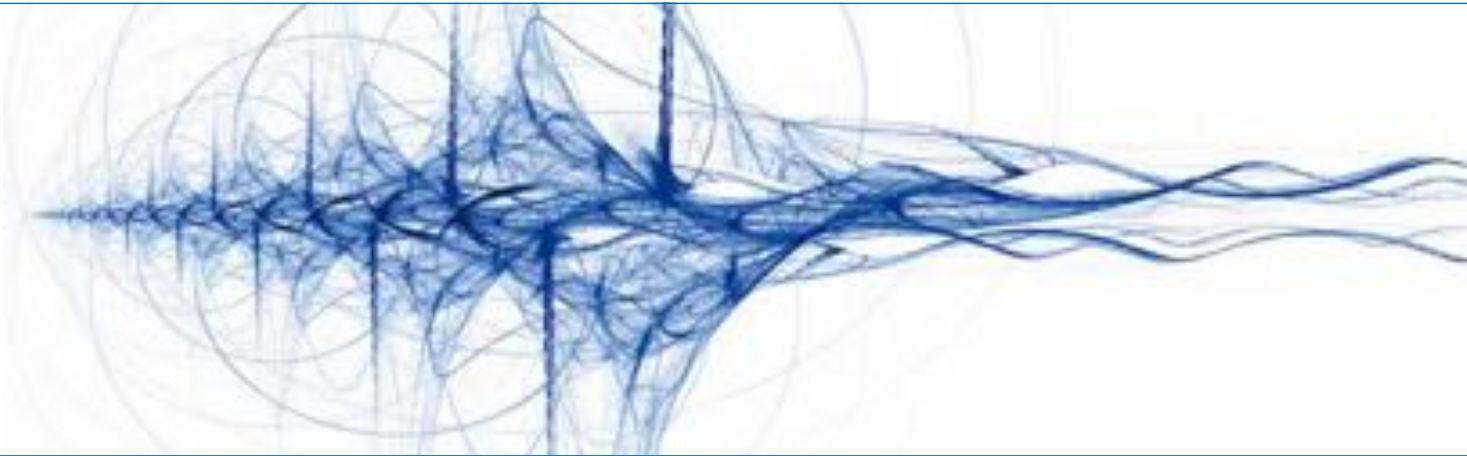


Die HF-Gießanlage megapuls compact ist eine extrem kompakte und robuste Schleudergießanlage, die trotz der kleinen Dimensionierung alle im zahntechnischen Labor anfallenden Gießaufgaben mit EM- und EMF-Legierungen verlässlich ausführt.

Die hohe Schleuderkraft garantiert selbst bei sehr graziilen Arbeiten perfekte Gussresultate. Abgerundet wird dies durch ein funktionelles Design, eine einfache Bedienbarkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Vorteile auf einen Blick

- Minimaler Platzbedarf
- Hohe Schleuderkraft
- Hohe Schmelzleistung mit kurzen Schmelzzyklen
- Einfachste Bedienung
- Stufenlose Regelung der Schmelzleistung
- Ausgereifte, moderne Halbleiter-Technologie
- Automatische Absenkung der HF-Spule
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

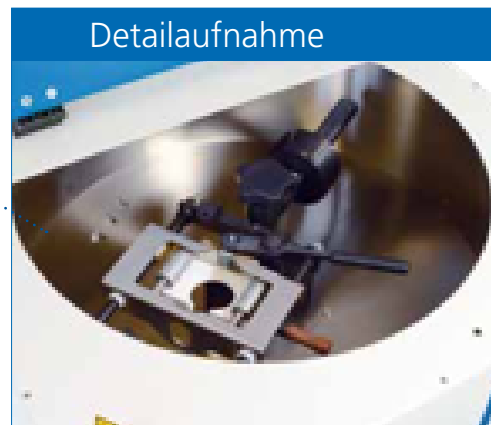

TECHNISCHE DATEN

megapuls compact	REF 090-620-00
Leistungsaufnahme	max. 2,4 kW mittel 1,5 kW
Elektr. Ausgangsleistung	max. 2,2 kW
Berührungsklasse	I
Anfahrtsmoment	0 ... 21 Nm
max. Schmelzmenge	100 g EM-Legierung 70 g EMF-Legierung (CoCr)
Gießfolge	bis zu 25 Güsse in Folge
Schmelztemperatur	max. 1750 °C
Abmessungen (B x H x T)	560 x 400 x 580 mm
Gewicht	55 kg
Netzanschluss	230 V, 50/60 Hz

Zubehör



Keramischer Schmelztiegel REF 090-611-00 für CoCr-, NiCr- und Pd-Legierungen

- Lange Haltbarkeit
- geringe Anhaftung von Metall und Schlacke



Graphittiegeleinsatz REF 090-615-00

- für Schmelztiegel REF 090-611-00
- zum Schmelzen von Edelmetall-Legierungen



Tisch mit Wasserumlauf REF 090-606-00

Ermöglicht den ökonomischen und umweltfreundlichen Betrieb der Schleudergießanlage mit Kühlwasser im Kreislauf. Gleichzeitig dient er als Unterstelltisch, um eine optimale Arbeitshöhe der Schleudergießanlage zu erreichen.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	220 W
Tankinhalt	20 l
Wasserförderung	9 l/min
max. Wasserdruck	3,3 bar
Umgebungstemperatur für Betrieb	15 – 40 °C
Lagertemperatur	5 – 40 °C
Abmessungen (B x H x T)	680 x 650 x 600 mm
Gewicht	35 kg
Netzanschluss	230 V, 50/60 Hz

Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Informationen zu Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.dentaurum.com
- ➔ Einfach und schnell bestellen im **Dentaurum Online-Shop** – auch mobil über die kostenlose Katalog-App
- ➔ Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: +49 72 31/803 - 470

Hotline Zahntechnik: +49 72 31/803 - 410 | Hotline Keramik: +49 72 31/803 - 410

Telefonische Auftragsannahme: +49 72 31/803 - 210 | Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0 800/4 14 24 34

Stand der Information: 05/16

Änderungen vorbehalten



www.dentaurum.com



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!

D
DENTAURUM