


discovery[®]
delight

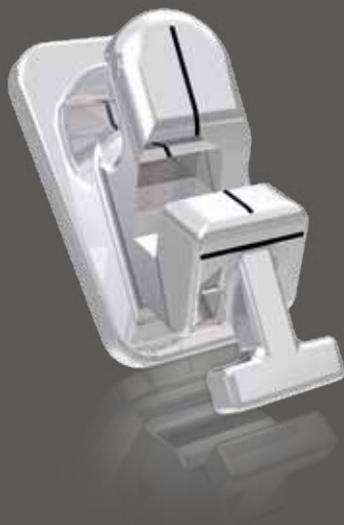

El sistema lingual
sorprendentemente diferente.

D
DENTAURUM

Rápido y efectivo.




Con los brackets **discovery® delight** se alcanza el compromiso de minimizar el número de materiales utilizados. Con este sistema se puede realizar todo tipo de tratamiento lingual tanto en 2D como en 3D.

En cooperación con el Prof. Dr. Rubens Demicheri, Montevideo, Dentaurum desarrolló un sistema lingual que cumple con los deseos de los pacientes y a la vez ofrece todas las ventajas de la renombrada familia de brackets **discovery®**:

- **calidad superior**
- **prácticamente invisible**
- **tratamiento corto**
- **alta comodidad**
- **diseño perfecto**



Práctico y sencillo.

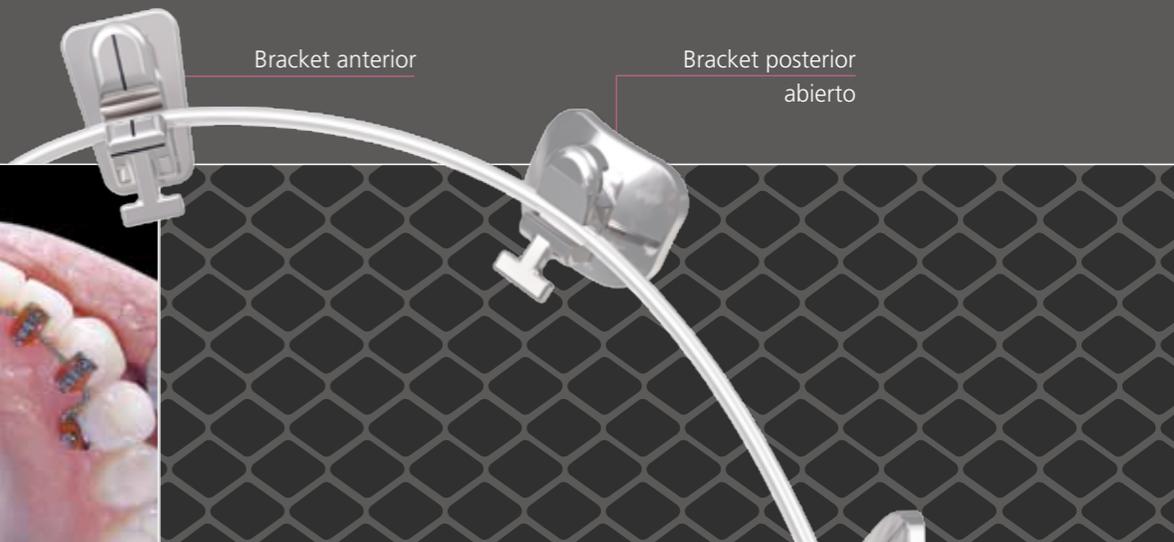

El componente principal del sistema **discovery® delight** es una línea de cuatro brackets linguales que se pueden utilizar tanto en la mandíbula como en el maxilar. Esto hace que su uso sea sencillo y eficiente.

Mediante la combinación de un slot vertical en los brackets anteriores y un slot horizontal en los brackets posteriores el sistema garantiza una óptima transmisión de fuerzas.

Una variedad de arcos e instrumentos completan el catálogo de productos de **discovery® delight**.

Bracket de una pieza

Alta biocompatibilidad

Base estructurada con láser

Buena retención

Óptimo diseño de aletas

Un ligado sencillo y seguro

Perfil bajo y estilizado

Máximo espacio para la lengua


Bracket posterior cerrado

Tubo molar



Flexible y versátil.



Diagnóstico	Pequeña malposición anterior (social six)	Ligero apiñamiento anterior sin rotación de los premolares	Grave apiñamiento anterior sin rotación de los premolares	Grave apiñamiento anterior con rotación de los premolares	Malposición del arco dental completo
Tratamiento	2D	2D	2D	3D	3D
Duración promedio de tratamiento	aprox. 6 meses	aprox. 12 meses	aprox. 6–24 meses	aprox. 6–24 meses	aprox. 6–24 meses

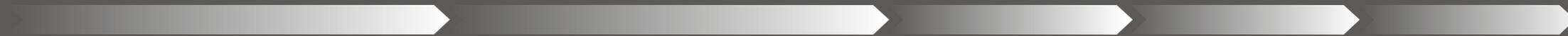

Sistema bien estructurado.

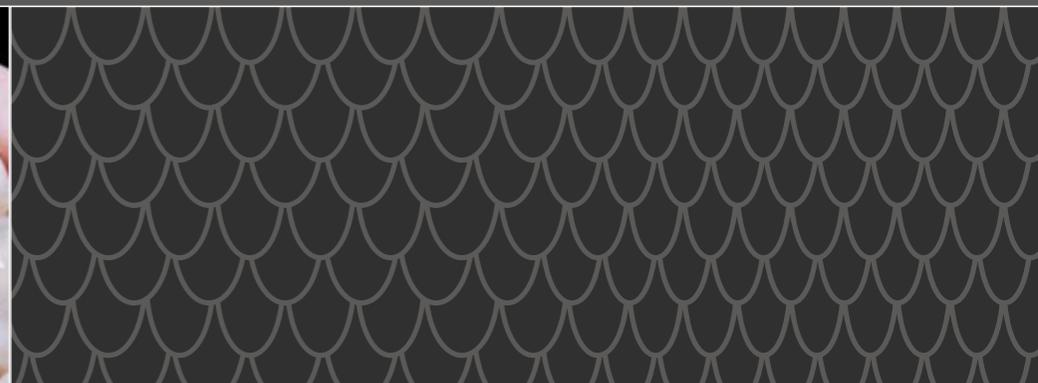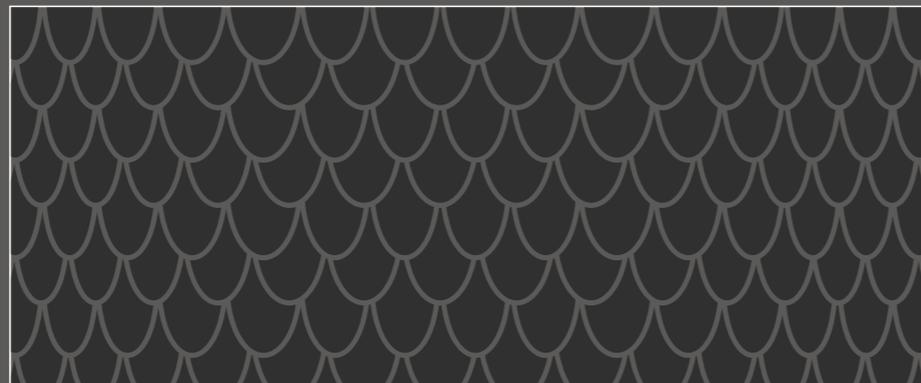

El todo es más que la suma de sus partes.
Aristóteles



Brackets linguales / Tubos linguales

- Bracket anterior 3 – 3 / maxilar – mandíbula
- Bracket posterior, abierto 4 – 5 / maxilar – mandíbula
- Bracket posterior, cerrado 4 – 5 / maxilar – mandíbula
- Tubo molar 6 / maxilar – mandíbula

Arcos linguales, redondos

- rematitan® LITE, \varnothing 10
- rematitan® LITE, \varnothing 12
- rematitan® LITE, \varnothing 14
- rematitan® LITE, \varnothing 16
- rematitan® LITE, \varnothing 18
- remanium®, \varnothing 16
- remanium®, \varnothing 18
- dentaflex®, \varnothing 15

Arcos linguales, rectangulares

- rematitan® LITE, \varnothing 16 x 16
- rematitan® LITE, \varnothing 19 x 19
- remanium®, \varnothing 18 x 18
- remanium®, \varnothing 19 x 19



Instrumentos

- Posicionador
- Espejo con líneas de ayuda
- Cortador de ligaduras
- Cortador distal
- Pinza

Gama polifacética.



Además del nuevo **discovery® delight** tiene a su disposición toda la familia de brackets **discovery®** los cuales ofrecen soluciones para una gran variedad de tratamientos y combinaciones.

¡Brackets para todo tipo de tratamiento!



Grupo Dentaaurum

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

➔ Descubra nuestros productos y servicios en www.dentaaurum.de

Fecha de la información: 05/15

Reservado el derecho de modificación



www.dentaaurum.de

Todas las imágenes clínicas por cortesía del Prof. Dr. Rubens Demicheri

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Alemania | Teléfono +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaaurum.de | info@dentaaurum.de