

Alicates e instrumentos
para todos los campos de aplicación.





Alicates Premium-Line

Calidad Premium – función Premium.

8

Alicates EQ-Line

Buenos alicates a precios favorables.

22

Instrumentos

Un amplio programa para la clínica de ortodoncia y el laboratorio.

28

Un programa que cubre todos los campos de aplicación.

Ya sea para la ortodoncia removible o fija, el programa de alicates de Dentaureum abarca todos los campos de aplicación. Esto significa para el usuario, poder recurrir a una calidad de confianza. Además no hay que ocuparse de los diferentes modos de empleo ni de prescripciones para la limpieza y cuidado de los alicates, haciendo así el empleo más rápido y eficaz.



Instrucciones ilustradas para la preparación
y el cuidado de alicates e instrumentos.





1
Utilice los alicates según las áreas de aplicación indicadas. Quite el grueso de la suciedad.



2a
Desinfecte por inmersión.



2a
Limpie con agua corriente y un cepillo blando de nylon.



2b
Limpie los alicates de forma mecánica.



5
Separe los instrumentos corroidos o dañados. Encargue afilado de alicates desafilados.



4
Seque los alicates, sobre todo el tornillo de conexión, con aire comprimido exento de aceite.



3
Lave los alicates, sobre todo el tornillo de conexión, con agua destilada.



6
Trate la conexión del alicate y los insertos de metal duro con aceite protector (REF 055-201-00).



7
Esterilice los alicates por vapor en posición abierta.

Limpieza, desinfección, secado.

Los alicates e instrumentos de Dentaaurum son apropiados para todos los tipos habituales de desinfección y de limpieza (baño de inmersión, ultrasonidos, desinfectante térmico).

No obstante, durante estos procesos se deberán tener en cuenta obligatoriamente los siguientes puntos: En caso de utilización de productos de desinfección químicos, tenga en cuenta que éstos deberán aplicarse siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, y respetando la concentración correcta. La preparación diaria del producto desinfectante es óptima para impedir la evaporación y el ensuciamiento. Debe cerciorarse la disolución completa del concentrado antes de la inmersión del instrumento, y debe tener en cuenta el tiempo máximo de inmersión (**nunca durante el fin de semana, nunca durante la noche**) y la temperatura (nunca superior a 25 °C).

En caso de limpieza manual, evite trabajar con objetos duros (raspador, cepillo metálico), ya que de lo contrario se destruirá la superficie de los instrumentos, incrementándose así el riesgo de oxidación. En caso de utilización de aparatos de limpieza por ultrasonido, debe prestar especial atención al periodo máximo de radiación.

Utilice una solución adecuada, no agresiva. Los productos químicos con contenido de ácido (en especial los disolventes para cemento) pueden destruir sus valiosos alicates e instrumentos. Los alicates y los instrumentos con puntas de insertos extraduras deben ser desinfectados en un producto químico especialmente suave, que contenga sustancias de protección contra la corrosión. Es recomendable el empleo de productos como p. ej. Sekusept de la compañía Henkel KGaA o GIGASEPT de la compañía Schülke & Mayr.

Atención: Inmediatamente después de la desinfección química y de la limpieza, es preciso eliminar exhaustivamente de los alicates e instrumentos todos los restos de productos químicos. Para ello debe procederse a un aclarado meticuloso con agua destilada (¡los instrumentos articulados deben estar siempre en estado abierto!).

Para la limpieza mecánica recomendamos utilizar un detergente enzimático que produzca poca espuma y tenga un valor pH neutral. El último lavado en la lavadora debe efectuarse con agua demineralizada. Para la limpieza manual recomendamos un detergente neutral o alcalino suave con un pH entre 7 y 10.

Importante: Utilice tan sólo agua destilada de alta calidad según la norma EN 285. Otras aguas pueden tener un contenido demasiado alto en silicatos, lo cual conduce a la aparición de manchas de color marrón amarillento en los instrumentos durante la esterilización. Si se prescinde del aclarado o enjuague posterior, durante la subsiguiente esterilización pueden aparecer tinciones y focos de oxidación. A continuación se procede al secado de los alicates y los instrumentos. La parte interior de las perforaciones requiere un secado exhaustivo (es recomendable el soplado con aire comprimido).

Desinfección térmica.

En caso de utilizar una termodesinfectadora, añada siempre la suficiente cantidad del producto químico previsto a tal fin, con objeto de neutralizar la acción agresiva del agua a elevadas temperaturas. Quite los instrumentos inmediatamente después de la limpieza, no los deje bajo ningún modo en un medio húmedo (riesgo de oxidación).

Limpieza y cuidado de los alicates y los instrumentos Dentauro Condiciones de garantía importantes

Tipo de lubricación.

Después del secado y antes de la esterilización deben ser tratados con aceite protector y de mantenimiento las articulaciones de los alicates, los bloqueos, las superficies deslizantes para resortes y otros puntos delicados. Un aceite de protección para las puntas con insertos super duras reduce el riesgo de oxidación. Recomendamos el aceite protector y de mantenimiento de Dentauro (REF 055-201-00).

Atención: En caso de esterilización por aire caliente, lubrique tan sólo la parte interior de las articulaciones, nunca lubrique las partes exteriores (riesgo de aparición de manchas).

Esterilización.

Importante: Introduzca en el esterilizador o el autoclave sólo aquellos alicates e instrumentos que hayan sido sometidos a limpieza y secado exhaustivos, libres de cualquier foco de oxidación. Introduzca los instrumentos articulados siempre abiertos. Si se esterilizan alicates o instrumentos oxidados junto con alicates o instrumentos intactos, puede producirse la formación de óxido fino, y la consiguiente destrucción del alicate o instrumento que se introdujo en buen estado. Es preciso extremar especialmente las precauciones si en la clínica hay alicates o instrumentos cromados; es por ello que todos los alicates e instrumentos Dentauro que se ofrecen para el ámbito de tratamiento están fabricados en acero inoxidable (excepto 012-523-00 y 044-177-00).

Los alicates e instrumentos no deben permanecer durante un lapso prolongado en un medio húmedo. La puerta del esterilizador debe abrirse inmediatamente después de la finalización del proceso de esterilización. En caso necesario, deben secarse los alicates e instrumentos empleando paños estériles. Si se utilizan bolsas de lámina plástica, debe observarse su correcta colocación dentro del esterilizador. Bajo ningún concepto la bolsa debe contener humedad remanente.

Esterilización por aire caliente.

Téngase en cuenta que, en caso de temperaturas de esterilización superiores a 180 °C, debe contarse con un **decremento de la dureza de las puntas de trabajo**, y con una **tinción de los alicates o de los instrumentos**, y de que los filos se vuelven romos con mayor rapidez. Riesgo de oxidación. Riesgo de oxidación.

Atención: En caso de esterilización por aire caliente, lubrique tan sólo la parte interior de las articulaciones, nunca lubrique las partes exteriores (riesgo de aparición de manchas).

Utilización de alicates e instrumentos nuevos.

Éstos deben ser limpiados meticulosamente antes del primer uso, para a continuación ser sometidos al ciclo completo de preparación. La funcionalidad de su alicate Dentauro y de su instrumento se conservará durante más tiempo si observa estas normas. El derecho de garantía expirará en caso de modificaciones o uso / mantenimiento inadecuado.

Nota: Para informaciones más detalladas sobre la preparación de alicates e instrumentos véa las Instrucciones de preparación de alicates e instrumentos (REF 989-590-40), p. ej. en www.dentauro.com.

PREMIUM-LINE



PREMIUM
LINE

¡10 años de garantía!

Made in Germany.

La fabricación realizada por personal especializado con muchos años de experiencia, con técnicas perfeccionadas y con la más moderna maquinaria, crean la buena calidad ya conocida como "Made in Germany". Por eso los alicates Premium-Line de Dentaureum son también de una duración de muchos años.

Servicio fiable.

Según el tipo de alicate Premium-Line que tiene puede enviarnos su alicate para su afilado o para nuevos insertos. Garantizamos un servicio de mantenimiento fiable y profesional a precio justo. Póngase en contacto con nosotros.



Cuidado simple.*

Los alicates Premium-Line de Dentaureum se prestan para todos los procesos de limpieza y desinfección convencionales, según las instrucciones de uso de los respectivos fabricantes. El engrase periódico de los alicates asegura una vida útil más larga. Para el cuidado óptimo de los alicates recomendamos el aceite protector y de cuidado de Dentaureum (REF 055-201-00).

10 años de garantía.**

Los alicates Premium-Line de Dentaureum cuentan con una garantía de 10 años. Para el usuario y el paciente esto significa máxima seguridad con mínimo riesgo.

* El cuidado apropiado es una condición importante de la garantía. Nuestras Instrucciones de preparación de alicates e instrumentos (REF 989-590-40) se hallan en www.dentaureum.com. Servicio de reparación en fábrica posible (por ejemplo, por desgaste).

**La garantía de 10 años incluye fallos de material y de producción, el desprendimiento de los insertos, fracturas y corrosión del cuerpo de alicate en condiciones normales de uso y con cuidado apropiado. Manipulaciones inapropiadas anulan la garantía.

PREMIUM-LINE




PREMIUM
LINE

¡10 años de garantía!



Alicates Nance para formar asas esterilizable

Con picos de cuatro escalones, para formar asas de varias longitudes con alambres redondos y rectangulares.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 000-001-00 1 pieza

CE



Alicates para doblar en la técnica lingual esterilizable

Para doblar escalonados y dobleces de compensación en los arcos para la técnica lingual.

Anchura de escalonados: 1,5; 2,0; 2,5 y 3,0 mm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-001-00 1 pieza

CE



Alicates Light Wire Jarabak esterilizable

Con surcos de guía.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-125-00 1 pieza

CE



Alicates Light Wire esterilizable

Para dobleces especialmente precisos de alambres en la técnica Light Wire.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-130-00 1 pieza

CE



Alicates Angle Standard para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con puntas cortas cónica y piramidal respectivamente.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-139-00 1 pieza

CE



Alicates para doblar barras Magnum esterilizable

Ideales para doblar los arcos exteriores de los arcos faciales.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,8 mm

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-180-01 1 pieza

CE



Alicates Premium-Line



Técnica fija.



Alicates para doblar barras esterilizable

Para hacer barras palatinas y linguales individuales. Los extremos de los alambres doblados con estos alicates se ajustan a todos los tubos de cierre linguales/palatinos $\varnothing 2 \times 0,9$ mm de Dentaureum.

Espesor o calibre máx. del alambre: $\varnothing 0,9$ mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-185-00 1 pieza

CE



Alicates Aderer de tres picos Extra-Mini esterilizable

Para doblar alambres/arcs en la técnica fija. Especialmente apropiados para doblar alambres/arcs de níquel-titanio como rematitan® LITE y Tensic®.

Espesor o calibre máx. del alambre:
 $\varnothing 0,5$ mm, duro, F 0,48 x 0,64 mm / 19 x 25

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-205-00 1 pieza

CE



Alicates acanalados Extra-Mini esterilizable

Ideales para doblar todo tipo de pliegues y asas, para adaptar arcos preformados en la técnica fija.

Espesor o calibre máx. del alambre: $\varnothing 0,5$ mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-350-00 1 pieza

CE



Alicates acanalados Mini esterilizable

Para hacer pliegues y asas con alambres redondos y rectangulares. Espesor o calibre máx. del alambre: $\varnothing 0,5$ mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-351-00 1 pieza

CE



Alicates Hammerhead esterilizable

Para doblar arcos y alambres de níquel-titanio en el sector de molares.

Ambas puntas se ajustan como ranura y resorte alrededor del alambre de níquel-titanio, de manera que en los extremos del alambre se consigue el doblez deseado con tan solo un pliegue.

Espesor o calibre máx. del alambre:
 $\varnothing 0,45$ mm / 18, $\square 0,41 \times 0,56$ mm / 16 x 22

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-355-00 1 pieza

CE



Alicates Angle / Tweed para doblar arcos esterilizable

Para la torsión (torque) de alambres rectangulares. Impide el aplastamiento del alambre, gracias a la sujeción paralela. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre:
 $\square 0,56 \times 0,70$ mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-442-00 1 pieza

CE

**Alicates De La Rosa para contornear
esterilizable**

Con surcos de guía para el contorneado de arcos redondos y rectangulares 16, 18, 22.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-109-00 1 pieza

CE



**Alicates Light Wire Begg
esterilizable**

Para dobleces especialmente precisas de alambres para la técnica Light Wire. Dispositivo de corte adicional. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-130-00 1 pieza

CE



**Alicates Angle para doblar alambres
esterilizable**

Modelo fuerte con puntas cortas cónica y piramidal respectivamente. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-139-00 1 pieza

CE



**Alicates Tweed para formar asas
esterilizable**

Para flexiones especialmente finas.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-350-00 1 pieza

CE



**Alicates Tweed para formar asas
esterilizable**

Para flexiones especialmente finas. Con punta de metal duro intercambiable individualmente.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-351-00 1 pieza

CE



**Punta
esterilizable**

Para alicates Tweed para formar asas REF 012-351-00.

REF 038-357-00 3 piezas

CE



Alicates Premium-Line



Técnica fija.



Alicates para quitar brackets esterilizable

Para el cizallamiento de brackets de cementado directo entre la base del bracket y el pegamento. Posibilidad de reafilado de los filos en fábrica.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-349-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Puntas de plástico esterilizable

Para alicates para quitar brackets REF 003-349-00 y 045-005-00.

REF 038-356-00	4 pieza
----------------	---------

CE



Alicates para quitar brackets, rectos esterilizable

Para el cizallamiento de brackets de cementado directo entre la base del bracket y el pegamento. Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilado de los filos en fábrica.

Longitud: 13,0 cm

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-346-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates para quitar brackets, acodados esterilizable

Para quitar brackets linguales y brackets con facilidad en el sector de posteriores. Insertos de metal duro. Posibilidad de reparación en fábrica.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-347-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates especiales para quitar brackets, acodados 45° esterilizable

Para quitar brackets de cementado directo y residuos de pegamento. 45° de angulación de las superficies de corte, afilado especial. Insertos de metal duro. Servicio de reparación en fábrica posible (por ejemplo, por desgaste)

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-350-00	1 pieza
----------------	---------

CE

Alicates Oliver-Jones para quitar bandas esterilizable

Con caperuza protectora de plástico intercambiable. Inserto de metal duro. Posibilidad de reafilarse en fábrica.

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 026-347-00 1 pieza

CE



Caperuzas de plástico esterilizable

Para alicates Oliver-Jones para quitar bandas REF 026-347-00 y 045-004-00.

REF 039-357-00 10 piezas

CE



Alicates How, acodados esterilizable

Estos alicates acodados son especialmente apropiados para el sector de posteriores.

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 003-111-00 1 pieza

CE



Alicates How, rectos esterilizable

Alicates de aplicación universal para la técnica de brackets. Gracias a sus puntas delgadas son especialmente apropiados para poner bandas con brackets presoldados. También apropiados para el sector mandibular de incisivos.

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 003-112-00 1 pieza

CE



Alicates universales Weingart esterilizable

Para la colocación del arco y para doblar los extremos del arco. Puntas estriadas de cierre exacto. Insertos de metal duro.

También apropiados para quitar brackets.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 003-120-00 1 pieza

CE



Alicates universales Weingart Mini esterilizable

Tipo muy fino. Para sujetar y posicionar el arco. Puntas estriadas de cierre exacto. No apropiados para quitar brackets.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 003-121-00 1 pieza

CE



Alicates de sujeción para Herbst TS / SUS² esterilizable

Para apretar anillos distanciadores de Herbst TS y SUS².

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 003-710-00 1 pieza

CE



Alicates Premium-Line



Técnica fija.



Alicates para convertir tubos bucales Ortho-Cast M-Series

esterilizable

Con cuchilla intercambiable.

¡Utilizar solo con los tubos bucales Ortho-Cast M-Series!

Suministro:

Alicates con cuchilla, 2 cuchillas de repuesto y 1 llave hexagonal interior

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-805-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Cuchillas

esterilizable

Para alicates para convertir tubos bucales Ortho-Cast M-Series,
REF 003-805-00.

REF 038-805-10	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates de sujeción

esterilizable

Picos con entalladura en forma de V para apretar tubos
de sujeción/deslizantes y tubos de tope.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-711-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Pinzas estira-elásticos

esterilizable

Para el estiramiento de los anillos separadores Dentalastics® antes de
colocarlos.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 015-160-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates de corte distal Maxi

esterilizable

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica de brackets.

Tipo fuerte. Dispositivo cogeealambres. Insertos de metal duro.

Posibilidad de reafilarse los filos en fábrica.

Longitud: 12 cm

Espesor o calibre máx. del alambre:

☒ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 años de garantía

	1 pieza
--	---------

CE



Alicates de corte distal Mini

esterilizable

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica de brackets.

Tipo grácil, fino. Dispositivo cogeealambres. Insertos de metal duro.

Posibilidad de reafilarse los filos en fábrica.

Longitud: 12 cm

Espesor o calibre máx. del alambre:

☒ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-701-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates de corte distal Mini

esterilizable

Con mangos más largos para una manipulación más fácil al acortar los

extremos de los arcos. Tipo grácil, fino. Dispositivo cogeealambres.

Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilarse los filos en fábrica.

Longitud: 14 cm

Espesor o calibre máx. del alambre:

☒ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-702-00	1 pieza
----------------	---------

CE

Flush Cutter Mini con anillo de silicona esterilizable

Para acortar alambres redondos en la técnica multibracket. Dispositivo cogealambres elástico por anillo de silicona, REF 037-356-00 Insertos de metal duro.

Longitud: 11 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,50 mm / 20

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 003-705-00 1 pieza

CE



Flush Cutter Maxi con anillo de silicona esterilizable

Con mangos más largos para una manipulación más fácil al acortar alambres redondos en la técnica multibracket. Dispositivo cogealambres elástico por anillo de silicona, REF 037-356-00. Insertos de metal duro.

Longitud: 14 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,50 mm / 20

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 003-706-00 1 pieza

CE



Anillos de silicona esterilizable

Para Flush Cutter Mini y Maxi, REF 003-705-00 y 003-706-00.

REF 037-356-00 10 piezas

CE



Alicates para cortar ligaduras Mini esterilizable

Los filos de cierre exacto hasta la punta garantizan un corte liso de los alambres de ligadura blandos. Insertos de metal duro. Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilear los filos en fábrica. ¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,4 mm, blando

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 014-151-00 1 pieza

CE



Alicates para cortar ligaduras 45° esterilizable

Superficie cortante acodada 45°. Facilita separar las ligaduras en posteriores. Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilear los filos en fábrica. ¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo

especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,4 mm, blando

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 014-152-00 1 pieza

CE



Alicates de corte lateral Medium esterilizable

Acabado DLC negro. Superficies de corte lisas, gracias a los bordes de corte exactos. Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilear los filos en fábrica. ¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo

especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line - 10 años de garantía

REF 016-153-00 1 pieza

CE



Alicates Premium-Line



Técnica removible.



Alicates acanalados Ruhland Magnum

Para doblar resortes Coffin, resortes de conexión, arcos labiales, asas en forma de U.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,1 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 001-650-00

1 pieza



Alicates acanalados Medium

Para doblar pequeños resortes, ojalillos o asas.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-053-00

1 pieza



Alicates Adams Maxi

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.

Longitud: 14,5 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-094-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Medium

Longitud: 12,5 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-200-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Mini

Longitud: 12,5 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-201-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Maxi

Tipo fuerte.

Longitud: 15,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-202-00

1 pieza

Alicates acanalados Maxi

Para doblar resortes, asas y mantenedores de espacio.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-233-00 1 pieza



Alicates universales para doblar alambres

Con puntas estriadas y con surcos de guía.
Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro,
que pueden ser cambiadas en fábrica.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-290-00 1 pieza



Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, interiormente lisos. **Con surcos de guía.**
Longitud: 12,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-514-00 1 pieza

NUEVO



Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro,
que pueden ser cambiadas en fábrica.
Longitud: 12,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-515-00 1 pieza



Alicates Adams Medium

Con picos cónico y piramidal, interiormente lisos.
Longitud: 14,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-516-00 1 pieza



Alicates Adams Maxi

Con picos cónico y piramidal, interiormente lisos.
Insertos de metal duro.
Longitud: 16,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-095-00 1 pieza



Alicates Premium-Line



Técnica removible.



Alicates de picos planos

Interior liso, con surcos de guía.

Insertos de metal duro. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-455-00

1 pieza



Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, interiormente lisos. Insertos de metal duro.

Con surco de guía.

Longitud: 12 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-515-00

1 pieza



Alicates Young para formar asas

Alicates universales para hacer asas de cualquier medida requerida.

Ideales para arcos labiales.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-074-00

1 pieza



Alicates para formar ganchos flecha

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-520-00

1 pieza




Alicates para doblar ganchos flecha

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-521-00

1 pieza

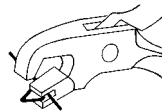

Alicates para doblar alambres Maxi

Alicates universales para doblar y cortar. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro

Corte hasta: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 013-522-00

1 pieza

Alicates de picos planos, anchos

Puntas estriadas. Con surco de guía.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 033-452-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates de picos planos

Interior liso, con surcos de guía. De picos finos.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 035-455-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates de corte lateral Maxi esterilizable

Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilar los filos en fábrica.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,0 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-266-00	1 pieza
----------------	---------

CE







Alicates para quitar brackets esterilizable

Para quitar brackets.

REF 045-005-00 1 pieza

CE



Puntas de plástico esterilizable

Para alicates para quitar brackets REF 003-349-00 y 045-005-00.

REF 038-356-00 4 piezas

CE



Alicates de corte distal esterilizable

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica de brackets.

Dispositivo cogearcambres. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre:

☐ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00 1 pieza

CE



Alicates de corte lateral Medium esterilizable

Para cortar alambres y arcos. Insertos de metal duro.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-022-00 1 pieza

CE



Alicates Oliver-Jones para quitar bandas esterilizable

Con caperuza protectora de plástico intercambiable.

REF 045-004-00 1 pieza

CE



Caperuzas de plástico esterilizable

Para alicates Oliver-Jones para quitar bandas REF 026-347-00 y 045-004-00.

REF 039-357-00 10 piezas

CE



Alicates How, rectos esterilizable

Alicates de aplicación universal para la técnica de brackets. Debido a las puntas delgadas salientes por un lado, estos alicates son apropiados también para la elaboración de bandas individuales para incisivos.

REF 045-006-00 1 pieza

CE



Alicates EQ-Line



Técnica fija.



Alicates Angle/Tweed para doblar arcos esterilizable

Para la torsión (torque) de alambres rectangulares. Impide el aplastamiento del alambre rectangular, gracias a la sujeción paralela.

Espesor o calibre máx. del alambre:

☒ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates universales Weingart esterilizable

Para la colocación del arco y para doblar los extremos de los arcos. Puntas estriadas de cierre exacto.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

REF 045-003-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Nance para formar asas esterilizable

Con picos de cuatro escalones, para formar asas de varias longitudes con alambres redondos y rectangulares.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro elástico

REF 045-010-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Light Wire Jarabak esterilizable

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro elástico

REF 045-009-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Tweed para formar asas esterilizable

Para flexiones especialmente finas.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

REF 045-001-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Angle para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con puntas cortas cónica y piramidal respectivamente.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-002-00	1 pieza
----------------	---------

CE

Alicates EQ-Line



Técnica removible.

Alicates acanalados Medium

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-012-00 1 pieza



Alicates acanalados Maxi

P. ej. para formar mantenedores de espacio.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

REF 045-013-00 1 pieza



Alicates acanalados Ruhland Magnum

Para doblar resortes Coffin, resortes de conexión,
arcos labiales, asas en forma de U.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,1 mm, duro

REF 045-014-00 1 pieza



Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Con surco de guía.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-015-00 1 pieza



Alicates Adams Maxi

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

REF 045-016-00 1 pieza



Alicates Adams Maxi

Con picos cónico y piramidal, interiormente lisos.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

REF 045-017-00 1 pieza



Alicates para doblar alambres Maxi

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro
Corte hasta: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-019-00 1 pieza



Alicates EQ-Line



Técnica removable.



Alicates de picos planos

Lisos, con surco de guía. De picos finos.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-018-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates Young para formar asas

Alicates universales para hacer asas de cualquier medida requerida. Ideales para arcos labiales.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-011-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates Aderer de tres picos Extra-Mini

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

REF 045-020-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates Aderer de tres picos Mini

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

REF 045-007-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates Aderer de tres picos Medium

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro

REF 045-008-00	1 pieza
----------------	---------

Alicates



Técnica removible / fija.

Cortafrios de palanca Magnum

Reducida aplicación de fuerza al cortar, gracias a la transmisión de la fuerza por palanca.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,3 mm, duro

REF 044-177-00

1 pieza



Instrumentos



Pinzas esterilizable

Para la colocación de los brackets. El extremo de la pinza permite dar angulación a los brackets. Hechas de una sola pieza, finas.

REF 025-277-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Pinzas esterilizable

Con lengüeta larga de colocación y para dar angulación. Para la colocación de los brackets. El extremo de las pinzas permite dar angulación a los brackets.

REF 025-276-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Pinzas esterilizable

Para posteriores. Especialmente apropiadas para colocar brackets y tubos bucales en los posteriores.

REF 025-279-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Pinzas esterilizable

Diseño de pinza especial para el posicionamiento sencillo de brackets y tubos bucales.

REF 025-280-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Instrumento para descementar discovery® pearl esterilizable

Para el descementado sencillo y seguro de brackets cerámicos discovery® pearl.

REF 019-001-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Instrumento sl, para discovery® sl esterilizable

Para abrir y cerrar los brackets autoligables discovery® sl (sistema Roth), **dynamique® m** y **dynamique® c** así como para ligar el arco con facilidad.

REF 023-276-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Instrumento sl, para discovery® sl 2.0 esterilizable

Para abrir y cerrar los brackets autoligables discovery® sl 2.0 (sistema McLaughlin-Bennett-Trevisi*), así como para ligar el arco con facilidad.

REF 023-277-00	1 pieza
----------------	---------

CE

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

**Instrumento scaler de doble extremo
esterilizable**

Para quitar restos de adhesivo y de cemento.
Con punta estriada para adaptar bandas.

REF 027-349-00	1 pieza
----------------	---------

CE



**Tiras de separar
esterilizable**

Para porta-tiras de stripping REF 018-000-00.

Anchura	Recubrimiento	REF	Cantidad
4 mm	bilateral	018-001-00	12 piezas
4 mm	unilateral	018-002-00	12 pieza

CE



Tijera

Para bandas delgadas de acero.

Versión	REF	Cantidad
recta	007-024-00	1 pieza
curva	008-025-00	1 pieza



Instrumentos



Adaptador de bandas molares, de plástico esterilizable hasta máx. 180 °C
Con punta triangular estriada de metal duro.

REF 026-355-00

1 pieza

CE



Adaptador de bandas molares según Mershon esterilizable

Con punta cuadrada estriada y mango anatómico para una buena transmisión de la fuerza al adaptar las bandas.

REF 024-300-01

1 pieza

CE



Espejo bucal (montado), lingual esterilizable

REF 023-279-00

1 pieza

CE



Espejo bucal (sin mango), lingual esterilizable

REF 023-279-10

1 pieza

CE

Portaagujas Medium

según Mathieu

esterilizable

Ideal para ligaduras. Muy manejable, modelo acreditado.
Puntas estriadas.

REF 000-030-00 1 pieza

CE



Portaagujas Medium, con anillo para el dedo

según Bachmann

esterilizable

Con el anillo digital bajo tracción constante se puede ligar con mayor rapidez y más facilidad. Apropiado también para férulas de fracturas. Puntas estriadas.

REF 000-035-00 1 pieza

CE



Portaagujas Mini

según Mathieu

esterilizable

Con puntas estriadas especialmente finas. Para ligaduras elastoméricas Dentalastics®. **No para ligaduras de alambre.**

REF 000-031-00 1 pieza

CE



Pinzas mosquito sin gancho

esterilizable

Pinzas portacoronas o para la colocación de ligaduras elastoméricas Dentalastics®.

REF 000-730-00 1 pieza

CE



Pinzas mosquito con gancho

esterilizable

Para la colocación de ligaduras elastoméricas Dentalastics®.

REF 000-731-00 1 pieza

CE



Pinzas mosquito, acodadas

esterilizable

Para colocar y ligar ligaduras elastoméricas Dentalastics®, especiales para la técnica lingual.

REF 000-732-00 1 pieza

CE



Instrumento de posicionamiento, lingual

esterilizable

REF 023-278-00 1 pieza

CE



Instrumentos y accesorios



Altímetro de estrella para brackets esterilizable

Para la medición de la altura entre el slot y el borde incisal al colocar bandas y brackets.
Con puntas metálicas.

REF 030-390-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Adaptador y tensor de ligaduras esterilizable

Para ligaduras preformadas largas, para torcer los extremos y adaptar.

REF 022-274-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Adaptador de ligaduras, de dos extremos esterilizable

Para doblar y adaptar ligaduras de alambre.

REF 021-273-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Doblador distal, de dos extremos

según Langer
esterilizable
Facilita el doblado seguro de los extremos del arco.
Mango ø: 8 mm

REF 019-000-00	1 pieza
----------------	---------

CE

Ligador esterilizable

Para ligar rápidamente todo el arco dentario y ligaduras en forma de 8. La punta en forma de Y facilita el torcimiento de la ligadura. Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,3 mm, blando

REF 023-292-00	1 pieza
----------------	---------

CE

NUEVO



Accesorios para ligador (REF 023-292-00) esterilizable

Pieza de recambio	REF	Cantidad
Punta	023-293-00	1 pieza
Bobina	023-294-00	1 pieza
Tornillo	023-295-00	1 pieza

CE

NUEVO



Aceite protector y de cuidado de alicates e instrumentos

Para el cuidado de alicates e instrumentos. Utilización especialmente antes de la esterilización.

REF 055-201-00	50 ml
----------------	-------



Soporte combinado para alicates y alambres

Material: Metacrilato

Con 6 tubos para alambres en barras.

No apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

Color: transparente, claro

Altura: aprox. 13 cm

Anchura: aprox. 18 cm

REF 055-101-01	1 pieza
----------------	---------



Soporte porta-alicates

No apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

apropiado para	Material	Color	Longitud	REF	Cantidad
aprox. 7 alicates	Metacrilato	transparente, claro	13,0 cm	055-000-00	1 pieza
aprox. 14 alicates	Metacrilato	transparente, claro	25,0 cm	055-100-00	1 pieza



Servicio



Hay muchas razones para utilizar productos de Dentaurem en la clínica o en el laboratorio. Un criterio decisivo es la calidad de nuestros productos, pero lo que realmente marca la diferencia es nuestro servicio.

Las necesidades de nuestros clientes son nuestra prioridad. Cumplir con ellas siempre ha sido una parte esencial de nuestra filosofía de empresa.

Le damos una gran importancia a poder reaccionar a tiempo a los cambios de demanda y ofrecer excelentes servicios para mantener relaciones fiables y duraderas con nuestros clientes.

Nuestros clientes valoran la calidad de nuestros productos, nuestra fiabilidad y nuestra gama de servicios extraordinaria, que seguimos desarrollando y ampliando continuamente.

Dentaurum

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



Fecha de la información: 2022-11
Reservado el derecho de modificación



Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Alemania | Teléfono +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com