

# HERBST



Bielas de retención  
Seguras. Acreditadas. Eficaces.



## Nuestras bielas de Herbst de un vistazo.




*La corrección clásica de la oclusión distal.*

El programa de Dentaureum dispone de 4 versiones de la biela de retención acreditada de Herbst. Todas tienen en común el excelente acabado de sus componentes. Aun en casos de elevados niveles de carga, Dentaureum ofrece las garantías de seguridad suficientes para efectuar una terapia eficaz. Gracias a la fijación directa sobre los dientes, el aparato actúa las 24 horas del día sin la participación del paciente, alcanzando así visibles resultados al cabo de poco tiempo.



### Herbst I – la clásica.

La biela Herbst I es la versión clásica para soldar sobre bandas o férulas coladas. Según la experiencia del profesional y el objetivo del tratamiento se puede usar la aparatología de Herbst para la técnica de bandas o la técnica de colado.

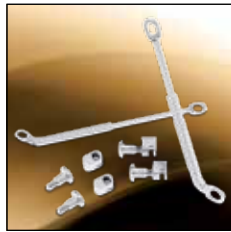


### Herbst II – la modificada.

La biela clásica ha sido modificada para que se pueda fijar de forma rápida y sencilla con un tornillo sobre el arco de un aparato multibrackets. Así se puede acoplar Herbst II a un aparato ya en uso.



### Herbst IV – la cómoda.

La articulación esférica ofrece más flexibilidad lateral para el paciente, aumentando así notablemente la comodidad del aparato. Clips en forma de C fijan la biela sobre la base. Por ello no es necesario fijar la biela con tornillos.

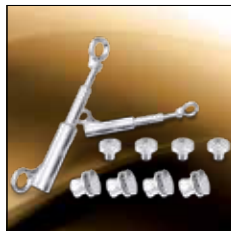

### Herbst TS – la compacta.

Herbst TS dispone de un telescopio interior. Gracias a su diseño compacto, Herbst TS es la solución ideal para maxilares pequeños. De este modo, se impide que la biela se desmonte (p. ej., en caso de amplia abertura de la boca).

Las ventajas de un vistazo.



Set Herbst I (REF 607-120-00)  
sobre bandas

Tornillos hexagonales interiores  
para Herbst I / Herbst TS  
(REF 607-122-30)



Casquillos F (forma cóncava)  
para Herbst I / Herbst TS  
(REF 607-127-30)



Llave hexagonal interior para Herbst I / II / TS  
que facilita el trabajo en la boca del paciente.  
(REF 607-144-00)

### Terapia rápida.

En general se alcanza una oclusión normal dentro de 6 a 8 meses. Lo mejor es comenzar el tratamiento en pleno crecimiento puberal. El período de retención mediante un aparato removible también es breve.

*Rápida. Segura. Ahorra tiempo.*

# HERBST II

Anillos distanciadores para  
Herbst I / II / IV (longitud 1 - 5 mm)  
(REF 607-103-00, 1 mm)



Tornillos hexagonales interiores  
con mango largo (REF 607-108-20) y  
tuercas para Herbst II (REF 607-111-00)



Set Herbst II (REF 607-108-00)  
sobre arco remanium®  
rectangular

## Terapia segura.

Sobre todo pacientes de poca cooperación benefician de este aparato fijo, ya que actúa las 24 horas del día sin participación activa del paciente.

## Terapia global que ahorra tiempo.

La combinación entre la biela de Herbst y la técnica multibrackets le permite efectuar diferentes pasos de tratamiento de forma paralela. Esto le ahorra tiempo y dinero.

Un programa para las más altas exigencias.

# HERBST IV



Set Herbst IV (REF 607-115-00)  
sobre bandas



Tubo telescópico con articulación  
esférica (REF 607-125-00)

Casquillos para Herbst IV  
(REF 607-118-00)



Arandelas de seguridad (clips en  
forma de C) para Herbst IV  
(REF 607-160-00)

## Terapia exacta.

Gracias a la preparación extraoral sobre el modelo, es posible determinar la oclusión deseada de forma óptima y muy precisa. Hecho que no solo es muy cómodo para el profesional, sino que también produce resultados incomparables en precisión.

## Terapia eficaz.

Las bielas de retención de Herbst se pueden usar también en casos de oclusiones asimétricas. Esto no solo acelera el tratamiento, sino que también lo hace más eficaz. Además amplía la gama de indicaciones.

*Exacta. Eficaz. Completa.*

# HERBST TS

Tornillos hexagonales interiores y casquillos para Herbst I / Herbst TS (REF 607-122-30 sin casquillo)



Casquillos F (forma cóncava) para Herbst I / Herbst TS (REF 607-127-30)



Set Herbst TS, 22 mm (REF 607-126-22) sobre bandas



Anillos distanciadores (hendidos) (longitud 1 - 4 mm) para Herbst TS (REF 607-103-11, 1 mm)

## Anillos distanciadores (hendidos)

Para todas las bielas de retención Herbst de Dentaurum están disponibles anillos distanciadores de diferentes longitudes. Con ellos los aparatos se pueden activar según sea necesario de forma rápida, sencilla y segura.

## Gama completa.

Para cada versión de las bielas de retención Herbst de Dentaurum están disponibles accesorios pre-parados adecuados. Esto agiliza el trabajo y facilita la elaboración de aparatos individuales. Además siempre tendrá a mano el instrumental correcto.

# Grupo Dentaureum

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

➔ Descubra nuestros productos y servicios en [www.dentaureum.com](http://www.dentaureum.com)

Fecha de la información: 10/17

Reservado el derecho de modificación



[www.dentaureum.com](http://www.dentaureum.com)



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

**D**  
DENTAURUM