



## Instructions pour le conditionnement des bagues Dentaurum

Ces instructions sont valables pour toutes les bagues Dentaurum  
bénéficiant d'une autorisation d'usage chez le patient.

Ces instructions sont conformes aux critères prescrits par la norme DIN EN ISO 17664:2018  
et aux directives de l'Institut Robert Koch.

# Prescriptions générales


Toutes les bagues doivent être nettoyées, désinfectées et stérilisées, si nécessaire. Ceci est également valable pour la toute première utilisation après la livraison. En général, les bagues sont livrées non stériles. Un nettoyage et une désinfection bien menés sont un préalable essentiel à toute stérilisation efficace.

Veillez, au moment de l'utilisation, à collecter séparément les bagues souillées et à ne pas les redéposer dans le coffret, afin d'éviter une forte contamination de celui-ci une fois qu'il a été garni. Nettoyez/désinfectez les bagues souillées et remettez-les dans le coffret ou stérilisez les bagues par la suite.

Ces instructions décrivent le tout premier conditionnement des bagues ainsi que le reconditionnement de celles que le patient a essayées mais que l'on n'a pas scellées.

**Le conditionnement des bagues scellées (recyclage) n'est pas autorisé !**

## Pré-nettoyage manuel

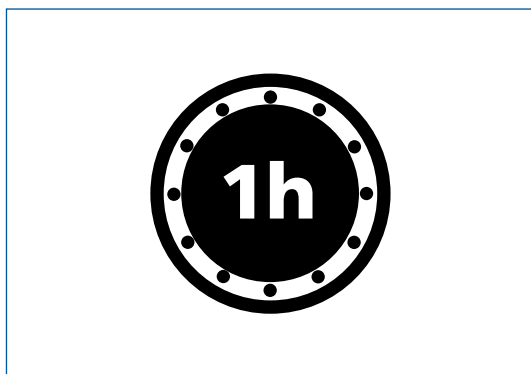


Enlevez les souillures grossières se trouvant sur les bagues directement après l'utilisation, au plus tard une heure après.

Rincez les bagues à l'eau courante et déposez-les dans une solution désinfectante.

Pour l'élimination manuelle des souillures, utilisez uniquement une brosse douce (brosse en nylon) ou un chiffon propre.

N'utilisez pas de brosse en métal ou de la laine d'acier.

Le produit désinfectant doit être exempt d'aldéhydes (sinon risque de fixation de traces de sang), avoir une efficacité reconnue (p. ex. par la DGHM : Société allemande pour l'hygiène et la microbiologie ou par la FDA ou porter le marquage CE), il doit avoir été conçu pour la désinfection des bagues et être compatible avec ces dernières.

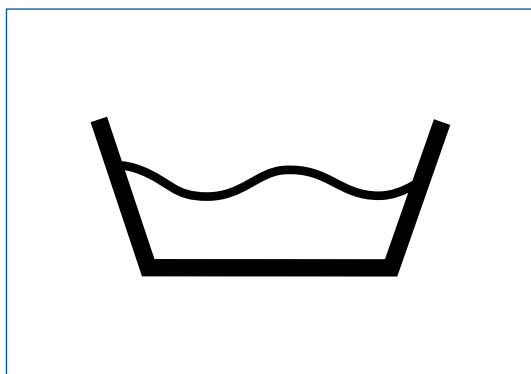

## Nettoyage en machine / désinfection


### **Veillez tenir compte des points suivants lors de l'utilisation du désinfecteur :**


- le désinfecteur présente une efficacité reconnue (p. ex. DGHM ou FDA ou marquage CE conformément à la norme DIN EN ISO 15883),
- un programme éprouvé pour la désinfection thermique (au moins 5 min à 90°C ou valeur A0 > 3000) doit être mis en œuvre dans la mesure du possible (lors de la désinfection, le danger subsiste de voir persister des traces du produit désinfectant sur les bagues),
- lors du rinçage, stricte utilisation d'une eau stérile ou pauvre en germes (max. 10 germes/ml) avec un taux d'entotoxines de max. 0,25/ml (p. ex. eau purifiée/hautement purifiée) et
- l'air utilisé pendant le séchage doit être filtré.

### **Veillez tenir compte des points suivants lors du choix des produits de nettoyage :**

- ces derniers doivent être adaptés au nettoyage des bagues en métal ou en plastique,
- dès lors qu'aucune désinfection thermique n'est effectuée, utilisez, en outre, un produit désinfectant adapté et dont l'efficacité a été reconnue (p. ex. par la DGHM ou la FDA ou par le marquage CE). Le produit désinfectant doit être compatible avec le produit de nettoyage,
- les agents chimiques mis en œuvre doivent être compatibles avec les bagues (voir le chapitre sur la résistance des matériaux).


**Il faut également respecter les concentrations prescrites par le fabricant du produit de nettoyage et du produit désinfectant.**

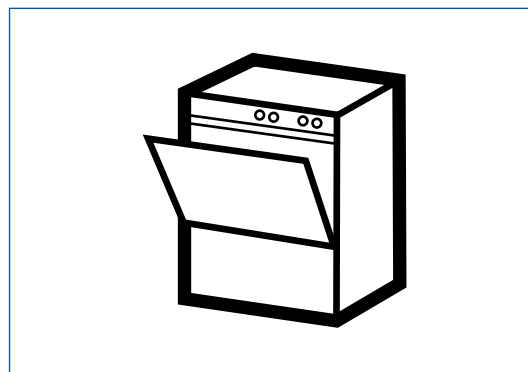

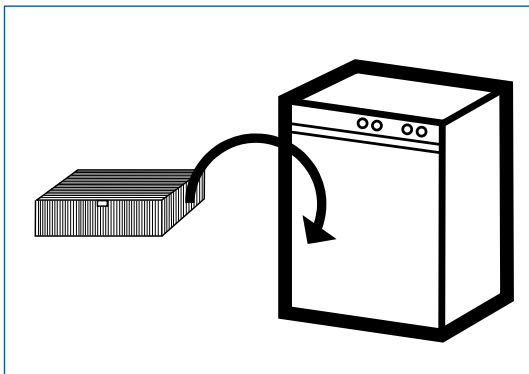

### Procédure

- ❶ Déposez les bagues dans une cassette de nettoyage (tamis verrouillable) appropriée et placez cette dernière dans le désinfecteur.
- ❷ Démarrez le programme.
- ❸ A la fin du programme, retirez les bagues du désinfecteur.
- ❹ Contrôlez et emballez les bagues, dans la mesure du possible, dès le retrait, sans attendre.
- ❺ **Si l'appareil ne dispose pas d'un programme de séchage automatique, laissez sa porte ouverte afin de faire sécher les bagues.**

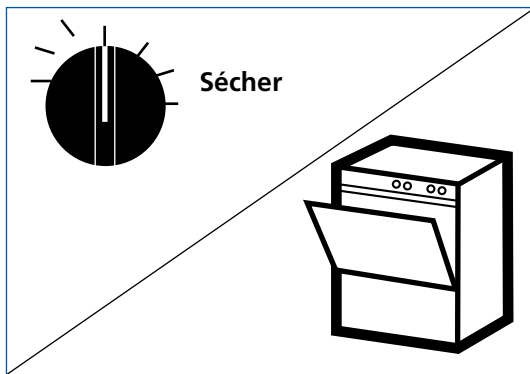

Un laboratoire d'essais agréé et indépendant a prouvé l'aptitude fondamentale au nettoyage et à la désinfection en machine en utilisant le désinfecteur G 7836 CD (désinfection thermique, Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh, Allemagne) et le produit de nettoyage neodisher® Medizym (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hambourg, Allemagne). La procédure décrite précédemment a été prise en compte.

## Nettoyage manuel et désinfection

### Lors du choix des produits de nettoyage et de désinfection, tenez compte des points suivants :

- les bagues doivent se prêter au nettoyage et à la désinfection.
- le produit de nettoyage doit être adapté au nettoyage dans un bac à ultrasons.
- ne mettez en œuvre que des produits désinfectants dont l'efficacité a été reconnue (p. ex. par la DGHM ou la FDA ou le marquage CE). Ces derniers doivent être compatibles avec les produits de nettoyage utilisés.

Évitez, dans la mesure du possible, d'utiliser des produits deux en un pour le nettoyage et la désinfection. Ce n'est qu'en présence d'une faible contamination (absence de souillures visibles) qu'il est possible d'utiliser des produits de nettoyage et de désinfection deux en un.


Les concentrations ainsi que les délais d'action préconisés par le fabricant des produits de nettoyage et de désinfection doivent être impérativement respectés. N'utilisez que des solutions fraîchement préparées, de l'eau stérile ou pauvre en germes (max. 10 germes/ml), avec un taux d'endotoxines de max. 0,25/ml (p. ex. de l'eau purifiée/hautement purifiée) ou uniquement de l'air filtré pour le séchage.

### Procédure de nettoyage

- 1 Déposez les bagues dans un bain de nettoyage, s'il y a lieu, dans une cassette de nettoyage appropriée en respectant le délai d'action recommandé et en veillant à ce qu'elles soient immergées. Ayez recours, s'il y a lieu, à des ultrasons ou brossez délicatement les bagues à l'aide d'une brosse douce. Rincez toutes les cavités des bagues/pièces à souder, avant et après le délai d'action, en vous servant d'une seringue à usage unique (volume minimum 5 ml).
- 2 Sortez les bagues du bain de nettoyage et rincez-les soigneusement à l'eau.
- 3 **Vérifiez si les bagues ont été bien nettoyées.**

### Procédure de désinfection


- 1 Déposez les bagues dans un bain de nettoyage, s'il y a lieu, dans une cassette de nettoyage appropriée en respectant le délai d'action préconisé et en veillant à ce qu'elles soient immergées. Rincez toutes les cavités des bagues/pièces à souder, avant et après le délai d'action, en vous servant d'une seringue à usage unique (volume minimum 5 ml).
- 2 Sortez les bagues du bain de nettoyage et rincez-les soigneusement à l'eau au moins trois fois.
- 3 N'emballez les bagues que lorsqu'elles sont sèches. Emballez, sans attendre, les bagues sèches.

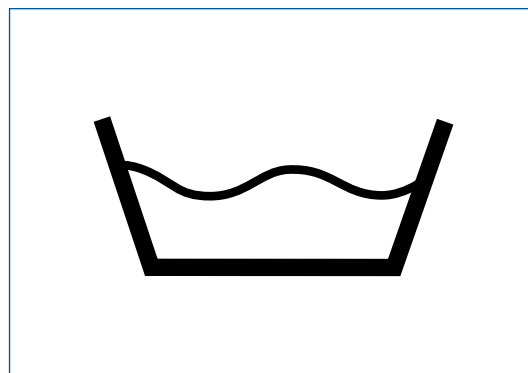

Un laboratoire d'essais agréé et indépendant a reconnu l'aptitude fondamentale au nettoyage manuel et à la désinfection en utilisant le produit de nettoyage Bodedex® forte et le produit désinfectant Korsolex® plus (Bode Chemie, Hambourg, Allemagne). La procédure décrite précédemment a été prise en compte.

## Inspection

Après le nettoyage ou le nettoyage/la désinfection, vérifiez l'absence de corrosion, de dommages et de souillures. Mettez à part les bagues endommagées. Les bagues encore souillées doivent être à nouveau nettoyées et désinfectées.

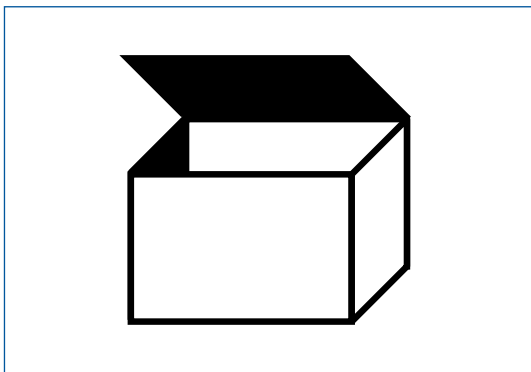

**Emballez les bagues ou les plateaux de stérilisation dans des emballages de stérilisation à usage unique (emballage simple ou double) et/ou dans un container de stérilisation répondant aux normes suivantes :**


- DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/2 (ancien : DIN EN 868/ANSI AAMI ISO 11607)
- se prêtant à la stérilisation à la vapeur (résistance thermique d'au moins 134 °C, (273 °F), suffisamment de perméabilité à la vapeur)
- protégeant suffisamment les bagues ou les emballages de stérilisation contre les dommages mécaniques
- bénéficiant d'une maintenance régulière conformément aux recommandations du fabricant (container de stérilisation)

## Stérilisation

Pour la stérilisation, n'utilisez que les procédés de stérilisation ci-après. Tous les autres procédés de stérilisation ne sont pas adéquats. La stérilisation ultra-rapide n'est pas autorisée. N'ayez pas non plus recours à la stérilisation à l'air chaud ni à la stérilisation par rayonnement ; pas de stérilisation au formaldéhyde ou à l'oxyde d'éthylène ; pas de stérilisation au plasma.

### Stérilisation à la vapeur


- procédé à vide fractionné ou stérilisation à la vapeur par gravité\*<sup>1</sup> (avec un séchage suffisant du produit)
- stérilisation conformément à la norme DIN EN 13060 ou DIN EN 285
- norme DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (ancien : DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134) (validée en commission et par l'analyse du rendement spécifique)
- température maximale de stérilisation (134 °C) ; augmentée de la tolérance conformément à la norme DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (ancien : DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134)
- temps de stérilisation (temps d'exposition à la température de stérilisation) au moins 5 min à 134 °C (273 °F)

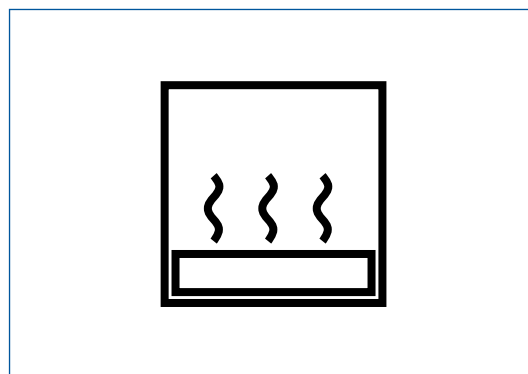

Un laboratoire d'essais agréé et indépendant a reconnu l'aptitude fondamentale à la stérilisation à la vapeur en utilisant l'autoclave EuroSelectomat (MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH, Planegg, Allemagne), le procédé à vide fractionné ainsi que l'autoclave Systec V-150 (Systec GmbH Labor-Systemtechnik, Wettenberg, Allemagne) et le procédé de gravitation. La procédure décrite précédemment a été prise en compte.

\*<sup>1</sup> Le recours au procédé par gravitation, jugé moins efficace, n'est autorisé que lorsque l'usage du procédé à vide fractionné n'est pas possible.

## Stockage

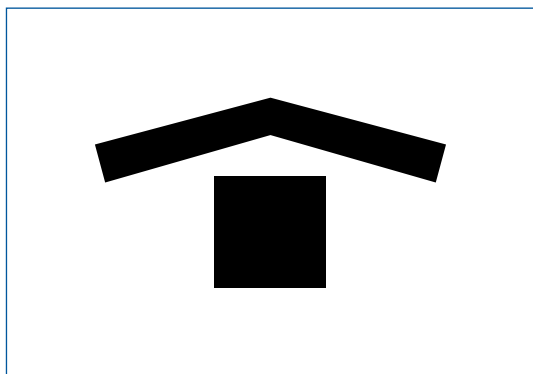

Après la stérilisation, les bagues doivent être stockées dans l'emballage de stérilisation au sec et à l'abri de la poussière.

## Résistance du matériel

**Lors du choix des produits de nettoyage et de désinfection, vérifiez l'absence des éléments suivants :**

- acides organiques, minéraux et oxydants (PH neutre maximum autorisé : 9,5, produit de nettoyage neutre/enzymatique recommandé)
- bases fortes
- solvants organiques (p. ex. alcool, éther, cétone, benzène)
- agents oxydants (p. ex. le peroxyde d'hydrogène)
- halogènes (chlore, iode, brome)
- hydrocarbures aromatiques/halogénés
- sels de métaux lourds

Il ne faut pas nettoyer les bagues avec des brosses en métal ou de la laine d'acier. Evitez d'exposer les bagues et cassettes de stérilisation à des températures de plus de 134 °C (273 °F) !



## Reconditionnement

On peut utiliser les bagues jusqu'à 5 fois si elles ne sont pas endommagées et si les les précautions d'usage nécessaires sont respectées. Toute réutilisation au-delà de ce seuil ou l'utilisation de bagues endommagées et/ou souillées n'engage que la responsabilité de l'utilisateur.

**Ceci ne concerne que les bagues qui le patient a essayées mais que l'on n'a pas scellées. Le conditionnement des bagues scellées (recyclage) n'est pas autorisé !**

# Aperçu des bagues

Dans cet aperçu sont répertoriées toutes les bagues bénéficiant d'une autorisation d'usage chez le patient. Respectez, sauf indication contraire, les indications relatives au conditionnement. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com) ou consultez notre catalogue d'orthodontie.

## dentaform® Snap / Assortiments

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoires à bagues REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères molaires

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
16	N° 5-36 (2)	878-364-18	878-364-22	878-064-00	64 pièces
26	N° 5-36 (2)	879-364-18	879-364-22	879-064-00	64 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
16	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	878-350-18	878-350-22	878-150-00	150 pièces
26	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	879-350-18	879-350-22	879-150-00	150 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> (16) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10  
<sup>2)</sup> (26) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10  
<sup>3)</sup> (16) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10  
<sup>4)</sup> (26) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

### Mandibule, bagues 1ères molaires

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
46	N° 5-36 (2)	880-364-18	880-364-22	880-264-00	64 pièces
36	N° 5-36 (2)	881-364-18	881-364-22	881-264-00	64 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
46	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	880-350-18	880-350-22	880-250-00	150 pièces
36	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	881-350-18	881-350-22	881-250-00	150 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> (46) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10  
<sup>2)</sup> (36) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10  
<sup>3)</sup> (46) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10  
<sup>4)</sup> (36) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00)

**Maxillaire, bagues 1ères molaires, droite**

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>			
							REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	878-301-18	878-301-22	1 pièce	878-001-00	10 pièces
16	2	0,12 mm	8,89 mm	878-302-18	878-302-22	1 pièce	878-002-00	10 pièces
16	3	0,12 mm	8,99 mm	878-303-18	878-303-22	1 pièce	878-003-00	10 pièces
16	4	0,12 mm	9,09 mm	878-304-18	878-304-22	1 pièce	878-004-00	10 pièces
16	5	0,12 mm	9,20 mm	878-305-18	878-305-22	1 pièce	878-005-00	10 pièces
16	6	0,12 mm	9,30 mm	878-306-18	878-306-22	1 pièce	878-006-00	10 pièces
16	7	0,12 mm	9,40 mm	878-307-18	878-307-22	1 pièce	878-007-00	10 pièces
16	8	0,12 mm	9,50 mm	878-308-18	878-308-22	1 pièce	878-008-00	10 pièces
16	9	0,15 mm	9,61 mm	878-309-18	878-309-22	1 pièce	878-009-00	10 pièces
16	10	0,15 mm	9,71 mm	878-310-18	878-310-22	1 pièce	878-010-00	10 pièces
16	11	0,15 mm	9,81 mm	878-311-18	878-311-22	1 pièce	878-011-00	10 pièces
16	12	0,15 mm	9,92 mm	878-312-18	878-312-22	1 pièce	878-012-00	10 pièces
16	13	0,15 mm	10,02 mm	878-313-18	878-313-22	1 pièce	878-013-00	10 pièces
16	14	0,15 mm	10,12 mm	878-314-18	878-314-22	1 pièce	878-014-00	10 pièces
16	15	0,15 mm	10,23 mm	878-315-18	878-315-22	1 pièce	878-015-00	10 pièces
16	16	0,15 mm	10,33 mm	878-316-18	878-316-22	1 pièce	878-016-00	10 pièces
16	17	0,15 mm	10,43 mm	878-317-18	878-317-22	1 pièce	878-017-00	10 pièces
16	18	0,15 mm	10,54 mm	878-318-18	878-318-22	1 pièce	878-018-00	10 pièces
16	19	0,15 mm	10,64 mm	878-319-18	878-319-22	1 pièce	878-019-00	10 pièces
16	20	0,15 mm	10,74 mm	878-320-18	878-320-22	1 pièce	878-020-00	10 pièces
16	21	0,15 mm	10,85 mm	878-321-18	878-321-22	1 pièce	878-021-00	10 pièces
16	22	0,15 mm	10,95 mm	878-322-18	878-322-22	1 pièce	878-022-00	10 pièces
16	23	0,15 mm	11,05 mm	878-323-18	878-323-22	1 pièce	878-023-00	10 pièces
16	24	0,15 mm	11,16 mm	878-324-18	878-324-22	1 pièce	878-024-00	10 pièces
16	25	0,18 mm	11,26 mm	878-325-18	878-325-22	1 pièce	878-025-00	10 pièces
16	26	0,18 mm	11,36 mm	878-326-18	878-326-22	1 pièce	878-026-00	10 pièces
16	27	0,18 mm	11,47 mm	878-327-18	878-327-22	1 pièce	878-027-00	10 pièces
16	28	0,18 mm	11,57 mm	878-328-18	878-328-22	1 pièce	878-028-00	10 pièces
16	29	0,18 mm	11,67 mm	878-329-18	878-329-22	1 pièce	878-029-00	10 pièces
16	30	0,18 mm	11,78 mm	878-330-18	878-330-22	1 pièce	878-030-00	10 pièces
16	31	0,18 mm	11,88 mm	878-331-18	878-331-22	1 pièce	878-031-00	10 pièces
16	32	0,18 mm	11,98 mm	878-332-18	878-332-22	1 pièce	878-032-00	10 pièces
16	33	0,18 mm	12,08 mm	878-333-18	878-333-22	1 pièce	878-033-00	10 pièces
16	34	0,18 mm	12,19 mm	878-334-18	878-334-22	1 pièce	878-034-00	10 pièces
16	35	0,18 mm	12,29 mm	878-335-18	878-335-22	1 pièce	878-035-00	10 pièces
16	36	0,18 mm	12,39 mm	878-336-18	878-336-22	1 pièce	878-036-00	10 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10  
<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



# dentaform® Snap / Réassort

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Maxillaire, bagues 1ères molaires, gauche

Dents	Taille de bague	Épaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
26	1	0,12 mm	8,78 mm	879-301-18	879-301-22	1 pièce	879-001-00	10 pièces
26	2	0,12 mm	8,89 mm	879-302-18	879-302-22	1 pièce	879-002-00	10 pièces
26	3	0,12 mm	8,99 mm	879-303-18	879-303-22	1 pièce	879-003-00	10 pièces
26	4	0,12 mm	9,09 mm	879-304-18	879-304-22	1 pièce	879-004-00	10 pièces
26	5	0,12 mm	9,20 mm	879-305-18	879-305-22	1 pièce	879-005-00	10 pièces
26	6	0,12 mm	9,30 mm	879-306-18	879-306-22	1 pièce	879-006-00	10 pièces
26	7	0,12 mm	9,40 mm	879-307-18	879-307-22	1 pièce	879-007-00	10 pièces
26	8	0,12 mm	9,50 mm	879-308-18	879-308-22	1 pièce	879-008-00	10 pièces
26	9	0,15 mm	9,61 mm	879-309-18	879-309-22	1 pièce	879-009-00	10 pièces
26	10	0,15 mm	9,71 mm	879-310-18	879-310-22	1 pièce	879-010-00	10 pièces
26	11	0,15 mm	9,81 mm	879-311-18	879-311-22	1 pièce	879-011-00	10 pièces
26	12	0,15 mm	9,92 mm	879-312-18	879-312-22	1 pièce	879-012-00	10 pièces
26	13	0,15 mm	10,02 mm	879-313-18	879-313-22	1 pièce	879-013-00	10 pièces
26	14	0,15 mm	10,12 mm	879-314-18	879-314-22	1 pièce	879-014-00	10 pièces
26	15	0,15 mm	10,23 mm	879-315-18	879-315-22	1 pièce	879-015-00	10 pièces
26	16	0,15 mm	10,33 mm	879-316-18	879-316-22	1 pièce	879-016-00	10 pièces
26	17	0,15 mm	10,43 mm	879-317-18	879-317-22	1 pièce	879-017-00	10 pièces
26	18	0,15 mm	10,54 mm	879-318-18	879-318-22	1 pièce	879-018-00	10 pièces
26	19	0,15 mm	10,64 mm	879-319-18	879-319-22	1 pièce	879-019-00	10 pièces
26	20	0,15 mm	10,74 mm	879-320-18	879-320-22	1 pièce	879-020-00	10 pièces
26	21	0,15 mm	10,85 mm	879-321-18	879-321-22	1 pièce	879-021-00	10 pièces
26	22	0,15 mm	10,95 mm	879-322-18	879-322-22	1 pièce	879-022-00	10 pièces
26	23	0,15 mm	11,05 mm	879-323-18	879-323-22	1 pièce	879-023-00	10 pièces
26	24	0,15 mm	11,16 mm	879-324-18	879-324-22	1 pièce	879-024-00	10 pièces
26	25	0,18 mm	11,26 mm	879-325-18	879-325-22	1 pièce	879-025-00	10 pièces
26	26	0,18 mm	11,36 mm	879-326-18	879-326-22	1 pièce	879-026-00	10 pièces
26	27	0,18 mm	11,47 mm	879-327-18	879-327-22	1 pièce	879-027-00	10 pièces
26	28	0,18 mm	11,57 mm	879-328-18	879-328-22	1 pièce	879-028-00	10 pièces
26	29	0,18 mm	11,67 mm	879-329-18	879-329-22	1 pièce	879-029-00	10 pièces
26	30	0,18 mm	11,78 mm	879-330-18	879-330-22	1 pièce	879-030-00	10 pièces
26	31	0,18 mm	11,88 mm	879-331-18	879-331-22	1 pièce	879-031-00	10 pièces
26	32	0,18 mm	11,98 mm	879-332-18	879-332-22	1 pièce	879-032-00	10 pièces
26	33	0,18 mm	12,08 mm	879-333-18	879-333-22	1 pièce	879-033-00	10 pièces
26	34	0,18 mm	12,19 mm	879-334-18	879-334-22	1 pièce	879-034-00	10 pièces
26	35	0,18 mm	12,29 mm	879-335-18	879-335-22	1 pièce	879-035-00	10 pièces
26	36	0,18 mm	12,39 mm	879-336-18	879-336-22	1 pièce	879-036-00	10 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 1ères molaires, droite

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	880-301-18	880-301-22	1 pièce	880-201-00	10 pièces
46	2	0,12 mm	9,03 mm	880-302-18	880-302-22	1 pièce	880-202-00	10 pièces
46	3	0,12 mm	9,15 mm	880-303-18	880-303-22	1 pièce	880-203-00	10 pièces
46	4	0,12 mm	9,28 mm	880-304-18	880-304-22	1 pièce	880-204-00	10 pièces
46	5	0,12 mm	9,40 mm	880-305-18	880-305-22	1 pièce	880-205-00	10 pièces
46	6	0,12 mm	9,52 mm	880-306-18	880-306-22	1 pièce	880-206-00	10 pièces
46	7	0,12 mm	9,65 mm	880-307-18	880-307-22	1 pièce	880-207-00	10 pièces
46	8	0,12 mm	9,77 mm	880-308-18	880-308-22	1 pièce	880-208-00	10 pièces
46	9	0,15 mm	9,89 mm	880-309-18	880-309-22	1 pièce	880-209-00	10 pièces
46	10	0,15 mm	10,01 mm	880-310-18	880-310-22	1 pièce	880-210-00	10 pièces
46	11	0,15 mm	10,14 mm	880-311-18	880-311-22	1 pièce	880-211-00	10 pièces
46	12	0,15 mm	10,25 mm	880-312-18	880-312-22	1 pièce	880-212-00	10 pièces
46	13	0,15 mm	10,38 mm	880-313-18	880-313-22	1 pièce	880-213-00	10 pièces
46	14	0,15 mm	10,50 mm	880-314-18	880-314-22	1 pièce	880-214-00	10 pièces
46	15	0,15 mm	10,63 mm	880-315-18	880-315-22	1 pièce	880-215-00	10 pièces
46	16	0,15 mm	10,75 mm	880-316-18	880-316-22	1 pièce	880-216-00	10 pièces
46	17	0,15 mm	10,87 mm	880-317-18	880-317-22	1 pièce	880-217-00	10 pièces
46	18	0,15 mm	10,99 mm	880-318-18	880-318-22	1 pièce	880-218-00	10 pièces
46	19	0,15 mm	11,12 mm	880-319-18	880-319-22	1 pièce	880-219-00	10 pièces
46	20	0,15 mm	11,24 mm	880-320-18	880-320-22	1 pièce	880-220-00	10 pièces
46	21	0,15 mm	11,36 mm	880-321-18	880-321-22	1 pièce	880-221-00	10 pièces
46	22	0,15 mm	11,48 mm	880-322-18	880-322-22	1 pièce	880-222-00	10 pièces
46	23	0,15 mm	11,61 mm	880-323-18	880-323-22	1 pièce	880-223-00	10 pièces
46	24	0,15 mm	11,73 mm	880-324-18	880-324-22	1 pièce	880-224-00	10 pièces
46	25	0,18 mm	11,85 mm	880-325-18	880-325-22	1 pièce	880-225-00	10 pièces
46	26	0,18 mm	11,97 mm	880-326-18	880-326-22	1 pièce	880-226-00	10 pièces
46	27	0,18 mm	12,10 mm	880-327-18	880-327-22	1 pièce	880-227-00	10 pièces
46	28	0,18 mm	12,22 mm	880-328-18	880-328-22	1 pièce	880-228-00	10 pièces
46	29	0,18 mm	12,34 mm	880-329-18	880-329-22	1 pièce	880-229-00	10 pièces
46	30	0,18 mm	12,46 mm	880-330-18	880-330-22	1 pièce	880-230-00	10 pièces
46	31	0,18 mm	12,59 mm	880-331-18	880-331-22	1 pièce	880-231-00	10 pièces
46	32	0,18 mm	12,71 mm	880-332-18	880-332-22	1 pièce	880-232-00	10 pièces
46	33	0,18 mm	12,83 mm	880-333-18	880-333-22	1 pièce	880-233-00	10 pièces
46	34	0,18 mm	12,96 mm	880-334-18	880-334-22	1 pièce	880-234-00	10 pièces
46	35	0,18 mm	13,08 mm	880-335-18	880-335-22	1 pièce	880-235-00	10 pièces
46	36	0,18 mm	13,20 mm	880-336-18	880-336-22	1 pièce	880-236-00	10 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



# dentaform® Snap / Réassort

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Mandibule, bagues 1ères molaires, gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>			
							REF	
36	1	0,12 mm	8,91 mm	881-301-18	881-301-22	1 pièce	881-201-00	10 pièces
36	2	0,12 mm	9,03 mm	881-302-18	881-302-22	1 pièce	881-202-00	10 pièces
36	3	0,12 mm	9,15 mm	881-303-18	881-303-22	1 pièce	881-203-00	10 pièces
36	4	0,12 mm	9,28 mm	881-304-18	881-304-22	1 pièce	881-204-00	10 pièces
36	5	0,12 mm	9,40 mm	881-305-18	881-305-22	1 pièce	881-205-00	10 pièces
36	6	0,12 mm	9,52 mm	881-306-18	881-306-22	1 pièce	881-206-00	10 pièces
36	7	0,12 mm	9,65 mm	881-307-18	881-307-22	1 pièce	881-207-00	10 pièces
36	8	0,12 mm	9,77 mm	881-308-18	881-308-22	1 pièce	881-208-00	10 pièces
36	9	0,15 mm	9,89 mm	881-309-18	881-309-22	1 pièce	881-209-00	10 pièces
36	10	0,15 mm	10,01 mm	881-310-18	881-310-22	1 pièce	881-210-00	10 pièces
36	11	0,15 mm	10,14 mm	881-311-18	881-311-22	1 pièce	881-211-00	10 pièces
36	12	0,15 mm	10,25 mm	881-312-18	881-312-22	1 pièce	881-212-00	10 pièces
36	13	0,15 mm	10,38 mm	881-313-18	881-313-22	1 pièce	881-213-00	10 pièces
36	14	0,15 mm	10,50 mm	881-314-18	881-314-22	1 pièce	881-214-00	10 pièces
36	15	0,15 mm	10,63 mm	881-315-18	881-315-22	1 pièce	881-215-00	10 pièces
36	16	0,15 mm	10,75 mm	881-316-18	881-316-22	1 pièce	881-216-00	10 pièces
36	17	0,15 mm	10,87 mm	881-317-18	881-317-22	1 pièce	881-217-00	10 pièces
36	18	0,15 mm	10,99 mm	881-318-18	881-318-22	1 pièce	881-218-00	10 pièces
36	19	0,15 mm	11,12 mm	881-319-18	881-319-22	1 pièce	881-219-00	10 pièces
36	20	0,15 mm	11,24 mm	881-320-18	881-320-22	1 pièce	881-220-00	10 pièces
36	21	0,15 mm	11,36 mm	881-321-18	881-321-22	1 pièce	881-221-00	10 pièces
36	22	0,15 mm	11,48 mm	881-322-18	881-322-22	1 pièce	881-222-00	10 pièces
36	23	0,15 mm	11,61 mm	881-323-18	881-323-22	1 pièce	881-223-00	10 pièces
36	24	0,15 mm	11,73 mm	881-324-18	881-324-22	1 pièce	881-224-00	10 pièces
36	25	0,18 mm	11,85 mm	881-325-18	881-325-22	1 pièce	881-225-00	10 pièces
36	26	0,18 mm	11,97 mm	881-326-18	881-326-22	1 pièce	881-226-00	10 pièces
36	27	0,18 mm	12,10 mm	881-327-18	881-327-22	1 pièce	881-227-00	10 pièces
36	28	0,18 mm	12,22 mm	881-328-18	881-328-22	1 pièce	881-228-00	10 pièces
36	29	0,18 mm	12,34 mm	881-329-18	881-329-22	1 pièce	881-229-00	10 pièces
36	30	0,18 mm	12,46 mm	881-330-18	881-330-22	1 pièce	881-230-00	10 pièces
36	31	0,18 mm	12,59 mm	881-331-18	881-331-22	1 pièce	881-231-00	10 pièces
36	32	0,18 mm	12,71 mm	881-332-18	881-332-22	1 pièce	881-232-00	10 pièces
36	33	0,18 mm	12,83 mm	881-333-18	881-333-22	1 pièce	881-233-00	10 pièces
36	34	0,18 mm	12,96 mm	881-334-18	881-334-22	1 pièce	881-234-00	10 pièces
36	35	0,18 mm	13,08 mm	881-335-18	881-335-22	1 pièce	881-235-00	10 pièces
36	36	0,18 mm	13,20 mm	881-336-18	881-336-22	1 pièce	881-236-00	10 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intradors
- livrées dans un coffret (pour armoires à bagues REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Maxillaire, bagues 1ères molaires

### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		
16	N° 5-36 (2)	882-364-18	882-364-22	882-064-00	64 pièces
26	N° 5-36 (2)	883-364-18	883-364-22	883-064-00	64 pièces

### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		
16	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	882-350-18	882-350-22	882-150-00	150 pièces
26	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	883-350-18	883-350-22	883-150-00	150 pièces

### Maxi

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		
16	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			882-300-00	300 pièces
26	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			883-300-00	300 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> (16) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10

(26) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> (16) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10

(26) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Maxillaire, bagues 2èmes molaires

### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
17	N° 1-32 (2)			886-064-00	64 pièces
27	N° 1-32 (2)			887-064-00	64 pièces

### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
17	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			886-150-00	150 pièces
27	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			887-150-00	150 pièces

CE 0483

# dentaform® / Assortiments

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoires à bagues REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Mandibule, bagues 1ères molaires

### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		
46	N° 5-36 (2)	884-364-18	884-364-22	884-064-00	64 pièces
36	N° 5-36 (2)	885-364-18	885-364-22	885-064-00	64 pièces

### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		
46	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	884-350-18	884-350-22	884-150-00	150 pièces
36	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	885-350-18	885-350-22	885-150-00	150 pièces

### Maxi

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		
46	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			884-300-00	300 pièces
36	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			885-300-00	300 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> (46) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10

(36) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> (46) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10

(36) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Mandibule, bagues 2èmes molaires

### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
47	N° 1-32 (2)			888-064-00	64 pièces
37	N° 1-32 (2)			889-064-00	64 pièces

### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
47	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			888-150-00	150 pièces
37	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			889-150-00	150 pièces

CE 0483



- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères molaires, droite

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>			
16	1	0,12 mm	8,78 mm	882-301-18	882-301-22	1 pièce	882-001-00	10 pièces
16	2	0,12 mm	8,89 mm	882-302-18	882-302-22	1 pièce	882-002-00	10 pièces
16	3	0,12 mm	8,99 mm	882-303-18	882-303-22	1 pièce	882-003-00	10 pièces
16	4	0,12 mm	9,09 mm	882-304-18	882-304-22	1 pièce	882-004-00	10 pièces
16	5	0,12 mm	9,20 mm	882-305-18	882-305-22	1 pièce	882-005-00	10 pièces
16	6	0,12 mm	9,30 mm	882-306-18	882-306-22	1 pièce	882-006-00	10 pièces
16	7	0,12 mm	9,40 mm	882-307-18	882-307-22	1 pièce	882-007-00	10 pièces
16	8	0,12 mm	9,50 mm	882-308-18	882-308-22	1 pièce	882-008-00	10 pièces
16	9	0,15 mm	9,61 mm	882-309-18	882-309-22	1 pièce	882-009-00	10 pièces
16	10	0,15 mm	9,71 mm	882-310-18	882-310-22	1 pièce	882-010-00	10 pièces
16	11	0,15 mm	9,81 mm	882-311-18	882-311-22	1 pièce	882-011-00	10 pièces
16	12	0,15 mm	9,92 mm	882-312-18	882-312-22	1 pièce	882-012-00	10 pièces
16	13	0,15 mm	10,02 mm	882-313-18	882-313-22	1 pièce	882-013-00	10 pièces
16	14	0,15 mm	10,12 mm	882-314-18	882-314-22	1 pièce	882-014-00	10 pièces
16	15	0,15 mm	10,23 mm	882-315-18	882-315-22	1 pièce	882-015-00	10 pièces
16	16	0,15 mm	10,33 mm	882-316-18	882-316-22	1 pièce	882-016-00	10 pièces
16	17	0,15 mm	10,43 mm	882-317-18	882-317-22	1 pièce	882-017-00	10 pièces
16	18	0,15 mm	10,54 mm	882-318-18	882-318-22	1 pièce	882-018-00	10 pièces
16	19	0,15 mm	10,64 mm	882-319-18	882-319-22	1 pièce	882-019-00	10 pièces
16	20	0,15 mm	10,74 mm	882-320-18	882-320-22	1 pièce	882-020-00	10 pièces
16	21	0,15 mm	10,85 mm	882-321-18	882-321-22	1 pièce	882-021-00	10 pièces
16	22	0,15 mm	10,95 mm	882-322-18	882-322-22	1 pièce	882-022-00	10 pièces
16	23	0,15 mm	11,05 mm	882-323-18	882-323-22	1 pièce	882-023-00	10 pièces
16	24	0,15 mm	11,16 mm	882-324-18	882-324-22	1 pièce	882-024-00	10 pièces
16	25	0,18 mm	11,26 mm	882-325-18	882-325-22	1 pièce	882-025-00	10 pièces
16	26	0,18 mm	11,36 mm	882-326-18	882-326-22	1 pièce	882-026-00	10 pièces
16	27	0,18 mm	11,47 mm	882-327-18	882-327-22	1 pièce	882-027-00	10 pièces
16	28	0,18 mm	11,57 mm	882-328-18	882-328-22	1 pièce	882-028-00	10 pièces
16	29	0,18 mm	11,67 mm	882-329-18	882-329-22	1 pièce	882-029-00	10 pièces
16	30	0,18 mm	11,78 mm	882-330-18	882-330-22	1 pièce	882-030-00	10 pièces
16	31	0,18 mm	11,88 mm	882-331-18	882-331-22	1 pièce	882-031-00	10 pièces
16	32	0,18 mm	11,98 mm	882-332-18	882-332-22	1 pièce	882-032-00	10 pièces
16	33	0,18 mm	12,08 mm	882-333-18	882-333-22	1 pièce	882-033-00	10 pièces
16	34	0,18 mm	12,19 mm	882-334-18	882-334-22	1 pièce	882-034-00	10 pièces
16	35	0,18 mm	12,29 mm	882-335-18	882-035-22	1 pièce	882-035-00	10 pièces
16	36	0,18 mm	12,39 mm	882-336-18	882-336-22	1 pièce	882-036-00	10 pièces

CE 0483



<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

# dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Maxillaire, bagues 1ères molaires, gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
26	1	0,12 mm	8,78 mm	883-301-18	883-301-22	1 pièce	883-001-00	10 pièces
26	2	0,12 mm	8,89 mm	883-302-18	883-302-22	1 pièce	883-002-00	10 pièces
26	3	0,12 mm	8,99 mm	883-303-18	883-303-22	1 pièce	883-003-00	10 pièces
26	4	0,12 mm	9,09 mm	883-304-18	883-304-22	1 pièce	883-004-00	10 pièces
26	5	0,12 mm	9,20 mm	883-305-18	883-305-22	1 pièce	883-005-00	10 pièces
26	6	0,12 mm	9,30 mm	883-306-18	883-306-22	1 pièce	883-006-00	10 pièces
26	7	0,12 mm	9,40 mm	883-307-18	883-307-22	1 pièce	883-007-00	10 pièces
26	8	0,12 mm	9,50 mm	883-308-18	883-308-22	1 pièce	883-008-00	10 pièces
26	9	0,15 mm	9,61 mm	883-309-18	883-309-22	1 pièce	883-009-00	10 pièces
26	10	0,15 mm	9,71 mm	883-310-18	883-310-22	1 pièce	883-010-00	10 pièces
26	11	0,15 mm	9,81 mm	883-311-18	883-311-22	1 pièce	883-011-00	10 pièces
26	12	0,15 mm	9,92 mm	883-312-18	883-312-22	1 pièce	883-012-00	10 pièces
26	13	0,15 mm	10,02 mm	883-313-18	883-313-22	1 pièce	883-013-00	10 pièces
26	14	0,15 mm	10,12 mm	883-314-18	883-314-22	1 pièce	883-014-00	10 pièces
26	15	0,15 mm	10,23 mm	883-315-18	883-315-22	1 pièce	883-015-00	10 pièces
26	16	0,15 mm	10,33 mm	883-316-18	883-316-22	1 pièce	883-016-00	10 pièces
26	17	0,15 mm	10,43 mm	883-317-18	883-317-22	1 pièce	883-017-00	10 pièces
26	18	0,15 mm	10,54 mm	883-318-18	883-318-22	1 pièce	883-018-00	10 pièces
26	19	0,15 mm	10,64 mm	883-319-18	883-319-22	1 pièce	883-019-00	10 pièces
26	20	0,15 mm	10,74 mm	883-320-18	883-320-22	1 pièce	883-020-00	10 pièces
26	21	0,15 mm	10,85 mm	883-321-18	883-321-22	1 pièce	883-021-00	10 pièces
26	22	0,15 mm	10,95 mm	883-322-18	883-322-22	1 pièce	883-022-00	10 pièces
26	23	0,15 mm	11,05 mm	883-323-18	883-323-22	1 pièce	883-023-00	10 pièces
26	24	0,15 mm	11,16 mm	883-324-18	883-324-22	1 pièce	883-024-00	10 pièces
26	25	0,18 mm	11,26 mm	883-325-18	883-325-22	1 pièce	883-025-00	10 pièces
26	26	0,18 mm	11,36 mm	883-326-18	883-326-22	1 pièce	883-026-00	10 pièces
26	27	0,18 mm	11,47 mm	883-327-18	883-327-22	1 pièce	883-027-00	10 pièces
26	28	0,18 mm	11,57 mm	883-328-18	883-328-22	1 pièce	883-028-00	10 pièces
26	29	0,18 mm	11,67 mm	883-329-18	883-329-22	1 pièce	883-029-00	10 pièces
26	30	0,18 mm	11,78 mm	883-330-18	883-330-22	1 pièce	883-030-00	10 pièces
26	31	0,18 mm	11,88 mm	883-331-18	883-331-22	1 pièce	883-031-00	10 pièces
26	32	0,18 mm	11,98 mm	883-332-18	883-332-22	1 pièce	883-032-00	10 pièces
26	33	0,18 mm	12,08 mm	883-333-18	883-333-22	1 pièce	883-033-00	10 pièces
26	34	0,18 mm	12,19 mm	883-334-18	883-334-22	1 pièce	883-034-00	10 pièces
26	35	0,18 mm	12,29 mm	883-335-18	883-335-22	1 pièce	883-035-00	10 pièces
26	36	0,18 mm	12,39 mm	883-336-18	883-336-22	1 pièce	883-036-00	10 pièces

CE 0483



<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

**Mandibule, bagues 1ères molaires, droite**

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	884-301-18	884-301-22	1 pièce	884-001-00	10 pièces
46	2	0,12 mm	9,03 mm	884-302-18	884-302-22	1 pièce	884-002-00	10 pièces
46	3	0,12 mm	9,15 mm	884-303-18	884-303-22	1 pièce	884-003-00	10 pièces
46	4	0,12 mm	9,28 mm	884-304-18	884-304-22	1 pièce	884-004-00	10 pièces
46	5	0,12 mm	9,40 mm	884-305-18	884-305-22	1 pièce	884-005-00	10 pièces
46	6	0,12 mm	9,52 mm	884-306-18	884-306-22	1 pièce	884-006-00	10 pièces
46	7	0,12 mm	9,65 mm	884-307-18	884-307-22	1 pièce	884-007-00	10 pièces
46	8	0,12 mm	9,77 mm	884-308-18	884-308-22	1 pièce	884-008-00	10 pièces
46	9	0,15 mm	9,89 mm	884-309-18	884-309-22	1 pièce	884-009-00	10 pièces
46	10	0,15 mm	10,01 mm	884-310-18	884-310-22	1 pièce	884-010-00	10 pièces
46	11	0,15 mm	10,14 mm	884-311-18	884-311-22	1 pièce	884-011-00	10 pièces
46	12	0,15 mm	10,25 mm	884-312-18	884-312-22	1 pièce	884-012-00	10 pièces
46	13	0,15 mm	10,38 mm	884-313-18	884-313-22	1 pièce	884-013-00	10 pièces
46	14	0,15 mm	10,50 mm	884-314-18	884-314-22	1 pièce	884-014-00	10 pièces
46	15	0,15 mm	10,63 mm	884-315-18	884-315-22	1 pièce	884-015-00	10 pièces
46	16	0,15 mm	10,75 mm	884-316-18	884-316-22	1 pièce	884-016-00	10 pièces
46	17	0,15 mm	10,87 mm	884-317-18	884-317-22	1 pièce	884-017-00	10 pièces
46	18	0,15 mm	10,99 mm	884-318-18	884-318-22	1 pièce	884-018-00	10 pièces
46	19	0,15 mm	11,12 mm	884-319-18	884-319-22	1 pièce	884-019-00	10 pièces
46	20	0,15 mm	11,24 mm	884-320-18	884-320-22	1 pièce	884-020-00	10 pièces
46	21	0,15 mm	11,36 mm	884-321-18	884-321-22	1 pièce	884-021-00	10 pièces
46	22	0,15 mm	11,48 mm	884-322-18	884-322-22	1 pièce	884-022-00	10 pièces
46	23	0,15 mm	11,61 mm	884-323-18	884-323-22	1 pièce	884-023-00	10 pièces
46	24	0,15 mm	11,73 mm	884-324-18	884-324-22	1 pièce	884-024-00	10 pièces
46	25	0,18 mm	11,85 mm	884-325-18	884-325-22	1 pièce	884-025-00	10 pièces
46	26	0,18 mm	11,97 mm	884-326-18	884-326-22	1 pièce	884-026-00	10 pièces
46	27	0,18 mm	12,10 mm	884-327-18	884-327-22	1 pièce	884-027-00	10 pièces
46	28	0,18 mm	12,22 mm	884-328-18	884-328-22	1 pièce	884-028-00	10 pièces
46	29	0,18 mm	12,34 mm	884-329-18	884-329-22	1 pièce	884-029-00	10 pièces
46	30	0,18 mm	12,46 mm	884-330-18	884-330-22	1 pièce	884-030-00	10 pièces
46	31	0,18 mm	12,59 mm	884-331-18	884-331-22	1 pièce	884-031-00	10 pièces
46	32	0,18 mm	12,71 mm	884-332-18	884-332-22	1 pièce	884-032-00	10 pièces
46	33	0,18 mm	12,83 mm	884-333-18	884-333-22	1 pièce	884-033-00	10 pièces
46	34	0,18 mm	12,96 mm	884-334-18	884-334-22	1 pièce	884-034-00	10 pièces
46	35	0,18 mm	13,08 mm	884-335-18	884-335-22	1 pièce	884-035-00	10 pièces
46	36	0,18 mm	13,20 mm	884-336-18	884-336-22	1 pièce	884-036-00	10 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



# dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Mandibule, bagues 1ères molaires, gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		REF	
36	1	0,12 mm	8,91 mm	885-301-18	885-301-22	1 pièce	885-001-00	10 pièces
36	2	0,12 mm	9,03 mm	885-302-18	885-302-22	1 pièce	885-002-00	10 pièces
36	3	0,12 mm	9,15 mm	885-303-18	885-303-22	1 pièce	885-003-00	10 pièces
36	4	0,12 mm	9,28 mm	885-304-18	885-304-22	1 pièce	885-004-00	10 pièces
36	5	0,12 mm	9,40 mm	885-305-18	885-305-22	1 pièce	885-005-00	10 pièces
36	6	0,12 mm	9,52 mm	885-306-18	885-306-22	1 pièce	885-006-00	10 pièces
36	7	0,12 mm	9,65 mm	885-307-18	885-307-22	1 pièce	885-007-00	10 pièces
36	8	0,12 mm	9,77 mm	885-308-18	885-308-22	1 pièce	885-008-00	10 pièces
36	9	0,15 mm	9,89 mm	885-309-18	885-309-22	1 pièce	885-009-00	10 pièces
36	10	0,15 mm	10,01 mm	885-310-18	885-310-22	1 pièce	885-010-00	10 pièces
36	11	0,15 mm	10,14 mm	885-311-18	885-311-22	1 pièce	885-011-00	10 pièces
36	12	0,15 mm	10,25 mm	885-312-18	885-312-22	1 pièce	885-012-00	10 pièces
36	13	0,15 mm	10,38 mm	885-313-18	885-313-22	1 pièce	885-013-00	10 pièces
36	14	0,15 mm	10,50 mm	885-314-18	885-314-22	1 pièce	885-014-00	10 pièces
36	15	0,15 mm	10,63 mm	885-315-18	885-315-22	1 pièce	885-015-00	10 pièces
36	16	0,15 mm	10,75 mm	885-316-18	885-316-22	1 pièce	885-016-00	10 pièces
36	17	0,15 mm	10,87 mm	885-317-18	885-317-22	1 pièce	885-017-00	10 pièces
36	18	0,15 mm	10,99 mm	885-318-18	885-318-22	1 pièce	885-018-00	10 pièces
36	19	0,15 mm	11,12 mm	885-319-18	885-319-22	1 pièce	885-019-00	10 pièces
36	20	0,15 mm	11,24 mm	885-320-18	885-320-22	1 pièce	885-020-00	10 pièces
36	21	0,15 mm	11,36 mm	885-321-18	885-321-22	1 pièce	885-021-00	10 pièces
36	22	0,15 mm	11,48 mm	885-322-18	885-322-22	1 pièce	885-022-00	10 pièces
36	23	0,15 mm	11,61 mm	885-323-18	885-323-22	1 pièce	885-023-00	10 pièces
36	24	0,15 mm	11,73 mm	885-324-18	885-324-22	1 pièce	885-024-00	10 pièces
36	25	0,18 mm	11,85 mm	885-325-18	885-325-22	1 pièce	885-025-00	10 pièces
36	26	0,18 mm	11,97 mm	885-326-18	885-326-22	1 pièce	885-026-00	10 pièces
36	27	0,18 mm	12,10 mm	885-327-18	885-327-22	1 pièce	885-027-00	10 pièces
36	28	0,18 mm	12,22 mm	885-328-18	885-328-22	1 pièce	885-028-00	10 pièces
36	29	0,18 mm	12,34 mm	885-329-18	885-329-22	1 pièce	885-029-00	10 pièces
36	30	0,18 mm	12,46 mm	885-330-18	885-330-22	1 pièce	885-030-00	10 pièces
36	31	0,18 mm	12,59 mm	885-331-18	885-331-22	1 pièce	885-031-00	10 pièces
36	32	0,18 mm	12,71 mm	885-332-18	885-332-22	1 pièce	885-032-00	10 pièces
36	33	0,18 mm	12,83 mm	885-333-18	885-333-22	1 pièce	885-033-00	10 pièces
36	34	0,18 mm	12,96 mm	885-334-18	885-334-22	1 pièce	885-034-00	10 pièces
36	35	0,18 mm	13,08 mm	885-335-18	885-335-22	1 pièce	885-035-00	10 pièces
36	36	0,18 mm	13,20 mm	885-336-18	885-336-22	1 pièce	885-036-00	10 pièces

CE 0483



<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

**Maxillaire, bagues 2èmes molaires, droite**

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
17	1	0,12 mm	8,10 mm				886-001-00	10 pièces
17	2	0,12 mm	8,22 mm				886-002-00	10 pièces
17	3	0,12 mm	8,33 mm				886-003-00	10 pièces
17	4	0,12 mm	8,45 mm				886-004-00	10 pièces
17	5	0,12 mm	8,56 mm				886-005-00	10 pièces
17	6	0,12 mm	8,68 mm				886-006-00	10 pièces
17	7	0,15 mm	8,80 mm				886-007-00	10 pièces
17	8	0,15 mm	8,91 mm				886-008-00	10 pièces
17	9	0,15 mm	9,03 mm				886-009-00	10 pièces
17	10	0,15 mm	9,14 mm				886-010-00	10 pièces
17	11	0,15 mm	9,26 mm				886-011-00	10 pièces
17	12	0,15 mm	9,38 mm				886-012-00	10 pièces
17	13	0,15 mm	9,49 mm				886-013-00	10 pièces
17	14	0,15 mm	9,61 mm				886-014-00	10 pièces
17	15	0,15 mm	9,72 mm				886-015-00	10 pièces
17	16	0,15 mm	9,84 mm				886-016-00	10 pièces
17	17	0,15 mm	9,96 mm				886-017-00	10 pièces
17	18	0,15 mm	10,07 mm				886-018-00	10 pièces
17	19	0,15 mm	10,19 mm				886-019-00	10 pièces
17	20	0,15 mm	10,30 mm				886-020-00	10 pièces
17	21	0,15 mm	10,42 mm				886-021-00	10 pièces
17	22	0,15 mm	10,54 mm				886-022-00	10 pièces
17	23	0,18 mm	10,65 mm				886-023-00	10 pièces
17	24	0,18 mm	10,77 mm				886-024-00	10 pièces
17	25	0,18 mm	10,88 mm				886-025-00	10 pièces
17	26	0,18 mm	11,00 mm				886-026-00	10 pièces
17	27	0,18 mm	11,12 mm				886-027-00	10 pièces
17	28	0,18 mm	11,23 mm				886-028-00	10 pièces
17	29	0,18 mm	11,35 mm				886-029-00	10 pièces
17	30	0,18 mm	11,46 mm				886-030-00	10 pièces
17	31	0,18 mm	11,58 mm				886-031-00	10 pièces
17	32	0,18 mm	11,70 mm				886-032-00	10 pièces

CE 0483



# dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Maxillaire, bagues 2èmes molaires, gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
27	1	0,12 mm	8,10 mm				887-001-00	10 pièces
27	2	0,12 mm	8,22 mm				887-002-00	10 pièces
27	3	0,12 mm	8,33 mm				887-003-00	10 pièces
27	4	0,12 mm	8,45 mm				887-004-00	10 pièces
27	5	0,12 mm	8,56 mm				887-005-00	10 pièces
27	6	0,12 mm	8,68 mm				887-006-00	10 pièces
27	7	0,15 mm	8,80 mm				887-007-00	10 pièces
27	8	0,15 mm	8,91 mm				887-008-00	10 pièces
27	9	0,15 mm	9,03 mm				887-009-00	10 pièces
27	10	0,15 mm	9,14 mm				887-010-00	10 pièces
27	11	0,15 mm	9,26 mm				887-011-00	10 pièces
27	12	0,15 mm	9,38 mm				887-012-00	10 pièces
27	13	0,15 mm	9,49 mm				887-013-00	10 pièces
27	14	0,15 mm	9,61 mm				887-014-00	10 pièces
27	15	0,15 mm	9,72 mm				887-015-00	10 pièces
27	16	0,15 mm	9,84 mm				887-016-00	10 pièces
27	17	0,15 mm	9,96 mm				887-017-00	10 pièces
27	18	0,15 mm	10,07 mm				887-018-00	10 pièces
27	19	0,15 mm	10,19 mm				887-019-00	10 pièces
27	20	0,15 mm	10,30 mm				887-020-00	10 pièces
27	21	0,15 mm	10,42 mm				887-021-00	10 pièces
27	22	0,15 mm	10,54 mm				887-022-00	10 pièces
27	23	0,18 mm	10,65 mm				887-023-00	10 pièces
27	24	0,18 mm	10,77 mm				887-024-00	10 pièces
27	25	0,18 mm	10,88 mm				887-025-00	10 pièces
27	26	0,18 mm	11,00 mm				887-026-00	10 pièces
27	27	0,18 mm	11,12 mm				887-027-00	10 pièces
27	28	0,18 mm	11,23 mm				887-028-00	10 pièces
27	29	0,18 mm	11,35 mm				887-029-00	10 pièces
27	30	0,18 mm	11,46 mm				887-030-00	10 pièces
27	31	0,18 mm	11,58 mm				887-031-00	10 pièces
27	32	0,18 mm	11,70 mm				887-032-00	10 pièces

CE 0483



- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 2èmes molaires, droite

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47	1	0,12 mm	9,88 mm				888-001-00	10 pièces
47	2	0,12 mm	9,92 mm				888-002-00	10 pièces
47	3	0,12 mm	10,04 mm				888-003-00	10 pièces
47	4	0,12 mm	10,17 mm				888-004-00	10 pièces
47	5	0,12 mm	10,29 mm				888-005-00	10 pièces
47	6	0,12 mm	10,41 mm				888-006-00	10 pièces
47	7	0,15 mm	10,53 mm				888-007-00	10 pièces
47	8	0,15 mm	10,65 mm				888-008-00	10 pièces
47	9	0,15 mm	10,78 mm				888-009-00	10 pièces
47	10	0,15 mm	10,90 mm				888-010-00	10 pièces
47	11	0,15 mm	11,02 mm				888-011-00	10 pièces
47	12	0,15 mm	11,14 mm				888-012-00	10 pièces
47	13	0,15 mm	11,26 mm				888-013-00	10 pièces
47	14	0,15 mm	11,39 mm				888-014-00	10 pièces
47	15	0,15 mm	11,51 mm				888-015-00	10 pièces
47	16	0,15 mm	11,63 mm				888-016-00	10 pièces
47	17	0,15 mm	11,75 mm				888-017-00	10 pièces
47	18	0,15 mm	11,87 mm				888-018-00	10 pièces
47	19	0,15 mm	11,99 mm				888-019-00	10 pièces
47	20	0,15 mm	12,12 mm				888-020-00	10 pièces
47	21	0,15 mm	12,24 mm				888-021-00	10 pièces
47	22	0,15 mm	12,36 mm				888-022-00	10 pièces
47	23	0,18 mm	12,48 mm				888-023-00	10 pièces
47	24	0,18 mm	12,61 mm				888-024-00	10 pièces
47	25	0,18 mm	12,73 mm				888-025-00	10 pièces
47	26	0,18 mm	12,85 mm				888-026-00	10 pièces
47	27	0,18 mm	12,97 mm				888-027-00	10 pièces
47	28	0,18 mm	13,09 mm				888-028-00	10 pièces
47	29	0,18 mm	13,22 mm				888-029-00	10 pièces
47	30	0,18 mm	13,34 mm				888-030-00	10 pièces
47	31	0,18 mm	13,46 mm				888-031-00	10 pièces
47	32	0,18 mm	13,59 mm				888-032-00	10 pièces

CE 0483



## dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 2èmes molaires, gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
37	1	0,12 mm	9,88 mm				889-001-00	10 pièces
37	2	0,12 mm	9,92 mm				889-002-00	10 pièces
37	3	0,12 mm	10,04 mm				889-003-00	10 pièces
37	4	0,12 mm	10,17 mm				889-004-00	10 pièces
37	5	0,12 mm	10,29 mm				889-005-00	10 pièces
37	6	0,12 mm	10,41 mm				889-006-00	10 pièces
37	7	0,15 mm	10,53 mm				889-007-00	10 pièces
37	8	0,15 mm	10,65 mm				889-008-00	10 pièces
37	9	0,15 mm	10,78 mm				889-009-00	10 pièces
37	10	0,15 mm	10,90 mm				889-010-00	10 pièces
37	11	0,15 mm	11,02 mm				889-011-00	10 pièces
37	12	0,15 mm	11,14 mm				889-012-00	10 pièces
37	13	0,15 mm	11,26 mm				889-013-00	10 pièces
37	14	0,15 mm	11,39 mm				889-014-00	10 pièces
37	15	0,15 mm	11,51 mm				889-015-00	10 pièces
37	16	0,15 mm	11,63 mm				889-016-00	10 pièces
37	17	0,15 mm	11,75 mm				889-017-00	10 pièces
37	18	0,15 mm	11,87 mm				889-018-00	10 pièces
37	19	0,15 mm	11,99 mm				889-019-00	10 pièces
37	20	0,15 mm	12,12 mm				889-020-00	10 pièces
37	21	0,15 mm	12,24 mm				889-021-00	10 pièces
37	22	0,15 mm	12,36 mm				889-022-00	10 pièces
37	23	0,18 mm	12,48 mm				889-023-00	10 pièces
37	24	0,18 mm	12,61 mm				889-024-00	10 pièces
37	25	0,18 mm	12,73 mm				889-025-00	10 pièces
37	26	0,18 mm	12,85 mm				889-026-00	10 pièces
37	27	0,18 mm	12,97 mm				889-027-00	10 pièces
37	28	0,18 mm	13,09 mm				889-028-00	10 pièces
37	29	0,18 mm	13,22 mm				889-029-00	10 pièces
37	30	0,18 mm	13,34 mm				889-030-00	10 pièces
37	31	0,18 mm	13,46 mm				889-031-00	10 pièces
37	32	0,18 mm	13,59 mm				889-032-00	10 pièces

CE 0483





## • Bagues standard / Assortiments

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoires à bagues REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes prémolaires

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
15-14/24-25	N° 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
15-14/24-25	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 pièces

#### Maxi

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
15-14/24-25	N° 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-206-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-218-02 et crochet double 750-602-10

### Mandibule, bagues 1ères prémolaires

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
44/34	N° 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>	REF	
44/34	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-210-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-222-02 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## • Bagues standard / Assortiments

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoires à bagues REF 890-414-00)
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 2èmes prémolaires

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		
45/35	N° 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22	REF	64 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>		
45/35	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22	REF	150 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-211-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-223-02 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Mandibule, bagues 1ères et 2èmes prémolaires

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
45-44/34-35	N° 1-32 (2)			865-064-00	64 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
45-44/34-35	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 pièces

#### Maxi

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
45-44/34-35	N° 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 pièces

CC 0483

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoires à bagues REF 890-414-00)

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes molaires

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
17-16/26-27	N° 1-32 (2)			872-064-00	64 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
17-16/26-27	N° 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)			872-150-00	150 pièces

CE 0483

### Mandibule, bagues 1ères et 2èmes molaires

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
47-46/36-37	N° 1-32 (2)			873-064-00	64 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
47-46/36-37	N° 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)			873-150-00	150 pièces

CE 0483

## • Bagues standard / Assortiments

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoires à bagues REF 890-414-00)

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues canines

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
13/23	N° 1-20 (2)			855-050-00	50 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
13/23	N° 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8)			855-150-00	150 pièces

CE 0483

### Mandibule, bagues canines

#### Mini

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
43/33	N° 1-16 (2)			857-042-00	42 pièces

#### Medium

Dents	Tailles de bague (quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth18)	REF (Roth22)		
43/33	N° 1-2; 5,5; 6,5; 15-16 (4), 7,5; 8,5; 9,5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10)			857-150-00	150 pièces

CE 0483

## Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes prémolaires, droite et gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth18) <sup>1)</sup>	REF (Roth22) <sup>2)</sup>			
15-14/24-25	1	0,12 mm	5,52 mm	860-101-18	860-101-22	1 pièce	860-101-00	10 pièces
15-14/24-25	2	0,12 mm	5,57 mm	860-102-18	860-102-22	1 pièce	860-102-00	10 pièces
15-14/24-25	3	0,12 mm	5,62 mm	860-103-18	860-103-22	1 pièce	860-103-00	10 pièces
15-14/24-25	4	0,12 mm	5,67 mm	860-104-18	860-104-22	1 pièce	860-104-00	10 pièces
15-14/24-25	5	0,12 mm	5,75 mm	860-105-18	860-105-22	1 pièce	860-105-00	10 pièces
15-14/24-25	6	0,12 mm	5,82 mm	860-106-18	860-106-22	1 pièce	860-106-00	10 pièces
15-14/24-25	7	0,12 mm	5,89 mm	860-107-18	860-107-22	1 pièce	860-107-00	10 pièces
15-14/24-25	8	0,12 mm	5,94 mm	860-108-18	860-108-22	1 pièce	860-108-00	10 pièces
15-14/24-25	9	0,12 mm	6,01 mm	860-109-18	860-109-22	1 pièce	860-109-00	10 pièces
15-14/24-25	10	0,12 mm	6,08 mm	860-110-18	860-110-22	1 pièce	860-110-00	10 pièces
15-14/24-25	11	0,12 mm	6,13 mm	860-111-18	860-111-22	1 pièce	860-111-00	10 pièces
15-14/24-25	12	0,12 mm	6,20 mm	860-112-18	860-112-22	1 pièce	860-112-00	10 pièces
15-14/24-25	13	0,12 mm	6,24 mm	860-113-18	860-113-22	1 pièce	860-113-00	10 pièces
15-14/24-25	14	0,12 mm	6,30 mm	860-114-18	860-114-22	1 pièce	860-114-00	10 pièces
15-14/24-25	15	0,12 mm	6,34 mm	860-115-18	860-115-22	1 pièce	860-115-00	10 pièces
15-14/24-25	16	0,12 mm	6,42 mm	860-116-18	860-116-22	1 pièce	860-116-00	10 pièces
15-14/24-25	17	0,12 mm	6,48 mm	860-117-18	860-117-22	1 pièce	860-117-00	10 pièces
15-14/24-25	18	0,12 mm	6,56 mm	860-118-18	860-118-22	1 pièce	860-118-00	10 pièces
15-14/24-25	19	0,12 mm	6,64 mm	860-119-18	860-119-22	1 pièce	860-119-00	10 pièces
15-14/24-25	20	0,12 mm	6,71 mm	860-120-18	860-120-22	1 pièce	860-120-00	10 pièces
15-14/24-25	21	0,12 mm	6,80 mm	860-121-18	860-121-22	1 pièce	860-121-00	10 pièces
15-14/24-25	22	0,12 mm	6,90 mm	860-122-18	860-122-22	1 pièce	860-122-00	10 pièces
15-14/24-25	23	0,12 mm	7,00 mm	860-123-18	860-123-22	1 pièce	860-123-00	10 pièces
15-14/24-25	24	0,12 mm	7,11 mm	860-124-18	860-124-22	1 pièce	860-124-00	10 pièces
15-14/24-25	25	0,12 mm	7,18 mm	860-125-18	860-125-22	1 pièce	860-125-00	10 pièces
15-14/24-25	26	0,12 mm	7,26 mm	860-126-18	860-126-22	1 pièce	860-126-00	10 pièces
15-14/24-25	27	0,12 mm	7,35 mm	860-127-18	860-127-22	1 pièce	860-127-00	10 pièces
15-14/24-25	28	0,12 mm	7,43 mm	860-128-18	860-128-22	1 pièce	860-128-00	10 pièces
15-14/24-25	29	0,12 mm	7,51 mm	860-129-18	860-129-22	1 pièce	860-129-00	10 pièces
15-14/24-25	30	0,12 mm	7,61 mm	860-130-18	860-130-22	1 pièce	860-130-00	10 pièces
15-14/24-25	31	0,12 mm	7,71 mm	860-131-18	860-131-22	1 pièce	860-131-00	10 pièces
15-14/24-25	32	0,12 mm	7,80 mm	860-132-18	860-132-22	1 pièce	860-132-00	10 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-206-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-218-02 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 1ères prémolaires, droite et gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
44/34	1	0,12 mm	6,34 mm	861-101-18	861-101-22	1 pièce	861-101-00	10 pièces
44/34	2	0,12 mm	6,45 mm	861-102-18	861-102-22	1 pièce	861-102-00	10 pièces
44/34	3	0,12 mm	6,56 mm	861-103-18	861-103-22	1 pièce	861-103-00	10 pièces
44/34	4	0,12 mm	6,68 mm	861-104-18	861-104-22	1 pièce	861-104-00	10 pièces
44/34	5	0,12 mm	6,80 mm	861-105-18	861-105-22	1 pièce	861-105-00	10 pièces
44/34	6	0,12 mm	6,90 mm	861-106-18	861-106-22	1 pièce	861-106-00	10 pièces
44/34	7	0,12 mm	7,02 mm	861-107-18	861-107-22	1 pièce	861-107-00	10 pièces
44/34	8	0,12 mm	7,13 mm	861-108-18	861-108-22	1 pièce	861-108-00	10 pièces
44/34	9	0,12 mm	7,25 mm	861-109-18	861-109-22	1 pièce	861-109-00	10 pièces
44/34	10	0,12 mm	7,37 mm	861-110-18	861-110-22	1 pièce	861-110-00	10 pièces
44/34	11	0,12 mm	7,50 mm	861-111-18	861-111-22	1 pièce	861-111-00	10 pièces
44/34	12	0,12 mm	7,63 mm	861-112-18	861-112-22	1 pièce	861-112-00	10 pièces
44/34	13	0,12 mm	7,75 mm	861-113-18	861-113-22	1 pièce	861-113-00	10 pièces
44/34	14	0,12 mm	7,88 mm	861-114-18	861-114-22	1 pièce	861-114-00	10 pièces
44/34	15	0,12 mm	8,05 mm	861-115-18	861-115-22	1 pièce	861-115-00	10 pièces
44/34	16	0,12 mm	8,13 mm	861-116-18	861-116-22	1 pièce	861-116-00	10 pièces
44/34	17	0,12 mm	8,26 mm	861-117-18	861-117-22	1 pièce	861-117-00	10 pièces
44/34	18	0,12 mm	8,40 mm	861-118-18	861-118-22	1 pièce	861-118-00	10 pièces
44/34	19	0,12 mm	8,53 mm	861-119-18	861-119-22	1 pièce	861-119-00	10 pièces
44/34	20	0,12 mm	8,70 mm	861-120-18	861-120-22	1 pièce	861-120-00	10 pièces
44/34	21	0,12 mm	8,84 mm	861-121-18	861-121-22	1 pièce	861-121-00	10 pièces
44/34	22	0,12 mm	9,02 mm	861-122-18	861-122-22	1 pièce	861-122-00	10 pièces
44/34	23	0,12 mm	9,17 mm	861-123-18	861-123-22	1 pièce	861-123-00	10 pièces
44/34	24	0,12 mm	9,28 mm	861-124-18	861-124-22	1 pièce	861-124-00	10 pièces
44/34	25	0,12 mm	9,38 mm	861-125-18	861-125-22	1 pièce	861-125-00	10 pièces
44/34	26	0,12 mm	9,48 mm	861-126-18	861-126-22	1 pièce	861-126-00	10 pièces
44/34	27	0,12 mm	9,59 mm	861-127-18	861-127-22	1 pièce	861-127-00	10 pièces
44/34	28	0,12 mm	9,70 mm	861-128-18	861-128-22	1 pièce	861-128-00	10 pièces
44/34	29	0,12 mm	9,82 mm	861-129-18	861-129-22	1 pièce	861-129-00	10 pièces
44/34	30	0,12 mm	9,96 mm	861-130-18	861-130-22	1 pièce	861-130-00	10 pièces
44/34	31	0,12 mm	10,11 mm	861-131-18	861-131-22	1 pièce	861-131-00	10 pièces
44/34	32	0,12 mm	10,28 mm	861-132-18	861-132-22	1 pièce	861-132-00	10 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-210-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-222-02 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- **McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22** disponible sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Mandibule, bagues 2èmes prémolaires, droite et gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
							REF	
45/35	1	0,12 mm	6,34 mm	862-101-18	862-101-22	1 pièce	861-101-00	10 pièces
45/35	2	0,12 mm	6,45 mm	862-102-18	862-102-22	1 pièce	861-102-00	10 pièces
45/35	3	0,12 mm	6,56 mm	862-103-18	862-103-22	1 pièce	861-103-00	10 pièces
45/35	4	0,12 mm	6,68 mm	862-104-18	862-104-22	1 pièce	861-104-00	10 pièces
45/35	5	0,12 mm	6,80 mm	862-105-18	862-105-22	1 pièce	861-105-00	10 pièces
45/35	6	0,12 mm	6,90 mm	862-106-18	862-106-22	1 pièce	861-106-00	10 pièces
45/35	7	0,12 mm	7,02 mm	862-107-18	862-107-22	1 pièce	861-107-00	10 pièces
45/35	8	0,12 mm	7,13 mm	862-108-18	862-108-22	1 pièce	861-108-00	10 pièces
45/35	9	0,12 mm	7,25 mm	862-109-18	862-109-22	1 pièce	861-109-00	10 pièces
45/35	10	0,12 mm	7,37 mm	862-110-18	862-110-22	1 pièce	861-110-00	10 pièces
45/35	11	0,12 mm	7,50 mm	862-111-18	862-111-22	1 pièce	861-111-00	10 pièces
45/35	12	0,12 mm	7,63 mm	862-112-18	862-112-22	1 pièce	861-112-00	10 pièces
45/35	13	0,12 mm	7,75 mm	862-113-18	862-113-22	1 pièce	861-113-00	10 pièces
45/35	14	0,12 mm	7,88 mm	862-114-18	862-114-22	1 pièce	861-114-00	10 pièces
45/35	15	0,12 mm	8,05 mm	862-115-18	862-115-22	1 pièce	861-115-00	10 pièces
45/35	16	0,12 mm	8,13 mm	862-116-18	862-116-22	1 pièce	861-116-00	10 pièces
45/35	17	0,12 mm	8,26 mm	862-117-18	862-117-22	1 pièce	861-117-00	10 pièces
45/35	18	0,12 mm	8,40 mm	862-118-18	862-118-22	1 pièce	861-118-00	10 pièces
45/35	19	0,12 mm	8,53 mm	862-119-18	862-119-22	1 pièce	861-119-00	10 pièces
45/35	20	0,12 mm	8,70 mm	862-120-18	862-120-22	1 pièce	861-120-00	10 pièces
45/35	21	0,12 mm	8,84 mm	862-121-18	862-121-22	1 pièce	861-121-00	10 pièces
45/35	22	0,12 mm	9,02 mm	862-122-18	862-122-22	1 pièce	861-122-00	10 pièces
45/35	23	0,12 mm	9,17 mm	862-123-18	862-123-22	1 pièce	861-123-00	10 pièces
45/35	24	0,12 mm	9,28 mm	862-124-18	862-124-22	1 pièce	861-124-00	10 pièces
45/35	25	0,12 mm	9,38 mm	862-125-18	862-125-22	1 pièce	861-125-00	10 pièces
45/35	26	0,12 mm	9,48 mm	862-126-18	862-126-22	1 pièce	861-126-00	10 pièces
45/35	27	0,12 mm	9,59 mm	862-127-18	862-127-22	1 pièce	861-127-00	10 pièces
45/35	28	0,12 mm	9,70 mm	862-128-18	862-128-22	1 pièce	861-128-00	10 pièces
45/35	29	0,12 mm	9,82 mm	862-129-18	862-129-22	1 pièce	861-129-00	10 pièces
45/35	30	0,12 mm	9,96 mm	862-130-18	862-130-22	1 pièce	861-130-00	10 pièces
45/35	31	0,12 mm	10,11 mm	862-131-18	862-131-22	1 pièce	861-131-00	10 pièces
45/35	32	0,12 mm	10,28 mm	862-132-18	862-132-22	1 pièce	861-132-00	10 pièces

CE 0483

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-211-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-223-02 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes molaires, droite et gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
17-16/26-27	1	0,15 mm	7,94 mm				870-001-00	10 pièces
17-16/26-27	2	0,15 mm	8,06 mm				870-002-00	10 pièces
17-16/26-27	3	0,15 mm	8,18 mm				870-003-00	10 pièces
17-16/26-27	4	0,15 mm	8,30 mm				870-004-00	10 pièces
17-16/26-27	5	0,15 mm	8,42 mm				870-005-00	10 pièces
17-16/26-27	6	0,15 mm	8,54 mm				870-006-00	10 pièces
17-16/26-27	7	0,15 mm	8,66 mm				870-007-00	10 pièces
17-16/26-27	8	0,15 mm	8,78 mm				870-008-00	10 pièces
17-16/26-27	9	0,15 mm	8,90 mm				870-009-00	10 pièces
17-16/26-27	10	0,15 mm	9,02 mm				870-010-00	10 pièces
17-16/26-27	11	0,15 mm	9,14 mm				870-011-00	10 pièces
17-16/26-27	12	0,15 mm	9,26 mm				870-012-00	10 pièces
17-16/26-27	13	0,15 mm	9,38 mm				870-013-00	10 pièces
17-16/26-27	14	0,15 mm	9,50 mm				870-014-00	10 pièces
17-16/26-27	15	0,15 mm	9,62 mm				870-015-00	10 pièces
17-16/26-27	16	0,15 mm	9,74 mm				870-016-00	10 pièces
17-16/26-27	17	0,15 mm	9,86 mm				870-017-00	10 pièces
17-16/26-27	18	0,15 mm	9,98 mm				870-018-00	10 pièces
17-16/26-27	19	0,15 mm	10,10 mm				870-019-00	10 pièces
17-16/26-27	20	0,15 mm	10,22 mm				870-020-00	10 pièces
17-16/26-27	21	0,15 mm	10,34 mm				870-021-00	10 pièces
17-16/26-27	22	0,15 mm	10,46 mm				870-022-00	10 pièces
17-16/26-27	23	0,15 mm	10,58 mm				870-023-00	10 pièces
17-16/26-27	24	0,15 mm	10,70 mm				870-024-00	10 pièces
17-16/26-27	25	0,15 mm	10,82 mm				870-025-00	10 pièces
17-16/26-27	26	0,15 mm	10,94 mm				870-026-00	10 pièces
17-16/26-27	27	0,15 mm	11,06 mm				870-027-00	10 pièces
17-16/26-27	28	0,15 mm	11,18 mm				870-028-00	10 pièces
17-16/26-27	29	0,15 mm	11,30 mm				870-029-00	10 pièces
17-16/26-27	30	0,15 mm	11,42 mm				870-030-00	10 pièces
17-16/26-27	31	0,15 mm	11,54 mm				870-031-00	10 pièces
17-16/26-27	32	0,15 mm	11,66 mm				870-032-00	10 pièces

CE 0483





- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Mandibule, bagues 1ères et 2èmes molaires, droite et gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47-46/36-37	1	0,15 mm	8,94 mm				871-001-00	10 pièces
47-46/36-37	2	0,15 mm	9,06 mm				871-002-00	10 pièces
47-46/36-37	3	0,15 mm	9,18 mm				871-003-00	10 pièces
47-46/36-37	4	0,15 mm	9,30 mm				871-004-00	10 pièces
47-46/36-37	5	0,15 mm	9,42 mm				871-005-00	10 pièces
47-46/36-37	6	0,15 mm	9,54 mm				871-006-00	10 pièces
47-46/36-37	7	0,15 mm	9,56 mm				871-007-00	10 pièces
47-46/36-37	8	0,15 mm	9,78 mm				871-008-00	10 pièces
47-46/36-37	9	0,15 mm	9,90 mm				871-009-00	10 pièces
47-46/36-37	10	0,15 mm	10,02 mm				871-010-00	10 pièces
47-46/36-37	11	0,15 mm	10,14 mm				871-011-00	10 pièces
47-46/36-37	12	0,15 mm	10,25 mm				871-012-00	10 pièces
47-46/36-37	13	0,15 mm	10,38 mm				871-013-00	10 pièces
47-46/36-37	14	0,15 mm	10,50 mm				871-014-00	10 pièces
47-46/36-37	15	0,15 mm	10,62 mm				871-015-00	10 pièces
47-46/36-37	16	0,15 mm	10,74 mm				871-016-00	10 pièces
47-46/36-37	17	0,15 mm	10,86 mm				871-017-00	10 pièces
47-46/36-37	18	0,15 mm	10,98 mm				871-018-00	10 pièces
47-46/36-37	19	0,15 mm	11,10 mm				871-019-00	10 pièces
47-46/36-37	20	0,15 mm	11,22 mm				871-020-00	10 pièces
47-46/36-37	21	0,15 mm	11,34 mm				871-021-00	10 pièces
47-46/36-37	22	0,15 mm	11,46 mm				871-022-00	10 pièces
47-46/36-37	23	0,15 mm	11,58 mm				871-023-00	10 pièces
47-46/36-37	24	0,15 mm	11,70 mm				871-024-00	10 pièces
47-46/36-37	25	0,15 mm	11,82 mm				871-025-00	10 pièces
47-46/36-37	26	0,15 mm	11,94 mm				871-026-00	10 pièces
47-46/36-37	27	0,15 mm	12,06 mm				871-027-00	10 pièces
47-46/36-37	28	0,15 mm	12,18 mm				871-028-00	10 pièces
47-46/36-37	29	0,15 mm	12,30 mm				871-029-00	10 pièces
47-46/36-37	30	0,15 mm	12,42 mm				871-030-00	10 pièces
47-46/36-37	31	0,15 mm	12,54 mm				871-031-00	10 pièces
47-46/36-37	32	0,15 mm	12,66 mm				871-032-00	10 pièces

CE 0483



## Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues canines, droite et gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
13/23	1	0,12 mm	7,10 mm				850-101-00	10 pièces
13/23	2	0,12 mm	7,20 mm				850-102-00	10 pièces
13/23	3	0,12 mm	7,30 mm				850-103-00	10 pièces
13/23	4	0,12 mm	7,50 mm				850-104-00	10 pièces
13/23	5	0,12 mm	7,60 mm				850-105-00	10 pièces
13/23	6	0,12 mm	7,80 mm				850-106-00	10 pièces
13/23	7	0,12 mm	7,90 mm				850-107-00	10 pièces
13/23	8	0,12 mm	8,00 mm				850-108-00	10 pièces
13/23	8,5	0,12 mm	8,10 mm				850-121-00	10 pièces
13/23	9	0,12 mm	8,20 mm				850-109-00	10 pièces
13/23	9,5	0,12 mm	8,30 mm				850-122-00	10 pièces
13/23	10	0,12 mm	8,40 mm				850-110-00	10 pièces
13/23	10,5	0,12 mm	8,50 mm				850-123-00	10 pièces
13/23	11	0,12 mm	8,60 mm				850-111-00	10 pièces
13/23	11,5	0,12 mm	8,70 mm				850-124-00	10 pièces
13/23	12	0,12 mm	8,80 mm				850-112-00	10 pièces
13/23	12,5	0,12 mm	8,90 mm				850-125-00	10 pièces
13/23	13	0,12 mm	9,10 mm				850-113-00	10 pièces
13/23	14	0,12 mm	9,20 mm				850-114-00	10 pièces
13/23	15	0,12 mm	9,40 mm				850-115-00	10 pièces
13/23	16	0,12 mm	9,50 mm				850-116-00	10 pièces
13/23	17	0,12 mm	9,80 mm				850-117-00	10 pièces
13/23	18	0,12 mm	9,90 mm				850-118-00	10 pièces
13/23	19	0,12 mm	10,00 mm				850-119-00	10 pièces
13/23	20	0,12 mm	10,10 mm				850-120-00	10 pièces

CE 0483



- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Mandibule, bagues canines, droite et gauche

Dents	Taille de bague	Epaisseur de bague	Ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
43/33	1	0,12 mm	6,20 mm				851-101-00	10 pièces
43/33	2	0,12 mm	6,30 mm				851-102-00	10 pièces
43/33	3	0,12 mm	6,50 mm				851-103-00	10 pièces
43/33	4	0,12 mm	6,60 mm				851-104-00	10 pièces
43/33	5	0,12 mm	6,80 mm				851-105-00	10 pièces
43/33	5,5	0,12 mm	6,90 mm				851-117-00	10 pièces
43/33	6	0,12 mm	7,00 mm				851-106-00	10 pièces
43/33	6,5	0,12 mm	7,10 mm				851-118-00	10 pièces
43/33	7	0,12 mm	7,20 mm				851-107-00	10 pièces
43/33	7,5	0,12 mm	7,30 mm				851-119-00	10 pièces
43/33	8	0,12 mm	7,40 mm				851-108-00	10 pièces
43/33	8,5	0,12 mm	7,50 mm				851-120-00	10 pièces
43/33	9	0,12 mm	7,60 mm				851-109-00	10 pièces
43/33	9,5	0,12 mm	7,80 mm				851-121-00	10 pièces
43/33	10	0,12 mm	7,90 mm				851-110-00	10 pièces
43/33	11	0,12 mm	8,00 mm				851-111-00	10 pièces
43/33	12	0,12 mm	8,20 mm				851-112-00	10 pièces
43/33	13	0,12 mm	8,30 mm				851-113-00	10 pièces
43/33	14	0,12 mm	8,40 mm				851-114-00	10 pièces
43/33	15	0,12 mm	8,60 mm				851-115-00	10 pièces
43/33	16	0,12 mm	8,70 mm				851-116-00	10 pièces

CE 0483



# Groupe Dentaaurum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
et dans plus de 130 pays à travers le monde.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés  
aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a.  
Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice  
ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

Mise à jour : 09/19  
Sous réserve de modifications

**D**  
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Allemagne | Téléphone +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295  
www.dentaaurum.com | info@dentaaurum.com