

Migliore estetica con *estrema facilità*



ceraMotion®

ceraMotion®

Un sistema completo di ceramiche






Foto: © Christian Ferrari®




D
DENTAURUM

Il sistema ceraMotion®

Il concetto ceraMotion® unisce emozionalità ed evoluzione in un sistema di ceramiche dentali concepito secondo logica e funzionalità. Tutti i prodotti che ne fanno parte, sono stati sviluppati e prodotti da Dentauro Ceramics, una società del Gruppo Dentauro. Il risultato è un'uniforme e strutturata linea di ceramiche con masse da stratificare o da stampare.

	ceraMotion®_{Me} Ceramica per strutture metalliche (CET 13,9-15,1)
	ceraMotion®_{P-PMe} Presso-ceramica per intarsi, corone parziali, veneer e corone in ceramica integrale Presso-ceramica per strutture metalliche (CET 13,9-15,1)
	ceraMotion®_{Zr} Ceramica per strutture in ossido di zirconio
	ceraMotion®_{PZr} Presso-ceramica per strutture in ossido di zirconio
	ceraMotion®_{Ti} Ceramica per strutture in titanio o leghe di titanio
	ceraMotion®_{Lf} Ceramica a basso punto di cottura per leghe con elevato valore CET

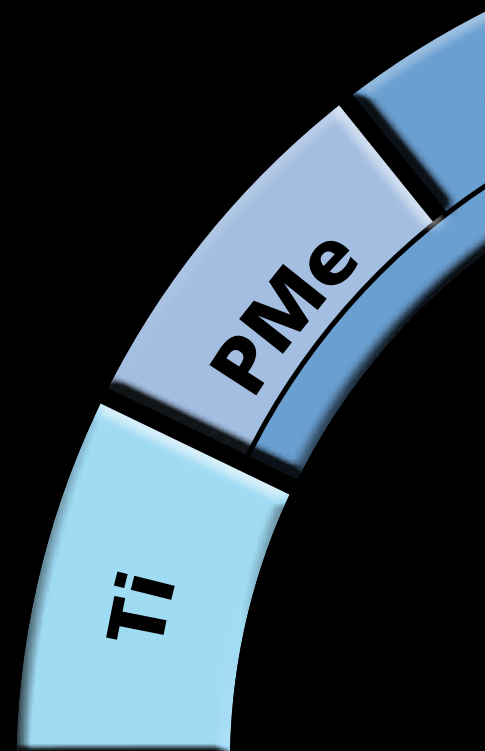

ceraMotion®



Migliore estetica con
estrema facilità



Migliore estetica con estrema facilità

L'innovativo concetto Touch Up

L'innovativo concetto Touch Up permette svariate possibilità d'impiego oltre ad assicurare un'eccellente estetica. Le speciali masse Touch Up completano il programma base delle principali linee di ceramica del sistema ceraMotion®. Grazie alle ridotte temperature di cottura, si aprono nuove possibilità di utilizzo. Gli opachi, le dentine base, le dentine e gli incisali Touch Up completano la gamma di prodotti ceraMotion® e si combinano perfettamente con questi.

► Un vantaggio per l'estetica

- ▷ grado di lucentezza individualizzabile sullo stesso lavoro
- ▷ superfici lisce e omogenee
- ▷ ottimizzazione naturale di bordi, superfici occlusali e punti di contatto

► Risparmio di tempo

- ▷ correzione e glasure in un'unica cottura
- ▷ sicura correzione del lavoro dopo la prova sul paziente
- ▷ semplice e rapida riparazione grazie alla ridotta temperatura di cottura

La soluzione che ottimizza l'estetica



Odt. Hubert Dieker



M.Odt. Waldemar Fritzler



Applicazione di dentina/incisale Touch Up, miscelate con liquido di modellazione



Applicazione di masse Touch Up per il ripristino occlusale



Migliore estetica con
estrema facilità



Una sola tecnica di stratificazione per tutti i materiali da struttura

La filosofia dell'ibrido ceraMotion®

Indipendentemente dal tipo di materiale da struttura, lo schema di stratificazione è identico per tutte le linee del sistema ceraMotion®. Ciò rende il lavoro dell'odontotecnico più semplice, più efficiente e più sicuro. Il concetto dell'ibrido unisce ceramiche da stratificare ad altre da pressare tra loro armonizzate grazie agli stessi componenti base.

- ▷ Un solo schema di stratificazione = risultato predicibile
- ▷ Perfetta compatibilità tra la ceramica da stratificare e quella da pressare
- ▷ maggiore efficienza ed economicità grazie allo stesso schema di stratificazione



ceraMotion®



Migliore estetica con
estrema facilità



- ▶ **Maggiore estetica**
- ▶ **Maggiore sicurezza**
- ▶ **Maggiore economicità**

Sicurezza

- ▶ Adesione elevata



Migliore estetica con
estrema facilità





Un A3 rimane un A3

Massima flessibilità

Le masse del sistema ceraMotion® si distinguono per la capacità di riprodurre con precisione le chiavi cromatiche. Questa loro importante caratteristica viene ottenuta da Dentaurum Ceramics tramite il processo di termopigmentazione. Il trattamento termico delle fritte di colore garantisce una elevata fedeltà cromatica. Inoltre questo procedimento assicura una eccellente stabilità cromatica anche dopo molteplici cotture.

- ▷ La sicurezza del processo di termopigmentazione di Dentaurum Ceramics
- ▷ Eccellente stabilità cromatica anche dopo molteplici cotture
- ▷ Fedeltà cromatica garantita

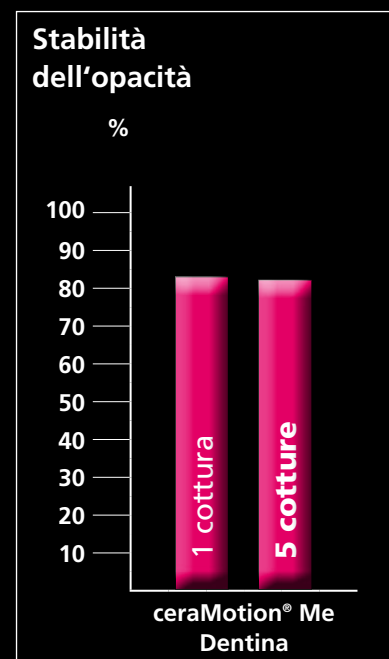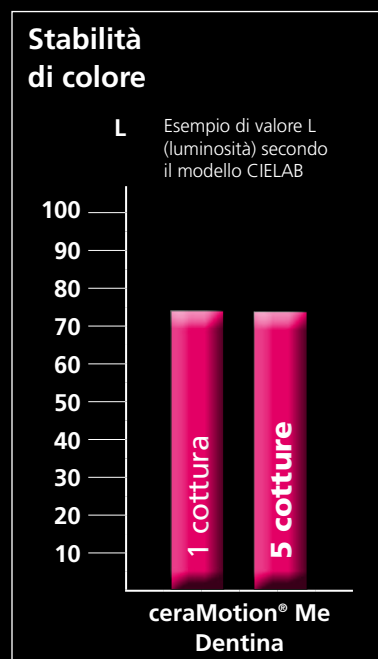



Migliore estetica con
estrema facilità




Massima adesione

Innovativo concetto TRC

I nuovi opachi in pasta TR della linea ceraMotion® Me sono opachi e bonder al tempo stesso per ottenere un'adesione a tensione ridotta tra ceramica e struttura sottostante (TRC = Tension Reduced Connection). Lo strato di opaco in pasta TR funge da zona cuscinetto e aumenta notevolmente l'adesione della ceramica in particolare con le leghe non preziose. Oltre a questa specifica caratteristica, gli opachi in pasta TR si distinguono per l'elevata capacità coprente anche con spessori sottili e per la semplicità di applicazione.

- ▷ Massima adesione, in particolare con le leghe non preziose
- ▷ Bonder e opaco uniti in un unico prodotto
- ▷ Adesione a ridotta tensione (TRC – Tension Reduced Connection)
- ▷ Eccellente capacità coprente
- ▷ Facile impiego

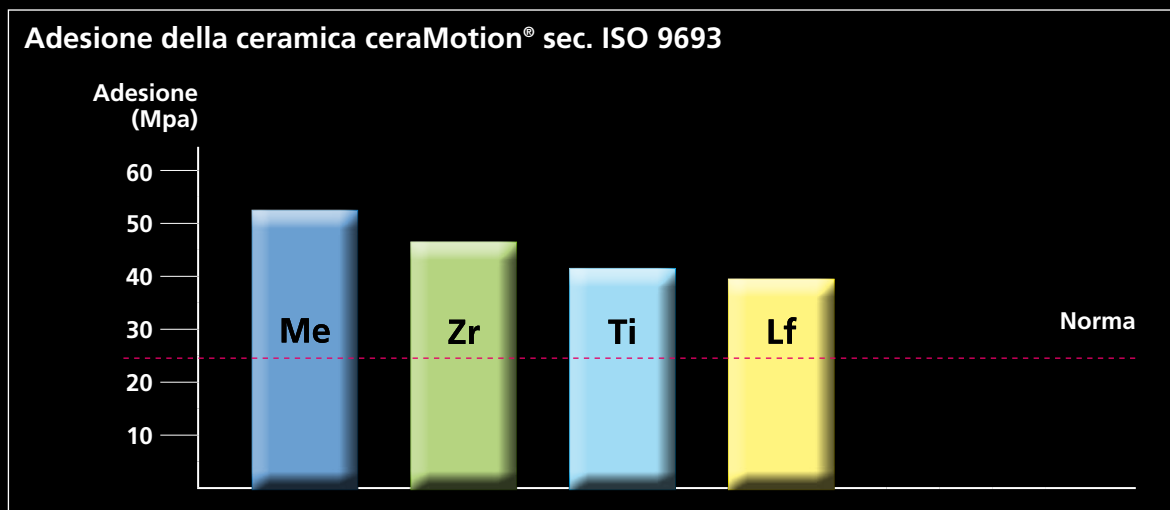

ceraMotion®



Migliore estetica con
estrema facilità





Varietà di colori come in natura

Il Chroma Concept

Con le speciali masse ceramiche Chroma Concept, Dentaurnum Ceramics ha ampliato la gamma dei colori disponibili. Lo spettro delle sfumature tendenti al rosso, al giallo e al bianco viene completato in modo quasi illimitato con le masse Chroma Concept. È quindi possibile ottenere tutte le tonalità cromatiche (standard e bleach) delle chiavi colore (ad es. Vita-3 D-Master® o Ivoclar-Chroma-scop®).

- ▷ Possibilità di ottenere tutte le indicazioni cromatiche
- ▷ Disponibile nei colori standard e bleach
- ▷ Copertura di tutti i sistemi colore presenti sul mercato
- ▷ Effetti cromatici speciali facilmente realizzabili

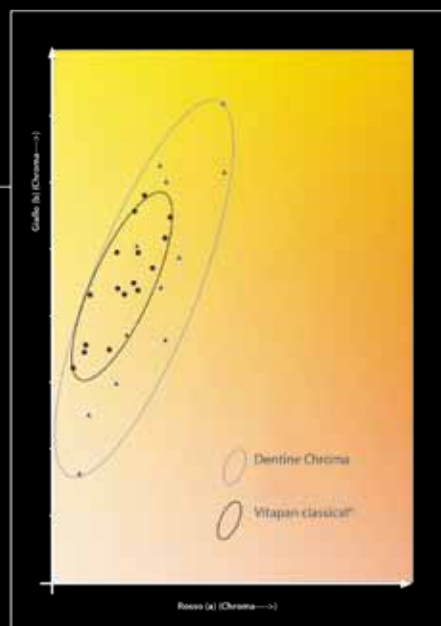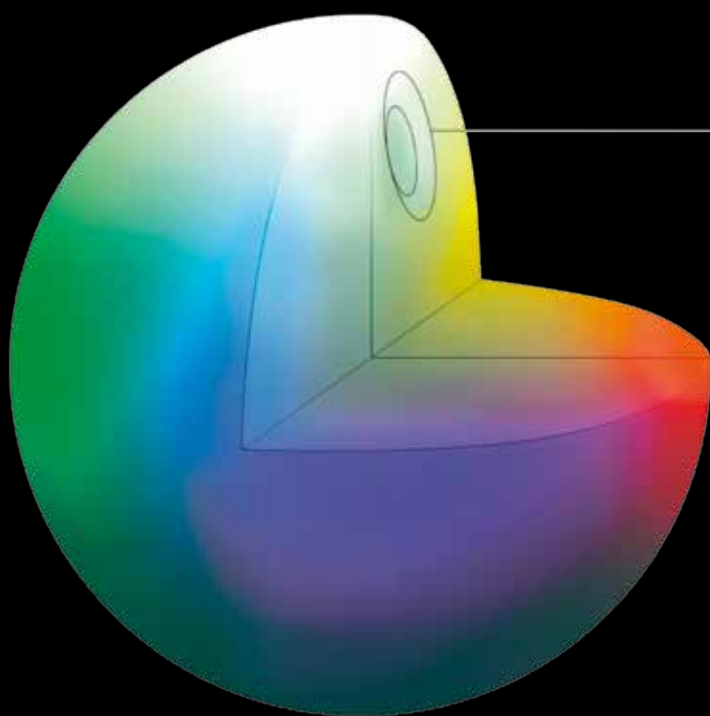

ceraMotion®



Migliore estetica con
estrema facilità





Stabilità di forma fuori dal comune

Speciale processo produttivo

A differenza delle ceramiche a base feldspatica, tutte le materie prime delle linee di ceramica ceraMotion® sono di origine sintetica e ciò consente di mantenere costante la qualità del prodotto finito. Indipendentemente dal numero di cotture necessario per il completamento del lavoro, il valore CET non subisce variazione. Viene quindi garantita l'uniforme sollecitazione alla compressione tra il materiale da struttura e la ceramica sovrastante.

La speciale miscela delle diverse materie prime contenute nelle ceramiche ceraMotion® nonché la definita distribuzione della dimensione dei grani, assicura una sinterizzazione omogenea a massima densità della ceramica, conferendo una migliore compattezza delle superfici, anche senza l'impiego di materiale da glasure.

- ▷ Qualità costante grazie all'impiego di materie prime sintetiche
- ▷ Nessun aumento del valore CET dopo svariate cotture
- ▷ Elevata resistenza grazie alla massima densità del materiale
- ▷ Ottima stabilità durante la stratificazione
- ▷ Superfici omogenee e compatte
- ▷ Nessun arrotondamento delle forme grazie all'elevata stabilità termica

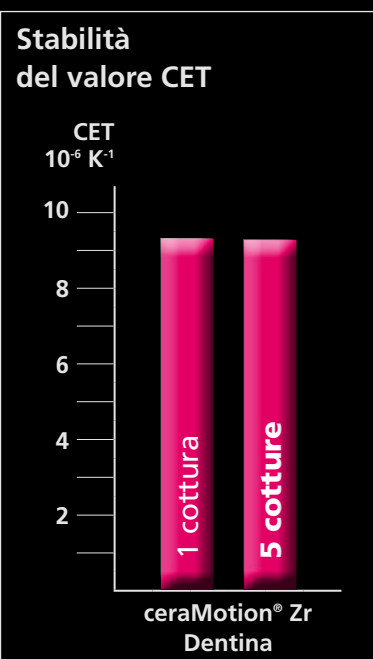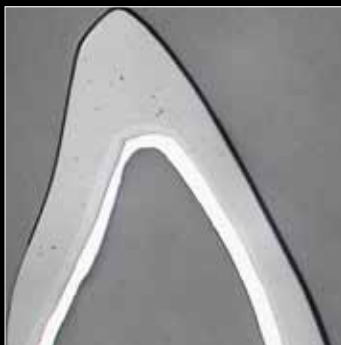

ceraMotion®



Migliore estetica con
estrema facilità



Competenza senza limiti

Dentaurum sviluppa e produce

Lo straordinario potenziale offerto dai sistemi di ceramica ceraMotion® è unico nel suo genere e si basa sull'esperienza e la competenza delle aziende del Gruppo Dentaurum, da anni impegnate nello sviluppo e nella produzione di ceramiche dentali, di leghe e di rivestimenti per la protesi dentaria.

- ▷ 125 anni di esperienza nel dentale
- ▷ Sviluppo e produzione al servizio degli utilizzatori
- ▷ La sicurezza di una professionale e pronta assistenza
- ▷ Il valore aggiunto delle competenze internazionali

ceraMotion® – Sviluppata e prodotta da:





Migliore estetica con
estrema facilità



Per eventuali domande sull'uso delle ceramiche Dentaaurum, è a disposizione il nostro Servizio di Assistenza Clienti ai seguenti numeri:

Telefono 051/86.50.084
Fax 051/86.32.91
E-Mail laboratorio@dentaaurum.it

▶ **Maggiori informazioni sui prodotti Dentaaurum sono disponibili nel sito Internet:**

www.dentaaurum.it

▶ **Vi ricordiamo anche il nostro specifico programma corsi.
Per ricevere maggiori informazioni, contattare il CDC Italia al numero: 051/86.19.35**

CE 0483

Data dell'informazione: 06/11

Soggetto a variazione

Foto: Dentaaurum GmbH & Co. KG | H&H Das Dentalstudio, Hubert Dieker / Waldemar Fritztler, Geeste | Christian Ferrari®, Francia

125
anni
DENTAURUM
DENTAURUM

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentaaurum Italia S.p.a. · Via degli Speciali, 142/144 · Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80 · Fax: 051/86.32.91 · www.dentaaurum.it · E-Mail: info@dentaaurum.it