

Migliore estetica con
estrema facilità



ceraMotion®_{Ti}

Foto: © Christian Ferrarini

ceraMotion® Ti

Ceramica per strutture in titanio e leghe di titanio



D
DENTAURUM

ceraMotion® Ti

Ceramica per strutture in titanio e leghe di titanio

ceraMotion® Ti è la ceramica per strutture in titanio e leghe di titanio. Il bassissimo coefficiente di espansione termica del titanio o delle leghe di titanio compreso tra $9,6$ e $10,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500 °C) e la grande affinità con l'ossigeno, richiede l'uso di una ceramica specifica, che possa adattarsi in modo ottimale a queste particolari caratteristiche.

- ▷ Massima adesione grazie allo speciale Bonder (42 Mpa)
- ▷ Sviluppo della già nota ceramica Triceram®
- ▷ Eccellente resistenza alla flessione: 115 MPa (Dentina)
- ▷ Semplice tecnica di stratificazione
- ▷ Estetica naturale grazie alle speciali masse opalescenti, fluorescenti e traslucenti


Le speciali caratteristiche comuni a tutte le linee di ceramica ceraMotion®, rappresentano il vero, grande vantaggio di questo nuovo sistema: il più alto livello di estetica, sicurezza ed economicità mai raggiunto prima!

Con l'innovativo concetto Touch Up è possibile ottenere un'elevata estetica con estrema facilità. La nuova filosofia ceraMotion® dell'ibrido permette una migliore efficienza della tecnica di stratificazione grazie a protocolli operativi identici per qualsiasi materiale da struttura. Le presso-ceramiche ceraMotion® si armonizzano perfettamente con tutte le masse da stratificazione. Grazie al processo di termopigmentazione è possibile ottenere la massima stabilità cromatica. Un altro convincente elemento del sistema ceraMotion® è il Chroma Concept, che permette di disporre di una gamma colori praticamente identica a quella esistente in natura. Il processo di produzione è, inoltre, in grado di garantire l'eccellente stabilità di forme e spigoli nonché mantenere costante il valore CET. Nonostante la vastità della gamma prodotti, il concetto ceraMotion® assicura comunque un'ottima visibilità delle singole masse. Il potenziale offerto dal sistema ceraMotion® è unico nel suo genere e si basa sull'esperienza e la competenza delle aziende del Gruppo Dentaureum da anni impegnate nello sviluppo e nella produzione di ceramiche dentali, di leghe e di rivestimenti.





Foto: © Christian Ferrari®

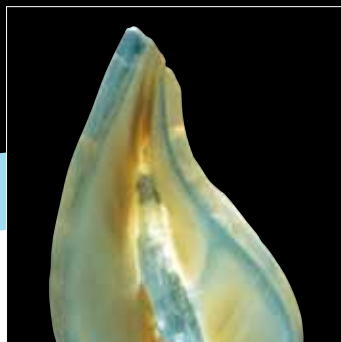

Migliore estetica con
estrema facilità



Panoramica prodotti ceraMotion® Ti

Bonder in polvere	B	polvere
Bonder in pasta	PB	pasta
Opachi in polvere	O	A-D
Modificatori Opachi in polvere	OM	gengivale, arancio
Masse Spalla	SM	A, B, C, D, bianco, trasparente
Masse Gengivali	G	1, 2, 3, 4
Dentine Base	BD	A-D
Modificatori Dentine Base	BDM	salmone, caramello, ocra, avorio, limone, vaniglia, marrone
Dentine	D	A-D
Modificatori Dentine Chroma	DM C	A, B, C, arancio
Modificatori Dentine Fluorescenti	DM F	crema, giallo, arancio
Masse Incisali	I	1, 2, 3
Masse Incisali Opalescenti	IO	1, 2, 3
Masse Incisali Trasparenti	IT	1, 2, 3
Massa Trasparente	T	trasparente
Modificatori Masse Incisali	IM	miele opalescente, bianco opalescente, blu opalescente, grigio, grigio opalescente
Opachi in polvere Chroma Concept	CC O	1 (bleach), 2, 3, 4
Dentine Chroma Concept	CC D	1 (bleach), 2 (bleach), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Masse Incisali Chroma Concept	CC I	1 (bleach)
Dentine Base Touch Up	TU BD	chiara, media, scura
Dentine Touch Up	TU D	chiara, media, scura
Masse Incisali Touch Up	TU I	media, opalescente, trasparente
Massa di Correzione	C	trasparente
Massa di Glasure	GL	trasparente
Body Stains	B ST	A, B, C
Stains	ST	1 bianco, 2 vaniglia, 3 giallo, 4 arancio, 5 rosa, 6 viola, 7 blu, 8 grigio, 9 verde oliva, 10 giallo oliva, 11 marrone medio, 12 rosso-bruno, 13 nero
Liquidi		liquido di modellazione, liquido di modellazione +, liquido per paste, liquido per polveri BOL, liquido per Masse Spalla, liquido per Stains, marcatori di contrasto
Cofano da 8 colori 8 colori A - D (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D3) comprese varie Masse Incisali ed Effetti		
Cofano Chroma Concept 17 masse ceramiche: Opachi, Dentine e Bleach		
Cofano Touch Up 10 masse ceramiche: Opachi, Dentine Base, Dentine e Incisali		
Cofano Stains universali 8 colori per effetti interni ed esterni		

Data dell'informazione: 06/11

Soggetto a variazione

ceraMotion® – Sviluppata e prodotta da:



Dentaurum Italia S.p.a. · Via degli Speciali, 142/144 · Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80 · Fax: 051/86.32.91 · www.dentaurum.it · E-Mail: info@dentaurum.it